

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройства. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.
- Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе.
- Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением.
- Внимательно изучите методические рекомендации – некоторые программы не рекомендуется использовать при вождении автомобиля.
- При наличии серьезных заболеваний проконсультируйтесь с врачом. Устройство не является медицинским прибором – оно не заменяет назначенное лечение.
- Для наилучшего результата используйте комплексный подход, включающий применение всех трех оздоравливающих устройств DeVita.
- Особые указания: некоторые программы не рекомендуется применять во время первого триместра беременности или при наличии трансплантированных органов.
- Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая правильный образ жизни и используя DeVita Ritm Base совместно с DeVita AP Base и DeVita Energy.



ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ГАРМОНИЗАЦИЯ

НА ЧТО ВОЗДЕЙСТВУЕТ

DEVITA RITM BASE



Гармонизирует работу органов и систем. Специальные программы направлены на улучшение работы кровеносной, мочеполовой, сердечно-сосудистой, выделительной и других систем организма.

Способствует активности и работоспособности. Устройство активизирует кровообращение, нормализует обмен веществ, повышает настроение, способствует хорошему сну и легкому пробуждению.

Улучшает память, концентрацию внимания, снимает усталость глаз. Программы DeVita Ritm Base можно применять в любом возрасте, они идеально подходят для школьников и студентов.




DeVitaCenter.com



+7 921 934 70 88

DeVita-технологии – это самый быстрый, простой, надежный и современный способ оздоровления

ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТ-СТАТИСТИКИ

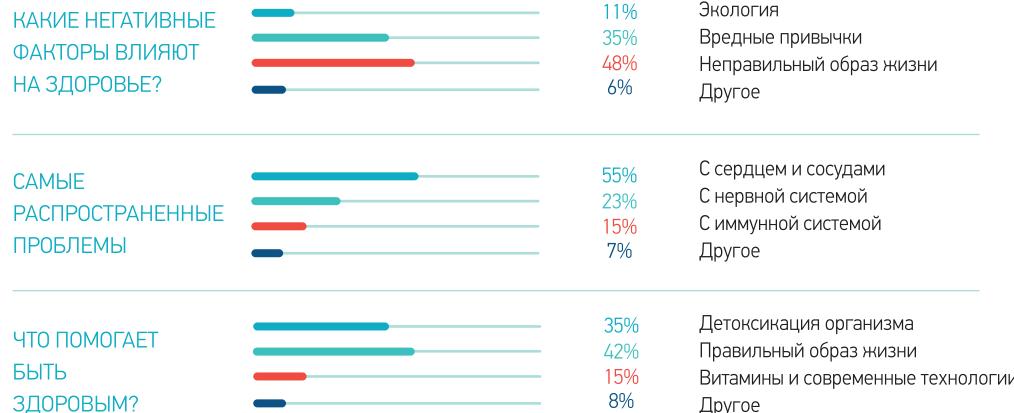

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Устройство DeVita Ritm Base является генератором слабых электромагнитных излучений, идентичных излучениям природных органических систем. Предназначено для усиления собственных защитных сил и корректировки естественных электромагнитных излучений природных биосистем. Принцип корректирующего воздействия основан на использовании частот Р.Райфа, Р.Фолля, Ф.Морелля.

DEVITA RITM BASE ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ:



ПОВЫШЕННЫХ УМСТВЕННЫХ НАГРУЗКАХ



СНИЖЕНИИ ИММУНИТЕТА



ОБЩЕЙ УСТАЛОСТИ



ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВКАХ




ПРОБЛЕМАХ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

Устройство содержит 30 базовых программ, обеспечивающих комплексное воздействие.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Восстановительное действие DeVita Ritm Base основано на разработках ученых Р.Фолля и А.Ф.Крамера, которые занимались изучением электромагнитного излучения организма. По исследованиям ученых, каждый орган имеет свои собственные колебания. Колебания ослабленных органов отличаются от здоровых. Биорезонансные частоты малой интенсивности имитируют колебания здоровых органов и «перенастраивают» организм на здоровую волну. В результате организм работает на самовосстановление. Устройство DeVita Ritm Base имеет отдельные частоты колебаний для различных органов и позволяет организму гармонизировать свою работу. Базовые программы направлены на решение наиболее распространенных проблем, также есть возможность установить дополнительные программы.

DeVita Ritm Base способствует поддержанию естественного гормонального баланса, улучшает работоспособность органов, предотвращает преждевременные возрастные изменения.

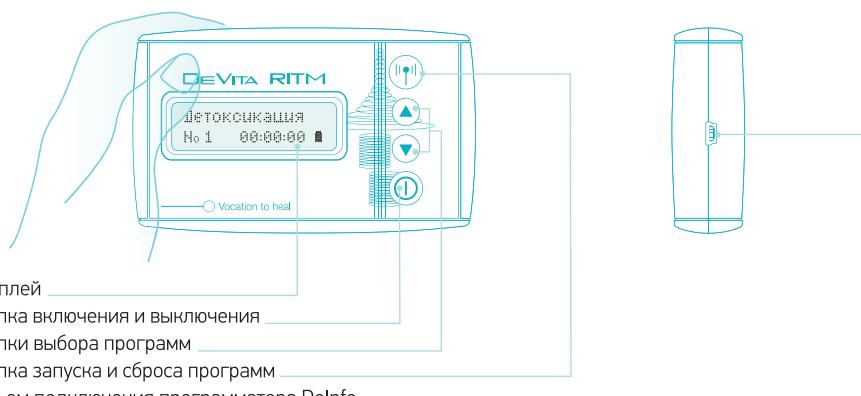

DeVita Ritm Base – это бытовой прибор оздоровительного назначения.

ПРОГРАММЫ DEVITA RITM BASE

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

Активная защита	1	16	Здоровое сердце
Кровообращение регуляция	2	17	Сердечный ритм в норме
Пищеварение	3	18	Антристуда
Детоксикация	4	19	Дышать легко
Антистресс	5	20	Женское здоровье
7 чакр	6	21	Мужское здоровье
Гормоны в норме	7	22	Здоровый сон
Чистые почки	8	23	Хорошее настроение
Чистая лимфа	9	24	Суставы без боли
Здоровое зрение	10	25	Суставы без воспалений
Женская сексуальность	11	26	Кишечник без проблем
Мужская сексуальность	12	27	Обмен веществ в норме
Стоп травмы	13	28	Красивая кожа
Предтреник	14	29	Красивые волосы и ногти
Тренировка	15	30	Без аллергенов
Здоровый день	1	2	Полное очищение

Активная защита + Кровообращение регуляция + Антистресс + Детоксикация + Пищеварение + Гормоны в норме + 7 чакр
создаются отдельно, при помощи ПРОГРАММАТОРА DeInfo

АВТОПРОГРАММЫ