

Устройство для ухода за
кожей на основе квантового
воздействия в сочетании
с гармонизацией и
корректировкой естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita
Cosmo-50

Методические рекомендации

Содержание

Введение

Кожа лица и общее состояние организма

Правила применения устройства квантовой косметологии

Программы электромагнитной и квантовой косметологии и профилактики различных заболеваний:

1. Твоя защита
 2. Регуляция кровообращения
 3. Регуляция пищеварения
 4. Очистка организма
 5. Живи спокойно
 6. Регуляция эндокринной
 7. Чистим почки
 8. Чистим лимфу
 9. Ясный взор
 10. Регуляция сердца
 11. Стоп простуда
 12. Легкое дыхание
 13. Регуляция сна
 14. Душевная гармония
 15. Стоп воспаление суставов
 16. Здоровый метаболизм
 17. Уход за кожей
 18. Краса ногтей и волос
 19. Почки в порядке
 20. Вегетативная в норме
 21. Нервы успокой
 22. Крепкая память
 23. Уши без боли
 24. Здоровое горло
-

25	Нормализуем щитовидку
26	Регуляция желудка
27	Здоровые мышцы
28	Регенерация травм
29	Нормализуем кишечник
30	Голова не болит!
31	Помощь бронхам
32	Мужская молодость
33	Женская молодость
34	Как по часам
35	Ключ жизни
36	Контролируем сахар
37	Стоп боль (суставы)
38	Крепкие суставы
39	Дыхание тканей
40	Здоровье предстательной
41	Сосредоточенность
42	Снорчтение
43	Учусь считать
44	Поддержка селезенки
45	Разглаживание морщин
46	Тонус лица
47	Коррекция зрения
48	Коса краса
49	Легкость ног
50	Мастер маникюра
	Заключение

Введение

Уважаемые дамы и господа!

В Ваших руках находится уникальное устройство электромагнитной и квантовой косметологии «DeVita-Cosmo». В нем реализован принципиально новый подход к предупреждению проблем кожи и улучшению внешнего вида человека.

С помощью «DeVita-Cosmo» Вы можете в домашних условиях проводить не только коррекцию работы различных органов, но и получать косметические процедуры.

Кожа лица и общее состояние организма

Когда мы говорим «кожа лица», особенно когда речь заходит о женской коже, мы представляем себе ее красоту и упругость, неповторимое сияние, ровный и нежный цвет и совершенно не задумываемся о ее строении. Для того чтобы понять, что нужно нашей коже, чем ее поддержать и чем повысить ее тонус, нужно четко представлять себе строение кожи лица.

Многим известно, что по лицу можно определить не только судьбу человека, его характер, но и состояние здоровья. Любые проблемы в работе органов тут же отражаются на лице в виде морщинок, раздражения, прыщей и т. д.

Правильно применяя программы устройства «DeVita-Cosmo», каждый может предотвратить появление на коже этих нежелательных «гостей».

С целью профилактики применять прибор рекомендуется с 15-25 лет не реже одного раза в неделю. С 25 лет «DeVita-Cosmo» желательно использовать регулярно. Это поможет коже лица дольше оставаться в прекрасном состоянии, а вам – в отличном настроении.

«DeVita-Cosmo» позволяет самостоятельно проводить косметические процедуры для кожи лица и тела.

Работая с устройством «DeVita-Cosmo», вы получаете возможность проявить творчество, стать здоровыми, красивыми и сохранить молодость на долгие годы.

Правила применения устройства квантовой коррекции

1. Выберите нужную программу на устройстве «DeVita-Cosmo».
2. Нажмите кнопку запуска программы.
3. Расположите устройство, как указано в методических рекомендациях.
4. Квантовой приставкой работайте по зонам проекции органов в соответствии с методическими рекомендациями.
5. Квантовую приставку располагайте на расстоянии 1-2 см от места воздействия так, чтобы ощущалось тепло.

6. Квантовую приставку необходимо передвигать плавно, со скоростью 1-2 см/секунду:

- по линиям, указанным на рисунке – линейное перемещение;
- круговые движения по часовой стрелке, если указана наибольшая зона – круговые перемещения;
- если указано несколько зон, то делаете 3-4 круговых движения по одной зоне, переходите на другую и т.д. Далее снова переходите на первую. Цикл повторяется – зональные перемещения.

7. Частоты программы сменяют одна другую, а вы ориентируетесь по ощущениям. Нельзя потерять ощущение тепла от квантовой приставки.

Внимание! Устройство имеет противопоказания к использованию женщинами первого триместра беременности, людьми, перенесшими трансплантацию органов, с тяжелыми заболеваниями сердца и нервной системы, при наличии кардиостимулятора, новообразований.

Перед применением необходима консультация специалиста!

DeVita Центр

Продажа приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Специальные условия для
Клуба Друзей

<https://devitacenter.com/devitacenter-friends-club>

1. Твоя защита

Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.

Зона проекции. От границы волос на лбу, вдоль средней линии лица к подбородку.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой совершать линейные движения вдоль средней линии лица от подбородка до границы волос на лбу и обратно. Глаза должны быть закрыты.



2. Регуляция кровообращения

Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.

Зона проекции. Нижнезатылочная зона (под буграми) по обе стороны от позвоночника.

Методика. Устройте устройство рядом с собой. Квантовой насадкой поочередно точно воздействовать на указанные зоны.



3. Регуляция пищеварения

Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.

Зона проекции. Проекционные области находятся на коже снаружи от угла рта, в средней части лба и под основанием нижней губы.

Методика. Устройство расположить в области живота, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны точечно по 10-15 секунд, повторять цикл до окончания работы программы.



4. Очистка организма

Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.

Зона проекции. Зона проекции находится между бровями, в пространстве между основанием переносицы и линией, соединяющей надбровные дуги на коже лба, а также, в области челюстного сустава.

Методика. Устройтесь расположить в области правого подреберья. Квантовой насадкой воздействуем на указанные зоны по очереди круговыми движениями. Глаза следует закрыть, ориентируйтесь по ощущениям тепла.



5. Живи спокойно

Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Регуляция сна».

Зона проекции. Зона располагается в верхней части лба, ближе к волосистой части головы по центральной линии лица.

Методика. Устройство расположите рядом с собой. Квантовой насадкой воздействуйте на указанную зону круговыми движениями. Желательно при работе с этой программой находиться в спокойной комнате, с приглушенным светом, глаза закрыть.



6. Регуляция эндокринной

Программа нормализует функцию системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.

Зона проекции. Проекционной областью является пространство на лице между носом и верхней губой.

Методика. Устройство расположить рядом с собой. Квантовой насадкой линейными движениями обрабатывать указанную зону.



7. Чистим почки

Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.

Зона проекции. Почки имеют несколько зон: внутренний угол глаза, средняя часть под надбровной дугой, верхняя часть ушной раковины.

Методика. Устройство можно расположить рядом с собой или со стороны почек. Квантовой насадкой линейно работать в области глаз в направлении от внутреннего угла глаза к наружному и точно в области ушей.



8. Чистим лимфу

Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.

Зона проекции. От области за ушами, вдоль мышцы к центральной части груди.

Методика. Устройство расположите в области солнечного сплетения, квантовой насадкой совершайте линейные движения в указанных зонах по направлению сверху вниз.



9. Ясный взор

Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.

Зона проекции. Располагается в области висков.

Методика. Прибор расположите в области солнечного сплетения, приставкой работайте в области висков круговыми движениями по 10-15 секунд с каждой стороны. Глаза могут быть закрыты, ориентируйтесь по ощущениям тепла.



10. Регуляция сердца

Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.

Зона проекции. Над надбровными дугами, кончик носа, левая верхняя область щеки на стыке с глазницей.

Методика. Устройство расположить рядом с собой, квантовой насадкой воздействуйте на указанные зоны поочередно линейными и точечными движениями. Глаза должны быть закрыты!



11. Стоп простуда

Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.

Зона проекции. Можно обрабатывать несколько зон: между бровей, крылья носа, область перед слуховым проходом, также между указательным и большим пальцами с тыльной стороны кисти.

Методика. Расположите устройство рядом с собой. Квантовой насадкой обрабатывайте точно указанные зоны, меняйте зону каждые 10-15 секунд.



12. Легкое дыхание

Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.

Зона проекции. Область возвышения большого пальца обеих рук с внутренней стороны ладони, верхняя часть грудины, крылья носа.

Методика. Расположите устройство рядом с собой. Квантовой насадкой обрабатывайте точно указанные зоны, меняйте зону каждые 10-15 секунд.



13. Регуляция сна

Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.

Зона проекции. Зонами являются несколько точек: 1-я точка между бровями, 2-я точка - окончание складки локтевого сустава с внешней стороны на обеих руках, 3-я точка – с тыльной стороны кисти между большим и указательным пальцами на обеих руках.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны точечно, чередуя через каждые 10-15 секунд.



14. Душевная гармония

Программа позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.

Зона проекции. Зонами являются несколько точек: 1-я точка между бровями, 2-я точка – окончание складки локтевого сустава с внешней стороны на обеих руках, 3-я точка – с тыльной стороны кисти между большим и указательным пальцами на обеих руках.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны точечно, чередуя через каждые 10-15 секунд.



15. Стоп воспаление суставов

Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения.

Зона проекции. Зоной проекции является область вокруг больного сустава.

Методика. Прибор направить на больной сустав. Квантовой насадкой воздействовать на область вокруг сустава круговыми движениями.



16. Здоровый метаболизм

Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.

Зона проекции. Мочки ушей и область под коленными чашечками ног.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать поочередно на указанные зоны точно по 10-15 секунд.





17. Уход за кожей

Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.

Зона проекции. Лицо в области щек и лба, область живота справа и слева от пупка.

Методика. Прибор расположить в области солнечного сплетения или в 30 см. от лица. Квантовой насадкой осуществлять круговые движения по очереди: лоб, щеки, живот. Цикл проводить до окончания работы программы. Для улучшения эффекта рекомендуем сочетать данную программу с программами «Регуляция пищеварения», «Женская молодость» или «Мужская молодость».



18. Краса ногтей и волос

Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных луковиц и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.

Зона проекции. Область вокруг пупка, волосистая часть головы, кисти рук с внешней стороны.

Методика. Устройство расположить в области пупка. Квантовой насадкой совершать по 4 круговых движения с правой и левой стороны волосистой части головы. Далее перейти на кисти рук и совершать линейные движения по внешней стороне от кончиков пальцев к запястью. Повторять обработку зон до окончания программы.



19. Почки в порядке

Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях.

Зона проекции. Почки имеют несколько зон: внутренний угол глаза, средняя часть под надбровной дугой, верхняя часть ушной раковины.

Методика. Прибор расположить в области поясницы, квантовой насадкой воздействовать поочередно на указанные зоны точно по 10-15 сек., поочередно с правой и левой стороны.



20. Вегетативная в норме

Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.

Зона проекции. Средняя линия лица от подбородка до лба.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой совершать линейные движения вдоль средней линии лица от подбородка до границы волос на лбу и обратно. Глаза должны быть закрыты.



21. Нервы успокой

Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.

Зона проекции. Зона располагается в верхней части лба, ближе к волосистой части головы по центральной линии лица.

Методика. Устройство расположите рядом с собой. Квантовой насадкой воздействуйте на указанную зону круговыми движениями. Желательно при работе с этой программой находиться в спокойной комнате, с приглушенным светом, глаза закрыть.



22. Крепкая память

Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.

Зона проекции. 1-я зона между бровей; 2-я место сочленения 1-ого шейного позвонка с черепной коробкой; 3-я расположена на макушке головы в месте пересечения двух линий: от кончика носа до макушки и от уха до уха.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны поочередно, через 10-15 секунд.



23. Уши без боли

Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.

Зона проекции. Область наружного слухового прохода и мочки уха.

Методика. Направьте прибор на себя, область не имеет значения. Квантовую насадку держите в указанной зоне со стороны больного уха. Если воспаление затрагивает оба уха, то воздействуйте насадкой на указанные зоны поочередно выдерживая по 10-15 секунд у каждого уха.



24. Здоровое горло

Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.

Зона проекции. Область поднижнечелюстного треугольника с правой и левой стороны.

Методика. Направьте прибор на себя, область не имеет значения, квантовой насадкой воздействуйте на указанные зоны, держа насадку по 10-15 секунд с каждой стороны. Центральную область шеи не затрагивать!



25. Нормализуем щитовидку

Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.

Зона проекции. Левая и правая доля железы проецируются на нижнюю часть шеи вдоль пищевода и надключичную область соответственно слева и справа.

Методика. Расположение устройства значения не имеет. Квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны поочередно круговыми движениями. Центральную область шеи не затрагивать!



26. Регуляция желудка

Программа способствует облегчению боли, восстановлению слизистой, нормализации работы желудка.

Зона проекции. Проекция располагается на коже в области спинки носа (средняя часть носа). При этом:

С левой стороны носа проецируется большая кривизна желудка.

С правой — малая, пилорический отдел желудка и двенадцатиперстная кишка.

Методика. Устройство расположить в области желудка. Квантовой насадкой воздействовать на зоны проекции точно. Глаза закрыть.



27. Здоровые мышцы

Программа помогает снять мышечный спазм, уменьшить болевые ощущения, улучшить кровоснабжение, повысить эластичность мышечных волокон.

Зона проекции. Верхняя часть ушной раковины, область со стороны спины в районе соединения шеи и плеча с двух сторон.

Методика. С целью предупреждения болевых ощущений в мышцах можно работать по зонам проекции, устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой работать по указанным зонам. При наличии боли в мышцах конкретной части тела, устройство расположить в 30 см от данной зоны, квантовой насадкой линейными движениями обрабатывать больные мышцы.



28. Регенерация травм

В сочетании с врачебной помощью программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.

Зона проекции. Областью применения является травмированный участок тела.

Методика. Устройство располагается рядом с травмированным участком, приставкой обрабатывают саму зону травмы линейными или круговыми движениями. Если травма локализуется в области лица, то при работе с насадкой глаза следует закрыть!



29. Нормализуем кишечник

Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Нормализуем кишечник».

Зона проекции. Выделяют несколько зон: кожа лба в верхних боковых и средней частях, средняя часть ладони с внутренней стороны.

Методика. Прибор расположить в области живота. Квантовой насадкой медленными линейными движениями воздействовать на соответствующие области лба, точно на ладони. Совершить 4 линейных движения по лбу, перейти на ладони (по 10 секунд на каждую ладонь), повторить цикл сначала до окончания программы.



30. Голова не болит!

Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.

Зона проекции. Область висков, затылочных бугров, начала надбровных валиков, и область, расположенная кзади от угла нижней челюсти, в углублении у переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Все области симметричные, располагаются как с правой, так и с левой стороны.

Методика. Прибор расположите ближе к голове. Квантовой насадкой воздействуйте на соответствующие зоны, в зависимости от локализации боли. Воздействие осуществляйте точно на каждую симметричную область по 10-15 секунд.



31. Помощь бронхам

Программа помогает снять аллергические проявления, спазм бронхов, улучшить самочувствие.

Зона проекции. Крылья носа.

Методика. Прибор расположить в области грудины. Квантовой насадкой воздействовать точно на указанные зоны поочередно по 10-15 секунд на каждую.



32. Мужская молодость

Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.

Зона проекции. От уголков рта по бокам от подбородка.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой по очереди совершать 4-5 линейных движений по боковым сторонам подбородка.



33. Женская молодость

Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климактерические нарушения.

Зона проекции. Проекционными областями являются: пространство на лице между носом и верхней губой, подбородок в центральной части, шея по обе стороны от щитовидной железы.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения. Квантовой насадкой совершать по 4-5 линейных или круговых движений в указанных зонах по очереди.

Внимание! Область щитовидной железы не затрагивать.



34. Как по часам

Используйте эту программу чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул.

Зона проекции. Проекционные зоны находятся на поверхности кожи лба в верхних боковых областях (справа и слева).

Методика. Прибор расположить в области живота, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны круговыми движениями. Проводить по 4 круговых вращения в каждой зоне до окончания работы программы.



35. Ключ жизни

Программа способствует нормализации функций поджелудочной железы при различных нарушениях.

Зона проекции. Поджелудочная железа представлена двумя зонами: спинка носа ближе к кончику, основание шеи с левой стороны между ключицей и грудино-ключично-сосцевидной мышцей.

Методика. Устройство расположить в области поджелудочной железы. Квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны по очереди 10-15 секунд на каждую. Цикл повторять до окончания работы программы.



36. Контролируем сахар

Поскольку сахарный диабет в китайской медицине – заболевание не конкретного органа, а сразу нескольких, то целесообразнее будет работать сразу с несколькими программами для достижения хорошего результата.

Методика. Прибор расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать на нижнюю область ладони посередине. Желательно сочетать использование данной программы со следующими программами: «Регуляция кровообращения», «Регуляция пищеварения», «Здоровый метаболизм», «Ключ жизни», «Регуляция желудка», «Почки в порядке».



37. Стоп боль (суставы)

Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.

Зона проекции. Областью применения является больной сустав.

Методика. Устройство располагается рядом с проблемным участком, приставкой обрабатывают сам сустав линейными или круговыми движениями.



38. Крепкие суставы

Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.

Зона проекции. Областью применения являются суставы.

Методика. Устройство располагается рядом с проблемным участком, приставкой обрабатывают сам сустав линейными или круговыми движениями. Для улучшения эффекта программа может использоваться в сочетании с другим программами: «Стоп боль (суставы)», «Стоп воспаление суставов».



39. Дыхание тканей

Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.

Зона проекции. Нижнезатылочная зона (под буграми) по обе стороны от позвоночника, средняя часть ушной раковины.

Методика. Устройство расположить рядом с собой. Квантовой насадкой поочередно точно воздействовать на указанные зоны по 10-15 секунд на каждую.



40. Здоровье предстательной

Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.

Зона проекции. Проецируется на верхней трети сонной артерии справа и слева.

Методика. Прибор расположите в нижней части живота. Квантовой насадкой водите по указанным зонам линейными движениями, воздействуя на каждую из них в течение 10-15 секунд попеременно до окончания работы программы. Желательно совмещать работу данной программы с программой «Мужская молодость».



41. Сосредоточенность

Программа помогает сконцентрироваться в нужное время и добиться больших результатов в различных видах деятельности.

Зона проекции. 1-я зона между бровей; 2-я место сочленения 1-ого шейного позвонка с черепной коробкой; 3-я расположена на макушке головы в месте пересечения двух линий: от кончика носа до макушки и от уха до уха.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны поочередно, через 10-15 секунд.



42. Скоротчение

Программа в сочетании с упражнениями помогает полностью избавиться от боязни чтения и усваивать материал в полной мере.

Зона проекции. 1-я зона между бровей; 2-я место сочленения 1-ого шейного позвонка с черепной коробкой; 3-я расположена на макушке головы в месте пересечения двух линий: от кончика носа до макушки и от уха до уха.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны поочередно, через 10-15 секунд.



43. Учись считать

Программа предназначена для помощи в развитии навыков счета. Применение программы во время таких тренировок (к примеру, разучивание таблицы умножения, решение математических задач) активизирует деятельность специфических областей головного мозга, снимает синдром неуверенности и таким образом способствует хорошему восприятию и запоминанию материала.

Зона проекции. 1-я зона между бровей; 2-я место сочленения 1-ого шейного позвонка с черепной коробкой; 3-я расположена на макушке головы в месте пересечения двух линий: от кончика носа до макушки и от уха до уха.

Методика. Устройство расположить в области солнечного сплетения, квантовой насадкой воздействовать на указанные зоны поочередно, через 10-15 секунд.



44. Поддержка селезенки

Состояние селезенки может отразиться на состоянии кожи лица, функционировании других органов и «настроении» всего организма. Поэтому очень важно регулярно проводить ее профилактику.

Зона проекции. Проекция селезенки находится на коже в левой височной области лица.

Методика. Устройство расположить с левой стороны тела на уровне последнего ребра. Квантовой приставкой воздействовать на указанную зону проекции круговыми движениями. Глаза следует закрыть!



45. Разглаживание морщин

Программа помогает решить проблему ослабления коллагеновых столбиков, основной причины образования морщин. Далее можно переходить к последующим программам, корректирующим работу органов и преображающим лицо.

Зона проекции. Область лица и шеи.

Методика. Расположите устройство на теле. Квантовой приставкой необходимо водить по линиям, указанным на рисунке в направлении стрелок. Здесь применяется линейное перемещение приставки. Глаза при проведении процедуры необходимо закрыть. Ориентируйтесь по ощущениям тепла.

Внимание! Квантовую приставку в зоне щитовидной железы не располагать.



46. Тонус лица

Программа дает энергию всему организму. Это вторая по значимости программа. Ее необходимо применять в профилактических целях. Рекомендуется применять ее утром. Полученная кожей энергия позволит противостоять отрицательному влиянию окружающей среды, сохранить молодость и красоту. Кожа будет сиять здоровьем весь день.

Зона проекции. Ушные раковины.

Методика. Расположите устройство на теле. Квантовую приставку перемещайте по очереди сначала по одной, затем другой ушной раковине, начиная с верхней части уха и плавно перемещая вниз. Перемещайте приставку с одного на другое ухо через каждые 4 цикла. (4 цикла – одно ухо, 4 – другое), так до конца работы программы.

Внимание! Программа применяется в утреннее или дневное время.



47. Коррекция зрения

Программа снимает спазмы мелких кровеносных сосудов в глазных мышцах. Восстанавливает нормальную работу мышцы, управляющей хрусталиком.

Зона проекции. Зоны расположены в височной области справа и слева.

Методика. Прибор располагается на теле. Квантовая приставка – в области виска со стороны глаза, которым выполняете упражнения, второй глаз при этом закрыт. Далее по инструкции:

- подойдите к окну;
 - найдите на стекле небольшую точку. Если ее нет, то нанесите на стекло маленькую точку (например, маркером);
 - расположите квантовую приставку в районе одного виска. Она не должна загораживать направление взгляда. Воздействуйте на указанные зоны круговыми движениями, ориентируясь по ощущению тепла;
 - во время работы устройства сосредоточьте внимание на точке на стекле так, чтобы она была в резкости (для этого выберите комфортное расстояние, при котором глаз не напрягается);
 - посмотрите на точку в течение 5 секунд. После этого переведите взгляд вдаль на 5 секунд;
 - повторяйте эту процедуру в течение 2-х минут. После этого прекратите упражнение, приставку не убирайте от виска.
 - дайте устройству отработать программу до конца;
 - постепенно увеличивайте время тренировки до 10 минут. После тренировки дайте глазам отдохнуть в течение 20-30 минут.
- При необходимости корректировки обоих глаз, сеансы для каждого из них проводите через день. При ежедневных сеансах на оба глаза работайте по схеме: 2 минуты тренировка и воздействие квантом на область одного глаза, далее 2 минуты работаем с другим глазом. Далее переходим на первый глаз и т.д., при этом максимальное время тренировки для каждого глаза должно составлять 10 минут. По окончании тренировки продолжаем воздействовать квантовой насадкой на область висков по 10 секунд с каждой стороны до окончания работы программы.

Внимание! После сеанса не желательно напрягать глаза в течение 2-х часов.



48. Коса краса

В межсезонье организм людей переживает стресс: волосы после зимнего сезона выглядят не идеально. Ежедневное выпадение волос (в норме до 100) является физиологически обусловленной нормой. Выпадение волос сверх нормы свидетельствует о нарушениях в работе организма, обусловленных стрессами, воздействием холода, сухого климата в помещении, дефицитом микроэлементов, иногда результатом применения определенных медицинских препаратов. Ваш первый помощник в профилактике выпадения волос программа «Коса краса».

Зона проекции. Волосистая часть головы справа и слева, область живота справа и слева от пупка.

Методика. Расположить устройство перед лицом или в области затылка. Квантовой приставкой в указанных зонах головы совершить по 4 круговых движения с одной и другой стороны, далее перейти на область пупка (справа и слева). Циклы повторять до полного окончания программы. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программу «Регуляция пищеварения».

DeVita Центр

Продажа приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Специальные условия для
Клуба Друзей

<https://devitacenter.com/devitacenter-friends-club>



49. Легкость ног

Красивые ноги – не только данность от природы. Они требуют постоянного внимания и ухода. Ведь здоровые ноги – это легкость при ходьбе, это молодость и уверенность в своих силах. Как часто в жаркую погоду, при ношении тесной обуви, особенно на каблучке, ощущается тяжесть и усталость в ногах. Комплексный уход совместно с программой «Легкость ног» нормализует кровообращение в ногах, снимает усталость и отечность.

Зона проекции. Наружная и внутренняя сторона стопы на обеих ногах.

Методика. Прибор расположить на расстоянии 20 см от обрабатываемой стопы. Квантовой приставкой совершать линейные движения от кончиков пальцев до основания стопы (голеностопного сустава). Сначала с тыльной стороны, затем со стороны подошвы. Повторить процедуру на другой ноге.



DeVita Центр

Продажа приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Специальные условия для
Клуба Друзей

<https://devitacenter.com/devitacenter-friends-club>

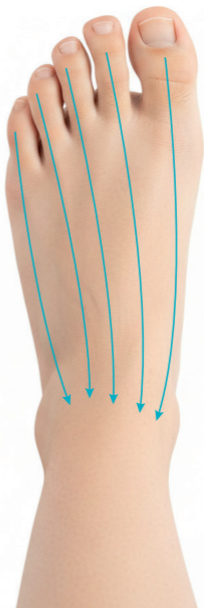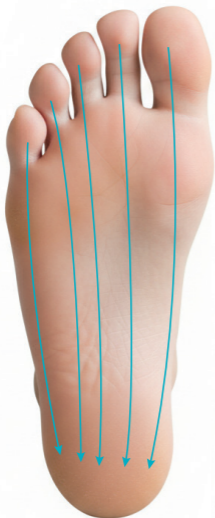

50. Мастер маникюра

Иметь красивые и ухоженные руки – престижно. Следует обращать внимание на питание, вредные привычки и на достаточное количество сна. Здоровье ногтей отражает здоровье всего организма человека. Для любых ногтей, какими бы красивыми они ни казались, важно регулярно проводить оздоровление, регулярно делать косметические процедуры. Отличный эффект наряду с процедурами даст применение программы «Мастер маникюра».

Зона проекции. Наружная и внутренняя стороны кисти на обеих руках, область живота справа и слева от пупка.

Методика. Устройство расположить в 20 см от обрабатываемой кисти. Квантовой приставкой совершать линейные медленные движения от пальцев к основанию кисти (лучезапястному суставу). Сначала с наружной, затем с внутренней стороны кисти. Повторить процедуру на другой руке. Перейти на область живота (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания работы программы.

DeVita Центр

Продажа приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Специальные условия для
Клуба Друзей

<https://devitacenter.com/devitacenter-friends-club>



Заключение

Не стоит забывать, что правильный образ жизни – отказ от вредных привычек, правильное питание, включающее весь комплекс витаминов и минералов, и ежедневный 8-часовой сон – это лучший способ сохранить молодость и цветущий вид кожи лица. В юности мы порой пренебрегаем этими простыми истинами, поэтому в зрелом возрасте нам приходится использовать специальные средства, чтобы вернуть коже лица молодость и свежесть. Тут уж или чипсы с колой или хорошая кожа, выбирать вам. И так, упражнений, как и способов, улучшить состояние своей кожи великое множество. Секретов особых тут нет. Следует следить за своим питанием и распорядком дня, т.е. высыпаться, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, стараться относиться к жизни легче, не вводя себя в состояние тотального стресса.

И еще, милые дамы и господа, улыбайтесь чаще. Ведь, улыбаясь, Вы дарите не только хорошее настроение окружающим Вас людям, но и минимизируете риск появления преждевременных морщин, т.к. во время улыбки напрягается на 60% меньше мышц лица, чем когда Вы хмуритесь. Хорошего Вам всем настроения!

DeVita Центр

Продажа приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Специальные условия для
Клуба Друзей

<https://devitacenter.com/devitacenter-friends-club>