


# КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



# СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЗДОРОВЬЯ

ОТ КОМПАНИИ DEHOLDING

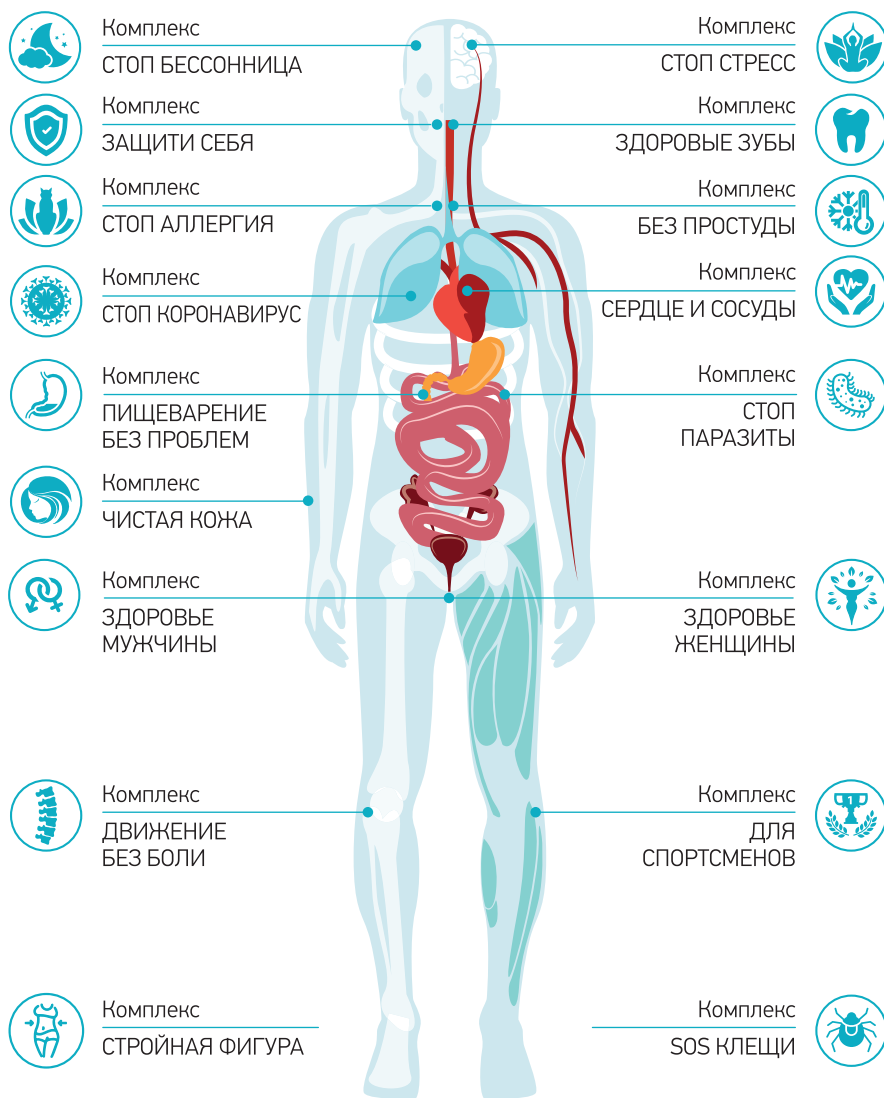

ДЛЯ НАИЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ УСТРОЙСТВА DEVITA  
СОВМЕСТНО С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ НАПИТКАМИ DELIXIR



## КОМПЛЕКС «БЕЗ ПРОСТУДЫ»

Действие комплекса направлено на активизацию защитных сил организма, повышение сопротивляемости и сокращение времени выздоровления.

## КОМПЛЕКС «СТОП АЛЛЕРГИЯ»

Действие комплекса направлено на устранение биологических аллергенов, повышение иммунитета, очищение от токсинов.

## КОМПЛЕКС «СТОП СТРЕСС»

Действие комплекса направлено на гармонизацию нервной системы, снятие хронической усталости и улучшение общего самочувствия.

## КОМПЛЕКС «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ»

Действие комплекса направлено на улучшение микроциркуляции крови и гармонизацию сердечного ритма.

## КОМПЛЕКС «СТОП БЕССОННИЦА»

Действие комплекса направлено на улучшение сопротивляемости умственным и психологическим нагрузкам, снижение нервного возбуждения.

## КОМПЛЕКС «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ»

Действие комплекса направлено на улучшение секреторной и моторной функции органов пищеварения и восстановление функций выделительной системы.

## КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»

Действие комплекса направлено на восстановление функций выделительной системы и снижение психо-эмоционального напряжения.

## КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ»

Действие комплекса направлено на защиту от инфекций, регуляцию половой деятельности и восстановление физиологических показателей.

## КОМПЛЕКС «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ»

Действие комплекса направлено на снятие воспаления суставов, восстановление после травм и улучшение работы опорно-двигательного аппарата.

## КОМПЛЕКС «ЧИСТАЯ КОЖА»

Действие комплекса направлено на избавление от шелушений и воспалений, повышение иммунитета кожи и улучшение внешнего состояния кожи, волос и ногтей.

## КОМПЛЕКС «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ»

Действие комплекса направлено на увеличение силовых показателей, нормализацию тонуса мышц и снятие болевых ощущений после тренировки.

## КОМПЛЕКС «СТОП ПАРАЗИТЫ»

Действие комплекса направлено на детоксикацию организма, повышение иммунитета, гармонизацию работы внутренних органов и восстановление после очищения от паразитов.

## КОМПЛЕКС «СТРОЙНАЯ ФИГУРА»

Действие комплекса направлено на нормализацию обменных процессов, снижение массы тела, улучшение психоэмоционального состояния и качества жизни.

## КОМПЛЕКС «ЗАЩИТИ СЕБЯ»

Действие комплекса направлено на снижение негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки, предупреждение развития нежелательных последствий для организма.

## КОМПЛЕКС «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ»

Действие комплекса направлено на снижение кровоточивости десен, улучшение здоровья слизистых, укрепление местного иммунитета, скорейшее восстановление после стоматологических вмешательств.

## КОМПЛЕКС «SOS КЛЕЦЦИ»

Действие комплекса направлено на снижение паразитарной и токсической нагрузки, поддержание гармоничной работы нервной системы, повышение энергетического состояния и улучшение общего самочувствия.

## КОМПЛЕКС «СТОП КОРОНАВИРУС»

Действие комплекса направлено на активизацию защитных сил организма, повышению сопротивляемости, снижению вероятности осложнений и сокращению сроков выздоровления.

## ВВЕДЕНИЕ

В основе комплексного подхода к здоровью от компании Deholding лежит теория гомотоксикоза доктора Х-Х. Реккевега. Им было введено понятие «гомотоксин», означающее любые токсические для человека вещества независимо от их природы. Это могут быть эндотоксины (продукты метаболизма или нерасщепленные/неудаленные в достаточном количестве) или экзотоксины (вредные факторы окружающей среды, возбудители инфекционных заболеваний, паразиты и др.). Из-за накопления в организме подобных веществ могут появляться те или иные болезни. Гомотоксикология рассматривает здоровье «как состояние свободы организма от гомотоксинов и отсутствие вызванных ими функциональных или органических поражений».

Комплексный подход дает возможность мягко, без стресса для организма, нормализовать внутреннюю среду организма, повысить энергию, улучшить качество жизни. Для достижения этой цели, прежде чем приступить к специальным комплексам, необходимо пройти курс восстановления ЖКТ, используя базовые комплексы «Пищеварение без проблем», или «Стоп паразиты». Они являются основополагающими в освобождении организма от токсической нагрузки и нормализации деятельности всех органов выделения.

# СОДЕРЖАНИЕ

## БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Пищеварение без проблем.....	7
Стоп паразиты.....	11

## ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

Сердце и сосуды.....	17
Стоп стресс.....	21
Стоп бессонница.....	25
Здоровье женщины.....	29
Здоровье мужчины.....	33
Движение без боли.....	37
Чистая кожа.....	41
Для спортсменов.....	45
Стоп аллергия.....	49

## ОСОБЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Без простуды.....	55
Стоп коронавирус.....	59

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

(используются только после одного из базовых комплексов)

Стройная фигура.....	65
Защити себя.....	69
SOS Клещи.....	73
Здоровые зубы.....	77


## ПРОГРАММЫ И ДЕЛИКСИРЫ

Перечень ручных программ DeVita AP.....	81
Перечень ручных программ DeVita Ritm.....	92
Эликсир здоровой жизни.....	100
DeLixir Multi-Energy, DeLixir Detox.....	101
DeLixir Collagen +, DeLixir pH Balance.....	102
DeLixir Ultra Slim +.....	103

## СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пояснения к использованию программ DeVita Ritm.....	104
Пояснения к использованию программ DeVita AP.....	110
Биологическая роль Деликсиров.....	121
Рекомендуемые программы DeVita для использования при различных функциональных проблемах.....	123

# БАЗОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ

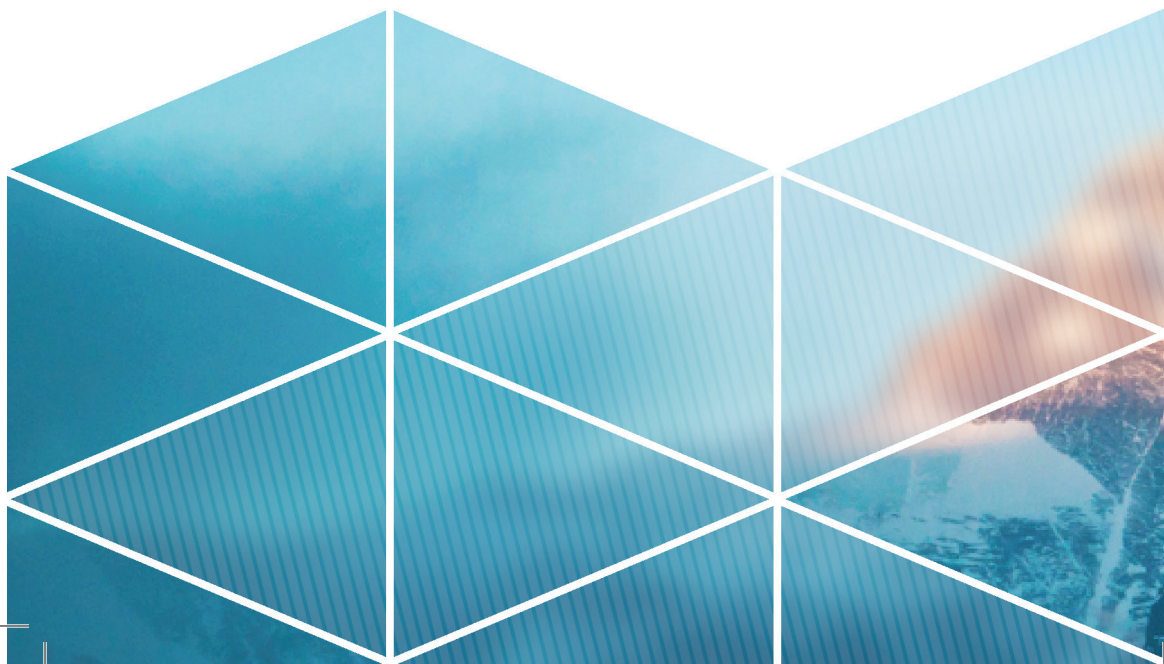



## КОМПЛЕКС ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОЧЕМУ ВАЖНО СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА?



Желудочно-кишечный тракт – это сложнейшая система, от которой зависит жизнедеятельность всего организма. Именно здесь происходит переработка пищи в вещества, необходимые для функционирования органов. И начинаются процессы получения энергии и строительного материала для новых клеток.



Большее половины населения мира страдает от расстройств пищеварительной системы. Их основные причины – несбалансированный рацион, плохая экология, неправильные пищевые привычки (переедание, диеты, питание «на ходу», полуфабрикаты и т.д.). Каждый четвертый человек имеет в своем анамнезе заболевание желудочно-кишечного тракта.




Это ведет к серьезным последствиям – от проблем с массой тела до болезней, требующих операционного вмешательства. Кроме того, проблемы с желудочно-кишечным трактом влияют и на общее самочувствие, работоспособность и внешний вид. Неправильный обмен веществ вызывает проблемы с кожей – угри, сухость или сальность, тусклый цвет лица, морщины.



Распространенные проблемы с пищеварением – это боли после еды и на голодный желудок, изжога, нарушения стула, тошнота и метеоризм. Человек вынужден соблюдать особую диету. Неприятные ощущения, связанные с желудком и кишечником, влияют на образ жизни, делая его менее активным, и ограничивают в путешествиях.



## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

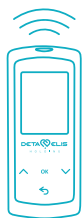

**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты нарушают секреторную и моторную функции желудка, поджелудочной железы, печени и кишечника. Своими телами паразиты могут перекрывать протоки печени и поджелудочной железы, вызывая их воспаление. Гельминты также являются проводниками для других микробов. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

Специальная программа «Без шистосом и трематод» снимает паразитарное отягощение печени и крови, восстанавливая их функции и уменьшая интоксикацию.

Специальные программы «ЖКТ в порядке», «Помощь при отравлениях», «Дренаж антитоксический» улучшают состояние при отравлении или кишечном гриппе, нейтрализуют и выводят токсины.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.



**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» нормализует работу желудка и кишечника, что особенно важно для людей с нарушением режима питания, способствует повышению защитных сил организма и гармонизации работы всех систем.

Специальные программы «Обмен веществ в норме» и «Кишечник без проблем» направлены на улучшение работы поджелудочной железы, нормализацию функций кишечника, что важно не только для восстановления общей работы пищеварения, но и для улучшения процессов всасывания, уменьшения тяжести и вздутия, восстановления иммунитета, нормализации обмена веществ.



**DeVita Energy** восстанавливает физиологические процессы в системе пищеварения, запускает механизм саморегуляции.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при болях, вздутии живота;
- при изжоге, ощущении тяжести;
- при расстройствах стула.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели









СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
	5		Специальные программы	Без шистосом и трематод	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 1-2 недели
6	Дренаж антитоксический			Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 3-4 недели	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

ПРИ ОТРАВЛЕНИИ	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	DeVita Ritm	Специальные программы	Детоксикация, Кишечник без проблем	Ежедневно в течение 10 дней
DeVita AP	Специальные программы	ЖКТ в порядке, Помощь при отравлении, Дренаж антитоксический	Ежедневно в течение 10 дней	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА И КИШЕЧНИКА

-  Употребляйте жидкость за 15-30 минут до или через 2-4 часа после еды, но не во время еды. Это разжижает желудочный сок и препятствует пищеварению.
-  Ешьте фрукты отдельно от других продуктов: либо за 30 минут до, либо через 3-4 часа после еды.
-  Соблюдайте умеренность в еде. Вставайте из-за стола с чувством легкого голода. Сигнал желудка о насыщении приходит в мозг не сразу. Наедаясь до сытости, вы рискуете переест.
-  Употребляйте свежеприготовленные продукты. Желательно готовить пищу непосредственно перед ее употреблением.
-  Ешьте небольшими порциями, 4-5 раз в день. Вы не должны испытывать сильный голод в перерывах между приемами пищи, но не надо есть и при явном отсутствии голода.
-  Во время еды не отвлекайтесь на чтение, телевизор, длительные разговоры. Также не питайтесь в плохом настроении. Все это мешает правильному усвоению пищи.
-  Ешьте медленно, жуйте долго и тщательно, чтобы пища максимально пропиталась слюной.
-  Вечером желательно не есть за 2 часа до сна. Возникшее чувство голода можно утолить чем-то легким – например, нежирным творогом или кефиром.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Болевые ощущения, дискомфорт в области живота, изжога, тяжесть, вздутие живота.

После первого  
использования DeVita



Уменьшение болевых ощущений, снятие изжоги и тяжести, улучшение настроения.

После месяца  
использования DeVita



Нормализация работы пищеварения, устранение обострения хронических заболеваний, отличное самочувствие.



Используйте схему оздоровления комплекса «ПИЩЕВАРЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ» совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС СТОП ПАЗАРИТЫ

### ЧЕМ ОПАСНО ЗАРАЖЕНИЕ ПАРАЗИТАМИ?



Паразиты попадают в организм через кожные покровы, с пищей, водой, пылью, от домашних питомцев или других людей. Они могут селиться во всех органах и тканях, а также жить под кожей или на коже. Паразиты поглощают жизненно необходимые элементы, выделяют токсины, уничтожают клетки крови.



Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих хронических заболеваний органов ЖКТ, бронхолегочной системы, кожи. А любые оздоровительные мероприятия (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дадут положительного эффекта.



Паразитарные заболевания опасны тем, что отлично маскируются под другие болезни. Симптомы заражения паразитами – это хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкость ногтей и волос, головные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета.



Лечение от паразитов, особенно в запущенных случаях, очень агрессивно по отношению к организму. Антипаразитарные препараты оказывают негативное воздействие на печень и желудочно-кишечный тракт, убивая полезную микрофлору. Поэтому гораздо легче предотвратить попадание и размножение паразитов в организме.


## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Бактерии, вирусы, грибки, паразиты или их токсины являются основной причиной ухудшения здоровья и одной из главных причин смерти. Паразиты ослабляют иммунитет, повышают степень интоксикации, поражают органы, изменяют pH среды, вносят дисбаланс в работу организма. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимают паразитарную нагрузку и признаки воспаления.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.

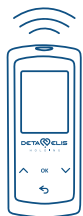

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровоснабжение органов, снимает стрессовые нагрузки, что способствует повышению иммунитета.

Автопрограмма «Полное очищение» воздействует на органы с учетом их суточной активности, мягко очищая организм от накопившихся токсинов и гармонизируя работу всех органов и систем.



**DeVita Energy** запускает механизмы саморегуляции, способствует ускорению процесса восстановления и распределению энергетического баланса. Позволяет организму быстро прийти в форму после очищения от паразитов, сохранить бодрость и хорошее настроение.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при воспалительных процессах, появлении аллергии, ухудшении состояния кожи, волос и ногтей;
- при изменении аппетита, повышенной утомляемости, нарушении стула;
- при наличии необъяснимых болей;
- для поддержания здоровья у групп риска: владельцев домашних животных, путешественников.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX.



## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
	5		Специальные программы	Стоп бактерии	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, 14 дней.
6	Стоп герпес симплекс, Стоп герпес, Без гепатита А			По необходимости, согласно методическим рекомендациям	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАРАЖЕНИЯ ПАРАЗИТАМИ



Подвергайте продукты и воду тщательной термической обработке перед употреблением. Предпочтительнее варить пищу, чем жарить. Старайтесь не есть мясо диких животных, речную рыбу, а также вяленую и слабосоленую рыбу.



Перед поездкой в тропические страны сделайте необходимые прививки. С осторожностью относитесь к местной пище.



Старайтесь не ходить босиком на пляже – в песке живут нематоды.



После контакта с бродячими животными мойте руки с щелочным мылом (хозяйственным) – мягкое туалетное мыло может не полностью удалить личинки паразитов.



При работе на садовом участке надевайте перчатки.



Если вы часто путешествуете, гуляете на природе, работаете в саду, контактируете с домашними животными, проводите медикаментозную профилактику паразитов 1 раз в год.



Мойте фрукты и овощи с мылом и щеткой не менее 1 минуты.



При появившихся проблемах с ЖКТ, боли в мышцах, общем недомогании обращайтесь к врачу.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Головные боли, тошнота, затаенный кашель, чувство утомления, слабости, расстройство стула.

После первого  
использования DeVita



Улучшение  
общего  
состояния  
организма.

После месяца  
использования DeVita




Появление энергии,  
исчезновение боли,  
нормализация работы  
всех систем.



Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП ПАРАЗИТЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



# ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

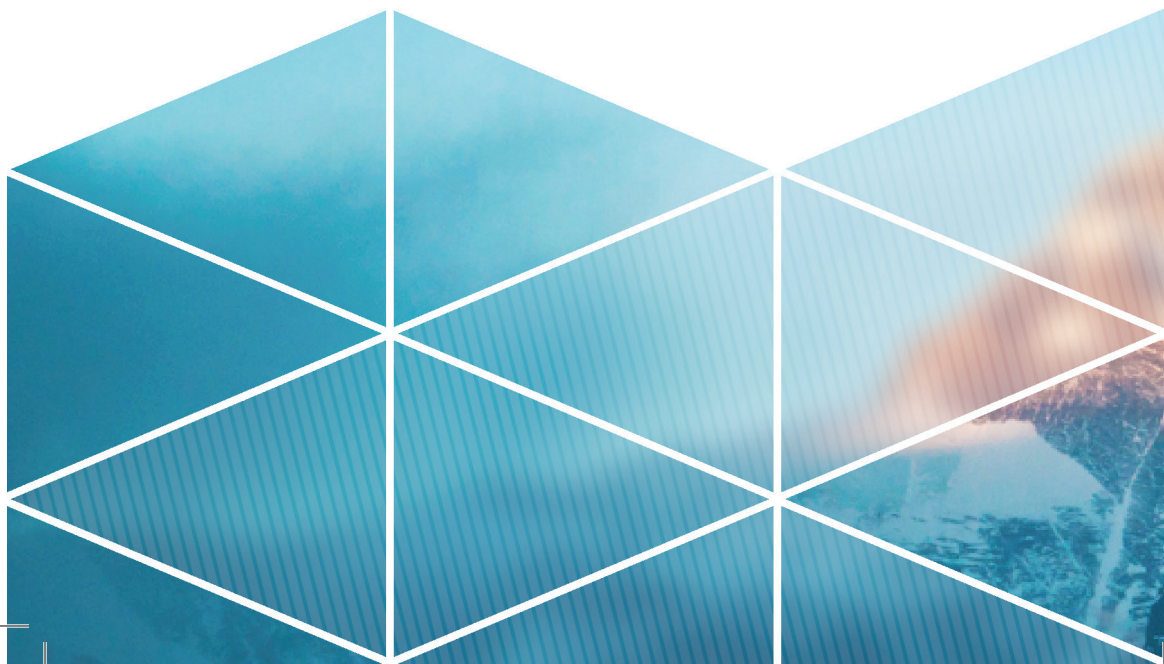



## КОМПЛЕКС СЕРДЦЕ И СОСУДЫ

### НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ?



Основная функция сердечно-сосудистой системы (ССС) – обеспечение органов питательными веществами, кислородом и энергией. Также с кровью из органов «уходят» продукты распада и токсины. Сердечно-сосудистая система работает постоянно, без перебоев, а малейшие сбои в ее работе приводят к проблемам во всем организме.



Заболевания ССС занимают лидирующие позиции среди других болезней. Факторами риска являются стрессы, негативные привычки, малоподвижность, – они встречаются в жизни практически каждого человека. Также заболевания ССС вызываются врожденными дефектами, травмами, воспалениями, нарушениями обмена веществ.




Самыми распространенными заболеваниями являются ишемическая болезнь, гипертония, аритмия, атеросклероз. Они могут привести к инфарктам, инсультам и гипертоническим кризам – основным причинам смерти в развитых странах. Эти проблемы появляются не только в преклонном возрасте – известны случаи инфаркта в 30-35 лет.



Проблемы сердечно-сосудистой системы опасны тем, что долгое время проходят бессимптомно. А их первые признаки похожи на обычное утомление – это одышка, головокружение, тошнота, мигрени. Зачастую человек обращается за помощью уже тогда, когда проблемы с сердцем и сосудами перешли в развитую стадию.



## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

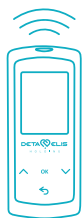


**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты, попадая в организм человека, оказывают токсическую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ухудшают ее работу. Микробы разрушают сердце и сосуды, мигрируя по сосудистому руслу и поселяясь в сердечной мышце и окружающих ее оболочках. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP действуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

Специальная программа «Без шистосом и трематод» очищает кровь от паразитов, которые влияют на состояние сосудов и сердца человека.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и улучшения общего самочувствия.

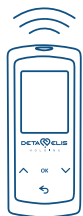

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» благотворно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, помогая раскрываться даже мелким капиллярам. Улучшает микроциркуляцию крови, питание тканей и клеток. Активизирует процесс саморегуляции организма и повышение иммунитета. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Специальные программы «Здоровое сердце» и «Сердечный ритм в норме» восстанавливают ритм сердца, уменьшают влияние негативных факторов, обеспечивают нормальное кровоснабжение сердца.



**DeVita Energy** снимает психоэмоциональное напряжение, что является одной из причин возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Запускает процессы саморегуляции организма и восстанавливает энергетику.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при нарушении сердечного ритма (аритмии);
- при проблемах с венами и артериями;
- при недостаточности кровообращения;
- при общих проблемах сердечно-сосудистой системы.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
				Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
				Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
				Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели
СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА					
1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром	
2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день	
		Специальные программы	Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости	
4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь	
			Специальные программы	Без шистосом и трематод	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 1-2 недели
				Нет хламидиям	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 3-4 недели
			6		
СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА					
1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром	
2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра	
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	
СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА					
1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром	
2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день	
		Специальные программы	Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости	
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ



Снизьте употребление соли. Соль задерживает воду, что увеличивает объем крови и приводит к повышению давления.



Следите за артериальным давлением. Нормальные показатели – это 120/80 мм рт. ст.



Раз в год делайте кардиограмму.



Следите за уровнем глюкозы и холестерина в крови. Излишки сахара и холестерина вызывают отложения на стенках сосудов и закупоривают их.



Вовремя лечите ангину и другие бактериальные инфекции. Хроническое воспаление создает нагрузку на сердце и вызывает интоксикацию.



Употребляйте в пищу отварную или паровую рыбу и птицу, авокадо, льняное масло, орехи, тыкву, брокколи, гранат, чеснок и лук, имбирь, куркуму, овсяные и кукурузные отруби, отвары из плодов боярышника и шиповника, курагу и инжир.



Ограничьте в употреблении рафинированное масло, жирное и жареное, сахар и соль.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Усталость при подъеме  
и быстрой ходьбе.  
Утомляемость, снижение памяти,  
работоспособности.

После первого  
использования DeVita



Повышение  
общего тонуса организма,  
выравнивание  
сердечного ритма.

После месяца  
использования DeVita



Повышение выносливости,  
улучшение состояния  
сосудов, памяти,  
отсутствие одышки.



Используйте схему оздоровления комплекса «СЕРДЦЕ И СОСУДЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС СТОП СТРЕСС

### ЧЕМ ОПАСЕН СТРЕСС?



Стресс – это ответная реакция организма на перенапряжение, негативные эмоции или волнение. При сильном или длительном стрессе страдает иммунная, эндокринная, вегетативная нервная система. Стрессовые ситуации – причина многих физических и психических заболеваний. Опасность стресса в том, что его последствия могут накапливаться постепенно.



При сильном или длительном стрессе:

- Ухудшается концентрация внимания, появляются мигрени;
- Возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- Обостряются язвенная болезнь и гастрит;
- Снижается иммунитет;
- В особо тяжелых случаях происходит дегенерация клеток спинного и головного мозга.



Под влиянием стресса тяжело работать и заниматься привычной деятельностью. Появляется раздражительность, бессонница, неврозы. Снижается физическая выносливость. Становится трудно сконцентрироваться на привычных делах – рабочих и домашних. Страдают и отношения с близкими людьми. Возникает пристрастие к алкоголю и наркотическим веществам.



Тяжелые стрессовые ситуации требуют серьезного лечения – от сеансов психотерапии до приема лекарственных препаратов, которые могут вызвать привыкание. Выход из сильного стресса может длиться несколько лет. Гораздо эффективнее вовремя замечать первые признаки стресса или предотвращать стрессовые ситуации.


## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Стресс снижает защитные силы организма, что является благоприятным фактором для проникновения паразитов. Они негативно влияют на нервную систему, вызывая усталость, раздражительность и ухудшая качество сна. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и улучшения общего самочувствия.

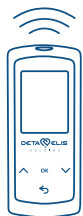

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» способствует повышению иммунитета и гармонизации работы всех систем. Помогает при акклиматизации и в стрессовых ситуациях. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Специальные программы «Здоровый сон», «Хорошее настроение» восстанавливают нервную систему, снимают нервное напряжение, улучшают процесс засыпания и качество сна.



**DeVita Energy** снимает напряжение и хроническую усталость. Восстанавливает биоритмы. Запускает функции регуляции организма, помогая человеку быть в тонусе, сохранять бодрость и хорошее настроение в течение дня.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при возникновении проблем со сном – бессоннице, ухудшении качества сна;
- при ощущении усталости по утрам, вялости и слабости в течение дня;
- при нервном перенапряжении, сильном возбуждении, частых проявлениях раздражительности, апатии.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX.



## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Хорошее настроение, Здоровый сон	По необходимости за 2-3 часа до сна
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Хорошее настроение, Здоровый сон	По необходимости за 2-3 часа до сна
4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Хорошее настроение, Здоровый сон	По необходимости за 2-3 часа до сна
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТРЕССА



Не подавляйте спонтанные эмоции. Подавленный гнев или тревога приводят к развитию стресса.



Питайтесь правильно. Добавьте в рацион апельсины и бананы, овсяную кашу, морскую рыбу, травяной чай, авокадо, орехи, свежие овощи, горький шоколад.



Ложитесь спать не позднее 23:00 часов. Спите 7-8 часов.



Занимайтесь медитацией или специальными дыхательными упражнениями.



Снизьте употребление кофе, чая и других кофеинсодержащих напитков.



Занимайтесь физическими упражнениями. Нагрузки вызывают выработку эндорфинов – гормонов хорошего настроения, а также направляют адреналин в нужное русло.



От стресса помогает спокойная монотонная работа или творчество – вязание, раскрашивание рисунков и т.п.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Агрессивность,  
усталость,  
апатия,  
бессонница.

После первого  
использования DeVita



Спокойствие,  
улучшение  
настроения,  
прилив энергии.

После месяца  
использования DeVita



Позитивное  
настроение,  
энергичность,  
уравновешенность.



Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП СТРЕСС» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС СТОП БЕССОННИЦА

### КАКУЮ ОПАСНОСТЬ ТАИТ БЕССОННИЦА?



Механизм сна изучен не до конца, однако доказана его первостепенная важность. Во сне происходят восстановительные процессы, структуризация информации, поступившей за день, и физический отдых. Именно в этот период происходит усваивание информации, обновление тканей организма и восстановление иммунитета.



Без полноценного сна организм не успевает восстановиться и дает сбои. В первую очередь страдает нервная система. Появляется раздражительность, агрессивность, вялость, апатия, снижается работоспособность. Резко падает настроение, человек становится некоммуникабельным. Это приводит к многочисленным конфликтам на работе и дома.



Затем появляются физиологические проблемы. Происходит резкое снижение иммунитета, так как иммунные клетки – Т-лимфоциты – синтезируются во сне. Повышается масса тела из-за выработки гормона стресса – кортизола. Хроническое недосыпание приводит к частым заболеваниям, утомляемости, плохому самочувствию.




Отсутствие полноценного и здорового сна значительно сказывается на внешнем виде. В коже лица снижается выработка коллагена, появляются морщины, снижается эластичность. Цвет лица приобретает землистый оттенок, появляются отеки, темные круги и морщинки под глазами. Могут возникнуть раздражения или высыпания.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Микробы и личинки крупных паразитов могут обитать в органах и тканях организма, в том числе, в нервной системе. Их присутствие и выделяемые ими токсины нарушают работу системы, приводя к быстрому утомлению, состоянию нервного возбуждения и, в дальнейшем, к нарушениям сна. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных патогенных организмов, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

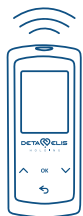

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов и, как следствие, снижению возбуждения нервной системы и улучшению общего самочувствия.

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает работу выделительных систем, активизирует кровеносную систему и иммунитет. Помогает справиться с физическими, умственными и психологическими нагрузками, создавая благоприятные условия для здорового сна. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Специальная программа «Здоровый сон» снижает нервное возбуждение, способствует быстрому засыпанию и хорошему качеству сна.



**DeVita Energy** снимает психоэмоциональное напряжение, стабилизирует работу нервной системы, способствует восстановлению энергии. Положительно влияет на качество сна, придает бодрость при пробуждении.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при проблемах с засыпанием;
- при нарушениях сна (чуткий сон, пробуждение среди ночи и т.д.);
- при состоянии нервного возбуждения.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Здоровый сон	По необходимости за 2 часа до сна
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Здоровый сон	По необходимости за 2 часа до сна
4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Здоровый сон	По необходимости за 2 часа до сна
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ СНА



Поддерживайте в спальне комфортную для сна температуру – 19-20 °С. Гуляйте перед сном и проветривайте комнату, а в теплый период спите с открытой форточкой.



Создайте ритуал отхода ко сну: примите горячую ванну, послушайте музыку, расслабьтесь. Старайтесь не заниматься в спальне рабочими или повседневными делами.



Старайтесь не спать днем. Или, по крайней мере, сократите дневной сон до 20-30 минут.



Залог хорошего сна – полная тишина и темнота. Используйте плотные шторы, а для защиты от посторонних звуков – беруши.



Помогает заснуть и заглушает посторонние звуки «белый шум» – монотонный звук радио на «пустой» частоте. Другие примеры – звук водопада, вентилятора, ветра, дождя.



Занимайтесь физическими упражнениями и принимайте пищу не позднее, чем за 2 часа до сна.



Уберите из спальни цветы и другие растения: кислород они вырабатывают только в дневное время, а ночью, наоборот, поглощают.



По возможности используйте в оформлении спальни синие и фиолетовые тона.



Включайте в свое вечернее меню продукты, обладающие успокаивающим действием: мед, молоко, бананы, тыкву, финики.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Плохое засыпание,  
тяжелое пробуждение,  
сонливость,  
беспокойство, апатия.

После первого  
использования DeVita



Эмоциональный  
и энергетический  
подъем, улучшение  
общего состояния.

После месяца  
использования DeVita



Бодрость,  
работоспособность,  
легкое пробуждение,  
улучшение коммуникации.



Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП БЕССНОННИЦА» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.





## КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

### ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ С ЖЕНСКИМ ЗДОРОВЬЕМ?



Женщины более приспособлены к долговременным нагрузкам и стрессам, чем мужчины. Но женский организм имеет свой ресурс, и при серьезных нагрузках происходит ослабление женского здоровья. Огромное влияние оказывает экология – каждая 5 жительница мегаполиса сталкивается с «женскими» проблемами.



Предвестниками сбоя в работе женского организма являются усталость, плохое настроение, раздражительность, постоянная разбитость, нежелание подниматься утром с постели и потеря интереса к близости с мужчиной. Если не обращать внимания на эти изменения, то они могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.



Сбои в работе женской мочеполовой системы приводят не только к нарушению цикла и дискомфорту, но и к проблемам с беременностью, воспалительным процессам и даже опухолям. Среди распространенных женских проблем – нерегулярный цикл, эрозия шейки матки, воспаление матки и маточных труб, цистит, бактериальные и грибковые инфекции.



Проблемы с женским здоровьем приводят и к негативным изменениям во внешности. Кожа становится более жирной, на ней может появиться повышенное оволосение. Появляются воспаления и акне. Сбои в выработке женских гормонов могут привести к быстрому набору массы тела и выпадению волос.




## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты и микробы вызывают воспаления органов женской мочеполовой системы и даже приводят к бесплодию и хроническим заболеваниям почек. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, оказывает антисептическое воздействие.

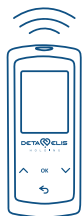

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А. Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» гармонизирует работу организма, энергию чакр, активизирует систему кровообращения, пищеварения, выделительную, нормализует функции мочеполовой системы и улучшает качество интимной жизни. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Специальные программы «Женская сексуальность», «Женское здоровье», гармонизируют половое влечение, регулируют деятельность репродуктивной системы, облегчают состояние женщины во время менструации и при климаксе.



**DeVita Energy** снимает психоэмоциональное напряжение, восстанавливает и усиливает физиологические показатели. Дарит энергию и бодрость, борется с заболеваниями, передающимися половым путем, убирает психологические зажимы.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при нарушении менструального цикла;
- при сильных менструальных болях;
- для гармонизации работы организма в климактерический период;
- при снижении сексуального влечения.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ









СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Женское здоровье	Ежедневно во второй половине дня
	4	Женская сексуальность		По необходимости, согласно методическим рекомендациям	
	5	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	6			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	7			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	8			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Женское здоровье	Ежедневно во второй половине дня
	4	Женская сексуальность		По необходимости, согласно методическим рекомендациям	
	5	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
6	Специальные программы		Нет хламидиям	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Женское здоровье	Ежедневно во второй половине дня
	4	Женская сексуальность		По необходимости, согласно методическим рекомендациям	
5	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

-  Посещайте гинеколога и уролога не реже 1 раза в год.
-  Соблюдайте гигиену. Пользуйтесь специальными очищающими средствами – обычное мыло нарушает микрофлору мочеполовой системы.
-  Принимайте гормональные препараты и контрацептивы только по назначению врача. Не пейте лекарства, особенно антибиотики, дольше 7 дней без особых указаний.
-  Ведите регулярную половую жизнь, обязательно используйте средства защиты от заболеваний, передающихся половым путем.
-  Оберегайте органы мочеполовой системы от воздействия чрезмерного тепла или холода.
-  Не поднимайте тяжести и контролируйте физическую нагрузку во избежание опущения матки и других проблем.
-  Двигайтесь не менее 20 мин в день, чтобы избежать застоя в органах таза.
-  Исключите занятия спортом и половые отношения во время менструации.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Плохое настроение,  
снижение либидо,  
дискомфорт  
и нарушения цикла.

После первого  
использования DeVita



Прилив энергии, уменьшение  
болевых ощущений,  
устранение  
раздражительности и апатии.

После месяца  
использования DeVita



Улучшение настроения,  
нормализация работы  
репродуктивной системы,  
повышение либидо.



Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ

### ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ?



Даже молодые люди могут иметь проблемы с эрекцией из-за нездорового образа жизни и урологических заболеваний, самым распространенным из которых является простатит. Еще одно опасное заболевание – аденома простаты, доброкачественная опухоль предстательной железы. Ей страдает каждый 2 мужчина старше 50.



Острый простатит проходит тяжело, с повышенной до 39-40°C температурой тела. Мочеиспускание затрудняется и становится очень болезненным. При отсутствии лечения простатит переходит в хронический. Он может поразить мочевой пузырь и почки, вызвать воспаление простаты и сепсис. А источник инфекции не всегда можно определить.



Аденома простаты возникает из-за совокупности причин – возраста, гормональных нарушений, ожирения, стрессов и т.д. Аденома простаты опасна осложнениями – она вызывает острую задержку мочеиспускания, недержание мочи, проблемы в сексуальной жизни, инфекции мочеполовой системы. Аденома часто требует оперативного лечения.



Из-за простатита и аденомы простаты нарушается не только процесс мочеиспускания, но и потенция. А осложнения при этих заболеваниях могут привести к бесплодию. Часто мужчины сталкиваются с психологическими расстройствами – это приводит к депрессии, неврозам, хроническому стрессу и другим неврологическим заболеваниям.


## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты вызывают воспаления органов мочеполовой системы. Заболевания протекают незаметно для человека, оказывая серьезное влияние на функцию мочевыводящей и репродуктивной систем. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, оказывает антисептическое воздействие.

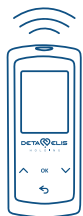

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» гармонизирует работу организма, нормализует функции мочеполовой системы и улучшает качество интимной жизни. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Специальные программы «Мужская сексуальность», «Мужское здоровье», повышают уверенность в себе и половое влечение, регулируют половую деятельность, обеспечивают нормальную работу мочеполовой системы.



**DeVita Energy** снимает психоэмоциональное напряжение, восстанавливает и усиливает физиологические показатели. Придает активность, снижает накопленную за день усталость.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при нарушении потенции;
- при психологических проблемах, связанных с «неврозом ожидания неудачи»;
- при проблемах с мочевым пузырем и простатой.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Мужское здоровье
	3 DeVita AP	Автопрограммы		Мужская сексуальность
			Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	4 DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Мужское здоровье
	3 DeVita AP	Автопрограммы		Мужская сексуальность
			Очищение автомат	Ежедневно на ночь
			Специальные программы	Нет хламидиям

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
	3 DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Мужское здоровье
	3 DeVita AP	Специальные программы		Мужская сексуальность
Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ			Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	



## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ МОЧЕПОЛОВОЙ СФЕРЫ



Ведите регулярную и стабильную половую жизнь. Излишняя активность и длительное воздержание ведут к нарушению в работе мочеполовой системы.



Активно двигайтесь минимум 20 мин в день. Сидячий образ жизни вызывает застой в половых органах.



Избегайте переохлаждения, особенно в области паха.



При смене постоянного партнера обязательно используйте презервативы. Инфекции, передающиеся половым путем, могут вызвать простатит.



Следите за регулярностью стула. Частые запоры приводят к простатиту.



4 раза в год проводите курс массажа поясницы.



Проходите профилактический осмотр у уролога 2 раза в год.



Разнообразьте рацион свежими фруктами, овощами, зеленью, морепродуктами, орехами и семечками.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Боли внизу живота,  
частые позывы  
к мочеиспусканию,  
проблемы в сексуальной сфере.

После первого  
использования DeVita



Снятие болевых  
ощущений, улучшение  
настроения,  
прилив энергии.

После месяца  
использования DeVita



Нормальная работа  
мочеполовой системы,  
стабильная эрекция,  
уверенность в себе.



Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ

### ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОБЛЕМЫ С ПОЗВОНОЧНИКОМ И СУСТАВАМИ?



Проблемы с позвоночником и суставами – это плата за прямохождение. Имея только две точки опоры, человеческое тело вынуждено постоянно сохранять равновесие. Строго говоря, каждый человек обречен на повышенную нагрузку и проблемы с позвоночником. Из-за этого суставы испытывают повышенную нагрузку.



Мы еще больше усугубляем эти проблемы, ведя сидячий образ жизни, поднимая тяжести или не обращая внимания на осанку. Огромную роль играет обувь, которая призвана смягчать нагрузку на позвоночник, но не всегда выполняет эту функцию. Тем временем, более 70% людей имеют искривления позвоночника.



Самые распространенные проблемы – это нарушение подвижности, сильные боли и воспаления. А это косвенным образом влияет на появление ожирения, варикозного расширения вен, проблем с ЖКТ и общей усталости. В особо тяжелых случаях проблемы с позвоночником и суставами приводят к ограничению движения и инвалидности.



Болезни спины и суставов долгое время могут проходить незамеченными, но в самый неожиданный момент заявляют о себе сильной болью. Лечение способно, в основном, только снять симптомы – уменьшить боль, улучшить подвижность и кровообращение. Поэтому важно вовремя позаботиться о здоровье позвоночника и суставов.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ




**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Попавшие в организм личинки паразитов оседают на оболочке, выстилающей суставную полость, или в околосуставных тканях, вызывая воспаление. Также паразиты поражают позвоночник. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки воспаления.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.

Специальные программы «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический» способствуют снижению токсической нагрузки при наличии в организме специфических групп микроорганизмов и солей тяжелых металлов, оказывающих негативное воздействие на опорно-двигательный аппарат.

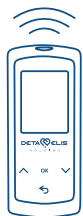

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, мягко снижает токсическую нагрузку, что способствует повышению иммунитета, улучшает отток продуктов метаболизма из поврежденных областей. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.

Программы «Стоп травмы», «Суставы без воспаления», «Суставы без боли» снимают воспаление, болевые ощущения, отечность, активизируют обменные процессы в поврежденных тканях, нормализуют тонус мышц, улучшают работу связочного аппарата.



**DeVita Energy** запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические процессы в органах и тканях. Придает бодрость и активность, заряжая энергией для движения.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при болях в суставах и позвоночнике;
- при травмах и воспалениях мышц и суставов;
- при защемлении нервов.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ









СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Суставы без боли и/или Суставы без воспаления, и/или Стоп травмы	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Суставы без боли и/или Суставы без воспаления, и/или Стоп травмы	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
5	Специальные программы		Стоп бактерии, Дренаж антиоксидантный	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 14 дней.	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Суставы без боли и/или Суставы без воспаления, и/или Стоп травмы	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
4	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

-  Употребляйте витамины и минералы курсами, весной и осенью.
-  Следите за осанкой. Прислонитесь спиной к ровной стене – ваш затылок, лопатки, ягодицы и ступни должны касаться стены. При необходимости проконсультируйтесь с врачом и приобретите корректирующий корсет.
-  Спите на ортопедическом матрасе и подушке.  
В крайнем случае – на плотной твердой поверхности. Засыпайте, лежа на спине.
-  Занимайтесь лечебной физкультурой, укрепляющей мышечный корсет и пресс. Развитые мышцы пресса снимают нагрузку с поясницы.
-  При занятиях спортом и поднятии тяжестей соблюдайте правильную технику – не округляйте спину, напрягайте пресс.
-  Употребляйте в пищу кисломолочные продукты, богатые кальцием, а также продукты с содержанием желатина – холодец и желе.
-  Проконсультируйтесь с врачом, если вы хотите попробовать новую физическую активность – йогу, степ-аэробiku, силовые тренировки и т.д.
-  С осторожностью относитесь к остеопатии, мануальной терапии, механическому массажу.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Боли в спине  
и суставах,  
усталость,  
головные боли.

После первого  
использования DeVita



Снижение  
болевых  
ощущений,  
чувства усталости.

После месяца  
использования DeVita



Быстрое  
восстановление,  
легкость движения,  
отсутствие болей.



Используйте схему оздоровления комплекса «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС ЧИСТАЯ КОЖА

### ЧЕМ МОГУТ БЫТЬ ВЫЗВАНЫ ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ?



Состояние кожного покрова является индикатором здоровья человека. Сбои в работе некоторых систем организма: пищеварительной, эндокринной, иммунной, кровеносной – отражаются на коже лица и тела. Также на состояние кожи и волос оказывает влияние экология, стресс, использование некачественной косметики.



Наиболее распространенные проблемы кожи лица – это акне и угри, пигментные пятна, купероз. В основном, эти проблемы имеют возрастные причины, связанные с дисбалансом гормонов. Однако состояние кожи лица может ухудшаться в более раннем возрасте. Причиной этому может быть неправильный уход за кожей или подбор некачественной косметики.



Частые проблемы кожи головы – это перхоть и себорея, которые придают излишнюю жирность или сухость коже. Это влияет и на здоровье волос – они становятся тонкими, ломкими и слабыми, начинают выпадать. Проблемы с кожей головы могут быть дерматологического характера, также их часто вызывают микроорганизмы – бактерии и грибки.



Проблемы кожи тела сходны с проблемами кожи головы. Это сухость в зимнее время года, прыщи и угри, особенно, в области спины, пониженный тонус и дряблость. Эти проблемы вызываются как внешними возбудителями, так и внутренними сбоями в организме, а также неправильным уходом, несбалансированным питанием и режимом дня.




## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Вирусные, бактериальные, грибковые и другие виды инфекций вызывают проблемы с кожей, волосами, ногтями. Перхоть, образование корочек, чешуек, гнойничков, аллергические кожные реакции зачастую говорят о наличии патогенных организмов. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки воспаления.

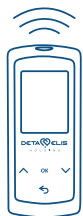

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает как общее самочувствие, так и состояние кожного покрова.

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, нормализует работу органов желудочно-кишечного тракта. Мягко снижает токсическую нагрузку, улучшая питание клеток кожи и волосяных луковиц, нормализуя клеточный метаболизм и активизируя процессы регенерации. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению и гармонизации работы организма.



Программы «Красивая кожа», «Красивые волосы и ногти» снимают воспаление, активизируют обменные процессы, улучшают тонус кожи, укрепляют волосы и ногти, замедляют процессы старения.

**DeVita Energy** запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические процессы в органах и тканях, усиливая действие программ DeVita AP и DeVita Ritm.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при воспалительных процессах на коже, угревой сыпи;
- ухудшении состояния волос и ногтей;
- выпадении волос, появлении перхоти.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ









СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
		Специальные программы	Красивая кожа и/или Красивые волосы и ногти	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
	4 DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
		Специальные программы	Красивая кожа и/или Красивые волосы и ногти	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
	4 DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
Специальные программы		Без грибка, Стоп герпес зостер, Стоп герпес симплекс	По необходимости, согласно методическим рекомендациям	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3 DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1 DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
		Специальные программы	Красивая кожа и/или Красивые волосы и ногти	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
4 DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ ЛИЦА, ТЕЛА И ГОЛОВЫ

-  При ярко выраженных проблемах, возникающих без видимых причин, проведите обзорное обследование организма на предмет выявления внутренних патологий.
-  Не используйте чужие косметические и гигиенические принадлежности, не примеряйте чужие головные уборы.
-  Старайтесь избегать длительного пребывания на солнце, ограничьте посещение солярия. Используйте косметику с УФ-фильтрами.
-  Следите за балансом гормонов, при предрасположенности к гормональным сбоям проходите обследование не реже раза в год.
-  Пользуйтесь только качественной и проверенной косметикой, следите за ее сроком годности. Тщательно очищайте лицо со специальным средством утром и вечером.
-  Не увлекайтесь скрабами и механическими чистками. Частое отшелушивание вызывает раздражение и сухость.
-  В холодный период обязательно увлажняйте кожу после душа, пользуйтесь термальной водой для лица каждые несколько часов.
-  Для хорошего состояния кожи и волос полезна красная рыба, яйца, зелень, орехи и бобовые.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Угревая сыпь,  
перхоть,  
пигментные пятна,  
дряблость кожи.

После первого  
использования DeVita



Улучшение тонуса кожи,  
сокращение высыпаний,  
регуляция жирового  
баланса.

После месяца  
использования DeVita



Пигментные пятна  
и воспаления становятся  
менее заметными,  
перхоть исчезает.



Используйте схему оздоровления комплекса «ЧИСТАЯ КОЖА» совместно с клеточным питанием DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

### КАК ТРЕНИРОВКИ И СПОРТ ВЛИЯЮТ НА ОРГАНИЗМ?



Физическая нагрузка серьезно меняет обмен веществ и жизнедеятельность организма. Спортсменам требуется больше питательных веществ и витаминов, отдыха и полноценного сна. Кости и суставы испытывают повышенную нагрузку. Обмен веществ ускоряется, возрастает потребность в употреблении жидкости.



Занимаясь фитнесом или спортом, мы хотим получить высокие результаты за короткий срок. Однако резервы организма ограничены. Из-за активного метаболизма во время тренировок происходит большая затрата энергии, накопление продуктов распада, которые выводятся только через 24 часа, увеличивается токсическая нагрузка на печень и почки.



Усиленные и активные тренировки вызывают посттренировочные боли в мышцах и ощущение усталости. Кроме того, в спорте нередки травмы. Для наилучших результатов нужно возобновлять тренировки только после полного восстановления, но это чревато значительной потерей времени. А в спорте важен каждый день тренировки.



Каждая тренировка или соревнование – это большой стресс для организма. Накопленный стресс негативно сказывается на общем самочувствии и может снизить работоспособность, а в дальнейшем – вызвать проблемы с сердцем. На успешность тренировок влияют психологические факторы – настроение, личные отношения.


## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразиты и микроорганизмы могут значительно подорвать здоровье. Это сказывается на качестве тренировок и восстановления. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний, быстро, эффективно и без побочных эффектов снимая паразитарную нагрузку и признаки воспаления.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения базовых противопаразитарных программ, снижает паразитарную интоксикацию и улучшает общее самочувствие.

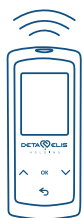

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает кровообращение, способствуя быстрому восстановлению после тренировок. Нормализуется работа органов ЖКТ, за счет чего уменьшается нагрузка на печень, ускоряется вывод токсинов. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению и гармонизации работы организма.

Программы «Предтренинг» и «Тренировка» способствуют увеличению силовых показателей, позволяют дольше и интенсивнее тренироваться, дают энергию и бодрость. Программы «Стоп травмы», «Суставы без воспаления», «Суставы без боли» снимают воспаление и болевые ощущения, нормализуют тонус мышц, улучшают работу связочного аппарата, помогают восстановиться после травмы.



**DeVita Energy** запускает механизмы саморегуляции, восстанавливает физиологические процессы в органах и тканях. За счет этого восстановление происходит намного быстрее.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- при интенсивных физических нагрузках или спортивных тренировках;
- при болях в суставах, мышцах и позвоночнике после нагрузок;
- при травмах и воспалении органов опорно-двигательного аппарата;
- для наилучшего восстановления после тренировки.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Предтреник, Тренировка	Соответственно до тренировки и во время неё
				Суставы без боли и/или Суставы без воспаления, и/или Стоп травмы	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
7	Базовая 4 автомат			Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели	

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат	Ежедневно в первой половине дня
	3		Специальные программы	Предтреник, Тренировка	Соответственно до тренировки и во время неё
4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Предтреник, Тренировка	Соответственно до тренировки и во время неё
	4			Суставы без боли и/или Суставы без воспаления, и/или Стоп травмы	Ежедневно по необходимости во второй половине дня
5	DeVita AP	Специальные программы	Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.	



## РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК



Начинайте тренировку с более сложных упражнений на большие группы мышц, а заканчивайте изолированными или кардиоупражнениями.



Следите за пульсом. Максимальный пульс рассчитывается из формулы 214 минус возраст, умноженный на 0,8. Пульс при кардиотренировке должен составлять 50-59% от максимального, при легком фитнесе – 60-69%, при тренировке на выносливость – 70-79%, при анаэробной тренировке – 80-89%.



Питайтесь правильно. По качественному составу правильное питание для спортсмена должно быть приближено к формуле: 30% – белки, 60% – углеводы, 10% – жиры.



Используйте натуральные источники энергии – экстракт женьшеня, гуараны, янтарную кислоту.



Разнообразьте упражнения и методы тренировок – мышцы быстро привыкают к однообразию.



По возможности тренируйтесь в одно и то же время. Выберите его в зависимости от режима дня и уровня активности.



При сильной боли в мышцах принимайте горячую ванну и делайте самомассаж.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Усталость, напряжение  
и боль в мышцах,  
длительное  
восстановление.

После первого  
использования DeVita



Прилив энергии,  
уменьшение  
болевых  
ощущений.

После месяца  
использования DeVita



Повышение эффективности,  
быстрое восстановление,  
улучшение выносливости  
и силы.



Используйте схему оздоровления комплекса «ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir COLLAGEN+ и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС СТОП АЛЛЕРГИЯ

### НАСКОЛЬКО ОПАСНЫ ПРОЯВЛЕНИЯ АЛЛЕРГИИ?



Аллергия – это нарушенный механизм реализации иммунного ответа организма. Организм ошибочно принимает какое-либо вещество за угрозу для жизнедеятельности и заставляет иммунную систему вырабатывать антитела и различные химические вещества, одно из которых – гистамин – и вызывает симптомы аллергии.



Кроме пищевых продуктов, шерсти и пыльцы, роль аллергена могут сыграть химические вещества, некоторые металлы, алкоголь, холод и даже солнечный свет. Встречается и аллергия на вещества, образующиеся внутри самого организма. Часто симптомы схожи с простудой или обычной усталостью, что затрудняет постановку диагноза.



Аллергические реакции могут привести к развитию бронхиальной астмы, поллиноза, аллергического дерматита. Наиболее серьезные осложнения – это судороги, острая сосудистая недостаточность, желудочные спазмы. Самые тяжелые аллергические реакции – анафилактический шок и отек Квинке – приводят к моментальному летальному исходу.



По статистике Всемирной Организации Здравоохранения аллергией страдают около 40% населения планеты. Постановка диагноза и выявление аллергенов – сложный и трудоемкий процесс, а лечение сводится к снижению симптомов и облегчению общего состояния организма, но не устраняет аллергию в целом.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ




**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Бактерии, грибки, вирусы, гельминты – это биологические аллергены. Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство микроорганизмов, быстро, эффективно и без побочных явлений снимая патогенную нагрузку.

Паразитарное отягощение печени и крови снижает их функции, усиливает интоксикацию и аллергические реакции. Специальные программы «Без шистосом и трематод», «Нет аллергии», «Стоп герпес» снимают патогенную нагрузку.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после применения противопаразитарных программ, вывода токсинов, которые также могут являться аллергенами.

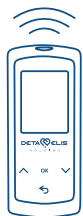

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» благотворно воздействует на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляет защитные силы, повышает жизненный тонус. Специальные программы «Без аллергенов» и «Антипростуда» снимают зуд, уменьшают слезотечение, отечность слизистых, активизируют иммунную защиту при аллергии. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.



**DeVita Energy** гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует процессы вывода токсинов. Улучшает общее состояние при проявлении аллергических реакций, снижает вялость и сонливость, возникающие при приеме антигистаминных препаратов.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

Аллергия – это следствие интоксикации организма. Для сведения к минимуму ее проявлений рекомендуется проводить очистительные мероприятия в течение 6 месяцев. В первые три месяца необходимо применять устройства согласно схемам 1-3, в последующие 3 месяца – чередуйте схемы 2 и 3. При очищении и восстановлении организма возможны незначительные обострения, в этом случае необходимо сделать перерыв в использовании устройств. При острых и тяжелых состояниях специальные программы можно включать несколько раз в день.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir DETOX и DeLixir pH BALANCE (если нет пищевой аллергии).

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Без аллергенов	Ежедневно во второй половине дня
	4	Антипростуда, Дыши легко		По необходимости, согласно методическим рекомендациям	
	5	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	6			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	7			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	8			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели
	9			Нет аллергии	В вечернее время после программ DeVita Ritm

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ		
СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром		
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день	
	3		Специальные программы	Без аллергенов	Ежедневно во второй половине дня	
	4	Антипростуда, Дыши легко		По необходимости, согласно методическим рекомендациям		
	5	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь	
	6			Специальные программы	Нет аллергии	В вечернее время после программ DeVita Ritm
	7				Без шистосом и трематод	В вечернее время после программ DeVita Ritm, 14 дней

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Полное очищение автомат	Ежедневно с 8 утра
	3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4 автомат	По необходимости на ночь

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Специальные программы	Без аллергенов	Ежедневно во второй половине дня
	4	Антипростуда, Дыши легко		По необходимости, согласно методическим рекомендациям	
	5	DeVita AP	Специальные программы	Нет аллергии	В вечернее время после программ DeVita Ritm
	6			Нет нематод и аскарид, Стоп паразиты общая, Стоп паразиты ЖКТ	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm, чередуя по 1 программе в течение 1-2 недель.

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ



Если у вас уже есть аллергия на какое-либо вещество, пройдите полное обследование на аллергены. Часто организм, подверженный аллергии, не переносит несколько продуктов.



Проверьте желудочно-кишечный тракт. Присутствие гельминтов, дисбактериоз и проблемы со стулом усугубляют протекание аллергических реакций.



При аллергии на пыль храните постельное белье, подушки и книги в плотно закрытых шкафах. Стирайте белье еженедельно, при температуре не менее 60 °С.



При поллинозе проводите влажную уборку каждый день. Носите солнечные очки и марлевую повязку. Снимайте уличную обувь и одежду у порога – на ней скапливается пыльца и споры растений.



При пищевой аллергии избегайте продуктов с сильными аллергенными свойствами: мед, арахис, рыбу и морепродукты, специи, шоколад, цитрусы, томаты, клубнику.



Употребляйте лекарства только по назначению врача. Следите за сроком годности препаратов – просроченные лекарства выделяют летучие аллергенные вещества.




При аллергии на плесень не закрывайте двери в ванную комнату и на кухню. Выбрасывайте заплесневевшие продукты. Проверяйте цветочные горшки – в них может завестись плесень.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования

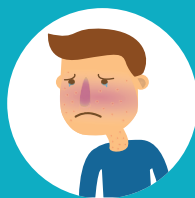

Насморк,  
зуд, отечность,  
высыпания на коже,  
слезотечение.

После первого  
использования DeVita



Уменьшение зуда,  
снятие отечности,  
облегчение  
общего состояния.

После месяца  
использования DeVita



Снижение  
количества приступов,  
сокращение высыпаний,  
облегчение дыхания.




Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП АЛЛЕРГИЯ» совместно с клеточным питанием DeLixir DETOX и DeLixir pH BALANCE (если нет пищевой аллергии), и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.





# ОСОБЫЕ КОМПЛЕКСЫ

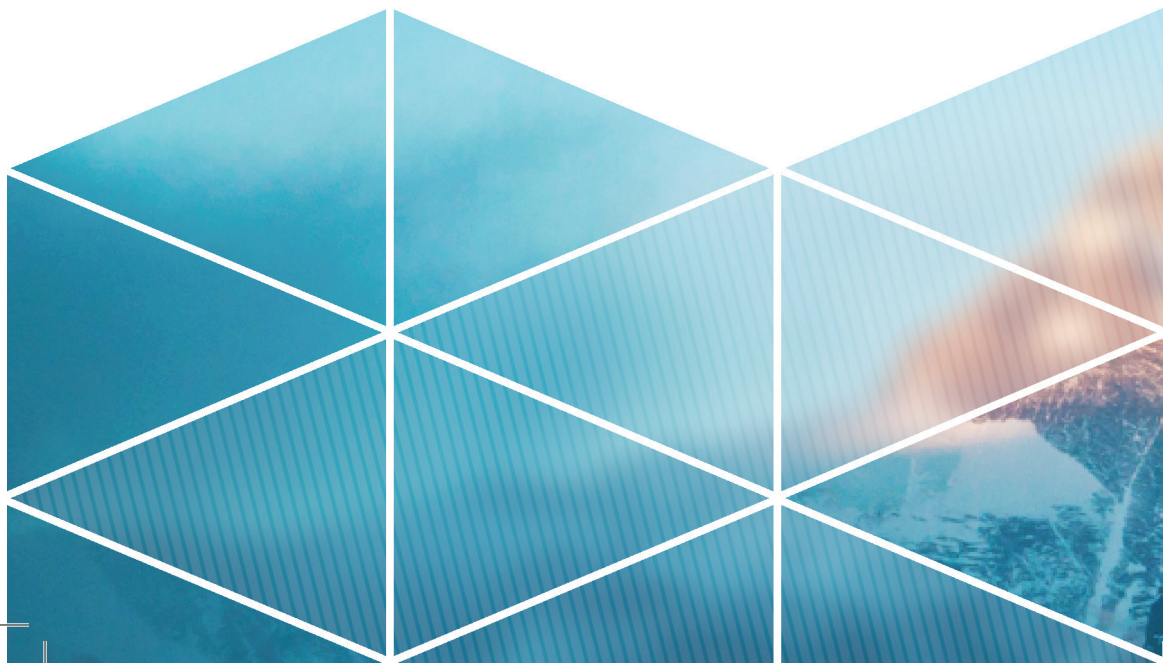



## КОМПЛЕКС БЕЗ ПРОСТУДЫ

### ЧЕМ ОПАСНЫ ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ?



Иммунная система защищает организм, участвует в его жизнедеятельности и адаптации к меняющимся условиям. Иммунные клетки всегда должны быть на страже, т. к. организм ежесекундно атакуется патогенными микробами. К некоторым их видам вырабатывается долговременный иммунитет, но только не к вирусам простуды и гриппа.



Частые простудные заболевания приводят к нарушениям в работе органов и еще большему снижению иммунитета. Микробы беспрепятственно проникают в организм и разрушают его. В итоге, обычная простуда оборачивается серьезными осложнениями. Они требуют амбулаторного лечения – от 2 недель до нескольких месяцев постельного режима.



Наиболее распространенные осложнения – это воспаления:

- пазух носа (синусит, гайморит, фронтит);
- среднего уха (отит, лабиринтит);
- дыхательных органов (бронхит, пневмония, плеврит).

Каждое осложнение затрагивает основные системы органов и вызывает сильнейшую интоксикацию.



Лекарства против гриппа и простуды также вызывают негативные реакции. Жаропонижающие снижают иммунитет и способствуют воспалению. Сосудосуживающие капли для носа поражают слизистую и мелкие сосуды, вызывая хронический отек. Противокашлевые препараты продуцируют скопление мокроты и инфицирование дыхательных путей.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Базовые противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство известных возбудителей заболеваний. Использование программ помогает быстро, эффективно и без побочных эффектов справиться с заболеванием. При длительном и тяжелом течении заболевания сочетайте программы DeVita AP из 2 и 3 схемы.

Программа «Дренаж общая» используется для очистки организма после базовых противопаразитарных программ, вывода токсинов, укрепления иммунитета и восстановления после болезни. В результате улучшается общее самочувствие.



**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А. Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Здоровый день» улучшает местное и общее кровообращение, работу органов пищеварения, что важно при неидеальном режиме питания. Способствует повышению иммунитета и гармонизации работы всех систем. Помогает при акклиматизации и в стрессовых ситуациях. Специальная программа «Дыши легно» восстанавливает работу бронхолегочной системы, снижает кашель. Специальная программа «Антипростуда» снимает воспаление верхних дыхательных путей.



**DeVita Energy** снимает напряжение и хроническую усталость. Нейтрализует действие негативных факторов окружающей среды и бытового излучения, помогает при метеочувствительности. Запускает функции регуляции организма, помогая человеку быть в тонусе, сохраняя бодрость и хорошее настроение в течение дня.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir pH BALANCE.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ



ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

СХЕМА №1: в сезон простуды и гриппа, при тесном контакте с болеющими людьми, при переохлаждении организма.

СХЕМА №1	УСТРОЙСТВО		ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ
	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3	DeVita AP	Антивирус + Без токсинов	1-2 раза в неделю

СХЕМА №2: при первых признаках бактериальных и вирусных инфекций (ОРВИ, ОРЗ, ангина, ринит и др.), кроме гриппа.

СХЕМА №2	УСТРОЙСТВО		ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ
	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Антипростуда, Дыши легко	Ежедневно во второй половине дня, 5-7 дней
	4	DeVita AP	Антивирус + Без токсинов	Первые два дня, после программ DeVita Ritm
5	Базовая 2 автомат + Антипростуда		Ежедневно, чередуя друг с другом, 5-7 дней	

СХЕМА №3: при первых признаках заболевания гриппом.

СХЕМА №3	УСТРОЙСТВО		ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ
	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
	3		Антипростуда, Дыши легко	Ежедневно во второй половине дня, 5-7 дней
	4	DeVita AP	Антивирус + Без токсинов	Первые два дня, после программ DeVita Ritm
	5		Антигрипп + Стоп грипп базовая + Без токсинов	Ежедневно, 5-7 дней
6	Базовая 2 автомат		Через неделю после антигрипповых программ, ежедневно в течение 5-7 дней	

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИЙ ГРИППА И ПРОСТУДЫ



Проводите влажную уборку ежедневно.



Каждый день проветривайте помещение.



На прогулке держите в тепле и сухости ноги, голову и шею.



Меняйте одноразовую гигиеническую маску каждые 3 часа.



Пользуйтесь одноразовыми салфетками, чтобы прикрыть нос и рот, когда чихаете или кашляете, а после использования сразу выбрасывайте их.



Употребляйте в пищу чеснок, красный болгарский перец, клюкву, шиповник, морковь, морскую рыбу и морепродукты, йогурт без добавок, кефир, мед, брокколи.



Помимо соков, чая и других жидких продуктов обязательно пейте негазированную воду не менее 1-1,5 л/сутки.



Увлажняйте слизистые оболочки солевым раствором (1 ч.л. соли на 1 л воды). Распыляйте или закапывайте его в нос каждые 1-2 часа.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Усталость по утрам, осложнения после заболевания, вялость и слабость в течение дня.

После первого  
использования DeVita



Прилив энергии, улучшение самочувствия и настроения.

После месяца  
использования DeVita



Легкий подъем по утрам, бодрость, повышение адаптационных резервов организма, снижение заболеваемости.



Используйте схему оздоровления комплекса «БЕЗ ПРОСТУДЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY и DeLixir pH BALANCE, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.





## КОМПЛЕКС СТОП КОРОНАВИРУС

### КОРОТКО О КОРОНАВИРУСЕ



Коронавирус – это семейство вирусов, включающее 40 видов РНК-содержащих вирусов, которые поражают человека и животных. Название связано со строением вируса, шиповидные отростки которого напоминают корону, благодаря им вирус попадает в клетку человека или животного.



Источниками коронавирусных инфекций могут быть инфицированный человек, животное. Основные пути передачи: воздушно-капельный, воздушно-пылевой, фекально-оральный, контактный. Заболеваемость возрастает в зимний и весенний периоды.




По данным ВОЗ вирус распространяется только в радиусе 1 метра вокруг заражённого человека. В воздушной среде вирус сохраняет свою активность в течение 8-10 часов, в воде – до 9 суток. В самых благоприятных условиях, но вне организма человека или животного – 48 часов.



Самые эффективные средства для предотвращения инфицирования – обработка рук спиртосодержащими антисептиками и тщательное мытье рук с мылом. Не подносить грязные руки к глазам, носу, рту. Употребляйте больше жидкости в течение дня. Маски малоэффективны, так как намокают от дыхания и вирус проникает по влаге в маску.




## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

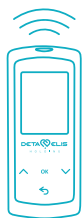

**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Антимикробные программы DeVita AP направлены на уничтожение респираторных вирусов и бактерий. Программы быстро и эффективно помогают справиться с инфекцией, а также помочь организму восстановиться после перенесенного заболевания.

Спецпрограммы «Без кашля» и «Без пневмонии» используется для уменьшения воспаления и облегчения отхождения мокроты из дыхательных путей.

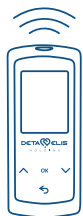

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm Base мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Использование автопрограммы «Без простуды» способствует восстановлению местного иммунитета и повышению энергопотенциала дыхательной системы.



**DeVita Energy** гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- если вам приходится общаться с большими людьми;
- если ваша работа связана с большим потоком людей;
- если вы были в странах с неблагоприятной обстановкой по данному заболеванию;
- если вы часто болеете простудными заболеваниями;
- если хотите защитить себя от инфекции.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir pH и DeLixir DETOX, DeLixir Multi-Energy.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА №1: для предупреждения заболевания.

	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №1	1 DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром.	
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день	1 день с утра.
			Здоровье	2 день с утра.
	4 DeVita AP	Специальные программы	Иммунная защита	Использовать после программы DeVita Ritm «Здоровый день».
		Автопрограммы	Без простуды автомат	2-3 раза в неделю в ночное время.
	6 DeVita AP	Специальные программы	Стоп коронавирус new	2-3 раза в неделю после программ DeVita Ritm.
			Multi-Energy	15 мл. утром после завтрака.
	8 DeLixir		pH Balance	15 мл. вечером после ужины.

СХЕМА №2: при первых признаках заболевания (в дополнение к основному лечению).

	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №2	1 DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром.	
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день	Чередовать через день в течение 2-х недель. Использовать с утра.
			Здоровье	
			Без простуды	
	5 DeVita AP	Автопрограммы	Без простуды	Чередовать через день в течение первой недели. Использовать в ночное время.
			Здоровое дыхание	
			Восстановление 2	
			Базовая 2	
			Здоровое дыхание	
	10 DeLixir	Специальные программы	Без кашля, Без пневмонии	По необходимости после программы DeVita Ritm «Здоровье» (вторая неделя).
			pH Balance	15 мл. утром после завтрака.
	12 DeLixir		Detox	15 мл. вечером после ужины.

СХЕМА №3: поддержание здоровья после перенесенной инфекции (через 2 недели от начала).

	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №3	1 DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром.	
	2 DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день	Чередовать через день. Использовать с утра.
			Здоровье	
			Без простуды	
	5 DeVita AP	Специальные программы	Здоровое сердце	После программы DeVita Ritm «Без простуды».
			Здоровые почки	После программы DeVita Ritm «Здоровье».
	7 DeVita AP	Автопрограммы	Восстановление 2	На ночь. Чередую через день в течение 2-х недель.
			Базовая 4	
	9 DeLixir		pH Balance	15 мл. утром после завтрака.
			Detox	15 мл. вечером после ужины.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ



Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.



Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).



Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми. Не касайтесь грязными руками глаз, носа, рта.



Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.



Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.



Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка).



Регулярно проводите влажную уборку помещения с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Сухой кашель, повышение температуры до 39° и слабость в течение дня.

После первого  
использования DeVita



Улучшение самочувствия, снижение температуры и прилив энергии.

После месяца  
использования DeVita



Повышение адаптационных резервов организма, снижение заболеваемости, бодрость.





Используйте схему оздоровления комплекса «СТОП КОРОНАВИРУС» совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir pH BALANCE и DeLixir Detox и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



# СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

(ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОДНОГО ИЗ БАЗОВЫХ КОМПЛЕКСОВ)

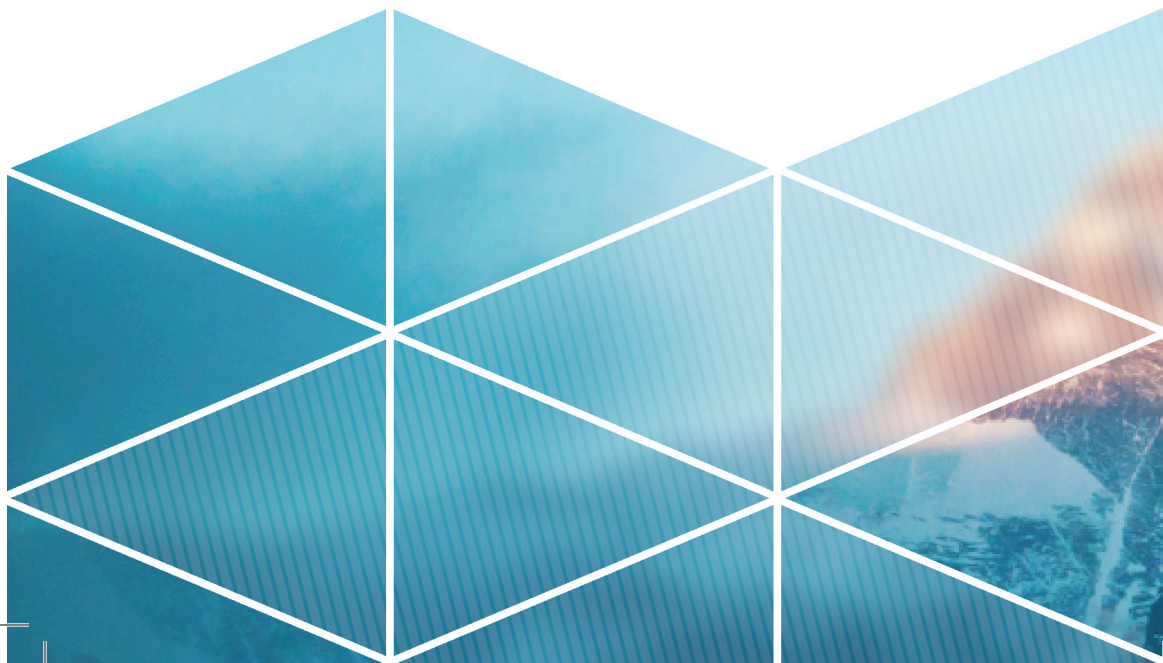

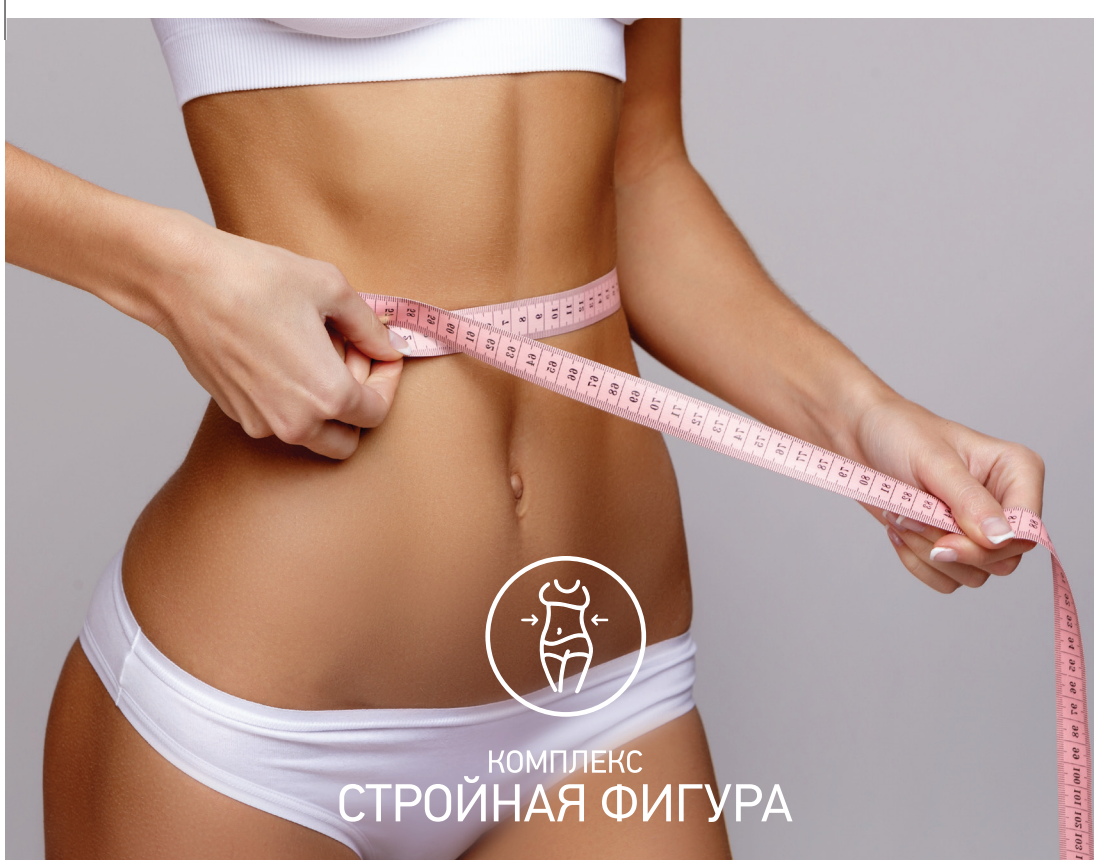

## КОМПЛЕКС СТРОЙНАЯ ФИГУРА

### ЧЕМ ОПАСЕН ЛИШНИЙ ВЕС?



По данным ВОЗ, уже более 3 млрд человек на Земле имеют лишний вес, и это число постоянно увеличивается. От проблем с массой тела начинают страдать и дети – около 40 млн детей в возрасте до 15 лет весят намного больше нормы. Врачи бьют тревогу – избыточная масса тела ведет к множеству проблем со здоровьем.



При увеличении массы тела увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Жировая ткань образуется между внутренними органами, нарушая их работу. Появляются проблемы с сосудами и одышка. Из-за повышенной нагрузки на ноги развивается варикоз. Все это снижает иммунную защиту, и полные люди чаще болеют.




Главным фактором набора лишнего веса является неправильное питание и отсутствие активности. Это связано с ускоряющимся ритмом жизни. Мы передвигаемся на автомобилях и общественном транспорте, мало ходим пешком, перекусываем на бегу. После работы мы чувствуем усталость, и у нас совсем нет сил и желания заниматься спортом.



Для большинства людей, имеющих лишний вес, похудение является очень сложной задачей. Снижение массы тела – это комплексный процесс, который включает в себя изменение рациона, включение в режим дня физической активности и употребление специальных добавок или напитков, которые помогают сбалансировать обмен веществ.



## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

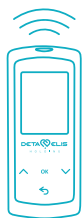


**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Паразитарные формы, обитающие в организме человека, вызывают неполадки в работе органов и, как следствие, нарушение обмена веществ. А это – один из главных факторов набора веса. Противопаразитарные программы DeVita AP воздействуют на большинство паразитов, негативно влияющих на метаболизм, уничтожая их и эффективно снимая паразитарную нагрузку.

Автопрограмма «Снижаем вес» уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Кроме этого, она нормализует работу вегетативной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.

Автопрограмма «Уменьшаем объем» используется для очищения организма от токсинов, нормализации лимфооттока, поддержания иммунитета и усиления энергии.

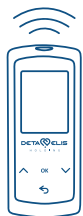

**DeVita Ritm** мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограмма «Высокий тонус» необходима для снятия токсической нагрузки с печени, лимфатической системы и почек, активизации их работы, улучшения кровообращения. Это способствует усилению энергии и улучшению тонуса организма. Кроме этого, автопрограмма запускает естественные процессы омоложения.

Автопрограмма «Здоровый метаболизм» гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Это нормализует обменные процессы и психоэмоциональное состояние, способствует снижению массы тела и улучшению качества жизни.



**DeVita Energy** запускает механизмы саморегуляции, способствует ускорению процесса восстановления и распределению энергетического баланса. Позволяет организму поддерживать форму в процессе очищения и похудения, сохранить бодрость и хорошее настроение.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- чтобы уменьшить свой вес;
- чтобы улучшить фигуру к летнему периоду или важному событию;
- для спортсменов: чтобы «подсушить» тело перед соревнованиями.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir ULTRA SLIM+.

## СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ

СХЕМА	УСТРОЙСТВО		ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ
	1	DeVita Ritm	Автопрограмма	Высокий тонус	1 день, начиная с 12:00
	2		Автопрограмма	Здоровый метаболизм	2 день, начиная с 12:00
	3	DeVita AP	Автопрограмма	Снижаем вес	1 день, после прибора DeVita Ritm или в ночное время
4	Автопрограмма		Уменьшаем объем	2 день, после прибора DeVita Ritm или в ночное время	



Автопрограммы устройств DeVita AP и DeVita Ritm желательно использовать после общего комплекса очищения организма, а в дальнейшем – в дополнение к устройству DeVita Energy и автопрограммам устройства DeVita Ritm «Здоровый день автомат» и «Здоровье автомат».

Внимание: при использовании программ возможно повышенное пото- и мочеотделение.

## МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА



Ешьте 5 раз в день небольшими порциями.



Последний прием пищи должен быть за 2 часа до сна.



Пейте достаточное количество воды. Вода снижает аппетит и помогает вовлекать в обмен веществ отложенные жиры, а также выводить токсины.



Ешьте фрукты, они позволяют эффективно сбрасывать лишние килограммы.



Витамины тоже ускоряют обмен веществ в клетках.



Антицеллюлитный массаж проблемных зон разгоняет кровь, усиливается ее приток к месту воздействия, что значительно ускоряет обмен веществ.



Занятия спортом и физическая активность позволяют эффективно сбросить вес и скорректировать фигуру.



Соблюдайте режим сна. Это способствует обновлению клеток мозга, что, в свою очередь, приводит к ускорению процесса обмена веществ.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Лишний вес,  
плохое настроение,  
тяжесть и скованность  
в движениях.

После 1 недели  
использования DeVita



Значительное улучшение  
иммунитета, повышение  
общего тонуса  
организма.

После месяца  
использования DeVita



Хорошее самочувствие,  
отличное настроение,  
легкость и непринужденность  
движений.



Используйте схему оздоровления комплекса «СТРОЙНАЯ ФИГУРА» совместно с клеточным питанием DeLixir ULTRA SLIM+, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ СЕБЯ

### КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ КАНЦЕРОГЕНЫ?



Канцерогены – это определенные факторы, под действием которых у человека повышается вероятность развития опухолевых процессов. К канцерогенам можно отнести органические (пищевые), неорганические (бытовая химия) вещества, и ионизирующее излучение. На развитие процесса оказывают влияние вредные привычки и экология местности.



Курение является наиболее значимой причиной рака. Питание — еще одна причина развития патологических процессов, особенно в ЖКТ. Издержки цивилизации приводят к тому, что пища загрязняется вредными веществами окружающей среды и химикатами сельского хозяйства, в том числе канцерогенами.



Умеренная дозированная солнечная радиация благотворно влияет на организм человека. Но стремление лучше загореть приводит к перегреву, ожогам кожи и тепловым ударам. Такое злоупотребление солнечными ваннами может привести к серьезным нарушениям в организме.




Инфекционные агенты (некоторые вирусы, бактерии, грибки) при длительном нахождении в организме и определенных условиях также являются факторами риска развития подобных заболеваний. Это было доказано еще в 1910 году и подтверждено в 1980-х.

## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Длительное нахождение в организме канцерогенных факторов: биологических, химических, физических, может привести к сильной интоксикации и бесконтрольному делению и разрастанию атипичных клеток в любых органах человека. Комплекс противопаразитарных программы DeVita AP способствует снижению токсической нагрузки, уменьшению воспалительных реакций, нейтрализации инфекционных возбудителей.

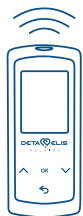

Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса противопаразитарных программ.

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляет защитные силы, повышает жизненный тонус. Использование специальных программ способствует снижению нагрузки на конкретные органы и системы, восстанавливает их энергопотенциал. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.



**DeVita Energy** гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- если у вас неправильное питание;
- вы имеете вредные привычки;
- очень часто болеете;
- живете в неблагоприятном экологическом районе;
- подвержены стрессам.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir pH Balance и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	
	3		Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
	5			Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
	6			Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
	7			Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	
	3		Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	
	4	DeVita AP	Специальные программы	Автопрограммы	Очищение автомат
	5			Без шистосом и трематод	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 1-2 недели
	6			Дренаж антитоксический	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 3-4 недели

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день, Здоровье	
	3		Специальные программы	Программы по коррекции органов	
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Защита 1, Защита 2	Чередовать через день в течение 2-х недель. Время включения 17:00.
	5			Защита 3, Защита 4	Чередовать через день в течение 2-х недель. Время включения 17:00.

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ
СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	1	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день
	2		Специальные программы	Полное очищение
	3	DeVita AP	Автопрограммы	Программы по коррекции органов
	4		Специальные программы	Очищение

Программы 3 и 4 месяцев повторять ещё 2 цикла!



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАЗВИТИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ



Исключите из питания сладости, белый хлеб, полуфабрикаты, маргарин, копчености.



Откажитесь от вредных привычек (алкоголь, табакокурение).



Своевременно лечите воспалительные инфекционные процессы.



При пребывании под открытым солнцем, используйте солнцезащитный крем, шляпу, одежду, максимально закрывающую открытые участки тела.



Больше двигайтесь. Это способствует физиологическому течению всех процессов в организме.



Укрепляйте иммунитет с помощью регулярных прогулок на свежем воздухе и нормализации психо-эмоционального состояния.



Регулярно проходите профосмотры.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Слабость,  
быстрая утомляемость,  
снижение иммунитета.

Через неделю  
использования DeVita



Повышение  
жизненной  
энергии.

После месяца  
использования DeVita



Укрепление иммунитета,  
повышение  
работоспособности.



Используйте схему оздоровления комплекса «ЗАЩИТИ СЕБЯ» совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir DETOX, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.



## КОМПЛЕКС SOS КЛЕЩИ

### КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ?



Клещи – одна из самых разнообразных и древних групп членистоногих на Земле. Как правило, клещи свободноживущие, но встречаются и паразитические кровососущие виды. Среди них наиболее известны иксодовые клещи (Ixodoidea). Они переносят возбудителей болезней человека: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и др.



Клещи проявляют активность в период: конец марта, начало апреля, увеличивая численность к середине мая. Максимальная численность сохраняется до конца июня, а иногда и до сентября. Клещи предпочитают умеренно затененные и увлажненные лиственные и смешанные леса. Клещи подстерегают свою добычу, сидя на концах травинок, былинки, торчащих вверх палочек и веточек.



Слюна клеща способна растворять стенки кровеносных сосудов и снижать иммунитет. Также через слюну передаются и инфекционные агенты, несущие опасность для здоровья человека. Передача агента происходит в первые минуты после укуса. Клещевой энцефалит – самая опасная из клещевых инфекций. Клещевой боррелиоз – самая распространенная.



Инфекционные агенты, попавшие при укусе клеща, поражают нервную систему, опорно-двигательный аппарат, а также сердечно-сосудистую систему. Приводят к интоксикации и дальнейшему поражению печени и почек, общему снижению иммунитета и состоянию постоянной усталости.


## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ



**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Попавшие в организм паразиты вызывают сильную интоксикацию с поражением нервной, сердечно-сосудистой систем и опорно-двигательного аппарата. Комплекс противопаразитарных программы DeVita AP воздействует на конкретных возбудителей и сопутствующих паразитов, быстро, эффективно и без побочных явлений снимая патогенную токсическую нагрузку и признаки воспаления.

Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса противопаразитарных программ.

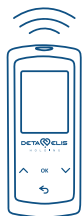

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Специальные программы «Нервная система общая», «Здоровые суставы» и «Здоровое сердце» помогают снизить нагрузку на данные органы и восстановить их энергопотенциал. Автопрограмма «Полное очищение» способствует восстановлению основных выделительных систем и гармонизации работы организма.



**DeVita Energy** гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует процессы вывода токсинов. Улучшает общее состояние при интоксикации, возникающей в следствие инфицирования после укуса. Снижает вялость и сонливость.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе.

Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- сразу после укуса клеща;
- если кус клеща был раньше;
- при проблемах с сердечно-сосудистой системой, суставами, почками, печенью, возникшими вследствие укуса клеща.



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТОЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir MULTI-ENERGY, DeLixir pH Balance и DeLixir DETOX.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Базовая 1 автомат	Ежедневно на ночь в течение 1-ой недели
				Базовая 2 автомат	Ежедневно на ночь в течение 2-ой недели
				Базовая 3 автомат	Ежедневно на ночь в течение 3-ей недели
				Базовая 4 автомат	Ежедневно на ночь в течение 4-ой недели


		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат	Ежедневно в первой половине дня, чередуя друг с другом через день
			Специальные программы	Обмен веществ в норме и/или Кишечник без проблем	Ежедневно во второй половине дня, по необходимости
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	Ежедневно на ночь
	5		Специальные программы	Без шистосом и трематод	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 1-2 недели
	6		Специальные программы	Дренаж антиоксический	Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm в течение 3-4 недели

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	1	DeVita Energy	Базовая программа	1-2 раза утром	
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день, Здоровье	Чередовать через день. Время включения 8:00
	3		Специальные программы	Нервная система общая	После программы DeVita Ritm «Здоровый день»
	4	DeVita AP	Автопрограммы	SOS 1 автомат, SOS 2 автомат	Чередовать через день в течение 2-х недель. Время включения 17:00
				SOS 3 автомат, SOS 4 автомат	Чередовать через день в течение 2-х недель. Время включения 17:00

		УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА	ПРИМЕНЕНИЕ	
СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	1	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день	1 день с 8:00
	2		Полное очищение	2 день с 8:00	
	3		Специальные программы	Нервная система общая	После программы DeVita Ritm «Здоровый день»
	4	DeVita AP	Автопрограммы	Очищение автомат	1 день. В ночное время
				Восстановление нервов	2 день. В ночное время

Программы 3 и 4 месяцев повторять ещё 2 цикла!

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ

-  Находясь в местах обитания клещей, избегайте темных тонов в одежде, так как клещей труднее заметить на темном фоне.
-  Заправляйте верхнюю одежду в штаны, а штаны – в носки. Если нет капюшона – наденьте головной убор.
-  Каждые 15 минут проводите осмотр своей одежды, а по возможности осматривайте голову и тело, в особенности выше пояса, клещи чаще всего присасываются именно там.
-  Пользуйтесь средствами химической защиты от клещей. Обработайте оголенные участки тела, одежду, спальник, палатку и другие предметы.
-  Если Вы чаще всего проводите время на дачном участке, на которой обитают клещи, то эту территорию нужно обработать специальным инсектоакарицидным средством, убивающим клещей.
-  Придя домой, снимите одежду вне жилого помещения и тщательно ее осмотрите, обратив особое внимание на складки, швы, карманы.
-  Если обнаружили присосавшегося клеща, не удаляйте его самостоятельно. Обратитесь в районную СЭС или районный травмпункт.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Головная боль,  
слабость, отсутствие  
аппетита.

После недели  
использования DeVita



Снижение болевых  
ощущений, повышение  
общего тонуса.

После месяца  
использования DeVita



Нормализация функциональ-  
ного и психологического  
состояния.



Используйте схему оздоровления комплекса «SOS КЛЕЩИ» совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE, DeLixir DETOX и DeLixir MULTI-ENERGY, ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.





## КОМПЛЕКС ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

### КАКУЮ ОПАСНОСТЬ НЕСУТ ПРОБЛЕМЫ ПОЛОСТИ РТА?



Рот человека является главными воротами организма. Через него в тело поступают не только жизненноважные вещества, но и болезнетворные формы. Поэтому необходимо своевременно реагировать на различные изменения и странные симптомы, т. к. они могут указывать не только на проблемы с зубами, но и другими органами.



Самые частые проблемы — запах изо рта, кариес, появление язвочек на слизистой, налет на языке. Данные проявления могут говорить о наличии вирусной (герпес), бактериальной (стрептококк) и грибковой (кандида) инфекции.




Нарушение микроциркуляции крови, обмена веществ могут привести к кровоточивости и воспалению десен, что чревато, в дальнейшем, расшатыванием и выпадением зубов. Эти же причины часто становятся виновниками воспаления губ и слюнных желез.



Состояние полости рта (зубов, слизистой, десен, языка) — индикатор работы многих внутренних органов. На нем сказываются: длительный прием медикаментов, иммунный сбой, воспалительные процессы, несбалансированное питание, вредные привычки, авитаминоз и другие факторы.




## МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

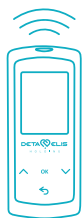

**DeVita AP** – действие основано на явлении резонанса, в частности, исследованиях ученого и врача Рояла Реймонда Райфа. Райф открыл, что у каждого микроорганизма есть индивидуальная частота колебаний, увеличение амплитуды которой приводит к гибели микроорганизма, не нанося вреда другим клеткам.

Несоблюдение правил гигиены, вредные привычки, наличие в организме хронических воспалительных процессов создает благоприятную среду для развития патогенных организмов в полости рта, и как следствие, возникновению проблем с зубами, деснами и другими органами полости рта. Противопаразитарные программы DeVita AP способствуют снижению патогенной инфекционной нагрузки, а специальные программы уменьшают воспалительные реакции, помогают быстрее восстановиться после стоматологических вмешательств.

Автопрограмма «Очищение» используется для вывода токсинов и снижения паразитарной нагрузки на выделительные системы после применения комплекса противопаразитарных программ.

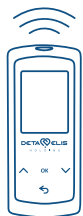

**DeVita Ritm** – здесь воплощены разработки ученых Р. Фолля и А.Ф. Крамера, которые выяснили, что у каждого органа есть здоровая частота колебаний. DeVita Ritm мягко воздействует на организм, сообщая ему частоту колебаний здоровых органов. В результате организм работает на самовосстановление.

Автопрограммы «Здоровый день» и «Здоровье» благотворно воздействуют на работу всего организма, повышая его устойчивость к чужеродным агентам. Укрепляют защитные силы, повышают жизненный тонус. Использование специальных программ способствует улучшению микроциркуляции крови, укреплению десен, снижению кровоточивости, восстановлению слизистых оболочек. Автопрограмма «Полное очищение» нормализует работу основных выделительных систем и слаженность работы всего организма.



**DeVita Energy** гармонизирует работу организма, заряжает энергией, активизирует вывод токсинов, запускает процессы саморегуляции.

## УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ DEVITA

Не употребляйте газированные алкогольные и безалкогольные напитки – они снижают воздействие устройств. Уберите или максимально снизьте в своем рационе употребление кофе. Откажитесь от употребления «пищевого мусора» (чипсов, сухариков и т.д.) – это может вызвать проблемы с пищеварением. Пейте чистую питьевую воду не менее 1-1,5 л/сутки для вывода токсинов из организма.



### ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВА DEVITA ПО СЛЕДУЮЩИМ СХЕМАМ:

- если у вас неправильное питание;
- вы имеете вредные привычки;
- вы склонны к частым простудным заболеваниям;
- у вас наблюдается кровоточивость десен, шаткость зубов, повреждения слизистой рта;
- у вас запланированы стоматологические процедуры (лечение, удаление, имплантация и др).



### СОЧЕТАЙТЕ УСТРОЙСТВА С КЛЕТЧНЫМ ПИТАНИЕМ DELIXIR

Для наилучшего результата рекомендуется использовать устройства DeVita совместно с клеточным питанием DeLixir pH Balance и DeLixir Multi-Energy.

## СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Схема 1. Использование после стоматологических вмешательств (удаление, имплантация, лечение и т. д.). Длительность использования 2 недели:

СХЕМА №1 В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
2	DeVita Ritm	1 день	Автопрограмма	Здоровый день	1 день. Время включения программ с 8:00
			Специальная программа	Стоп травмы	
3	DeVita Ritm	2 день	Автопрограмма	Здоровье	2 день. Время включения программ с 8:00
			Специальная программа	Крепкие зубы	
4	DeVita AP	Авто-программы	Восстановление 1 автомат		1 день в вечернее время после программ DeVita Ritm
Базовая 2 автомат			1 день. В ночное время		
Восстановление 2 автомат			2 день. В ночное время		

При наличии нарывов, свищей добавить программу «Без свища» ежедневно.

Схема 2. Использование при хронических проблемах полости рта:

Первый месяц по схеме 1 месяца комплекса «Пищеварение без проблем»

СХЕМА №2 В ТЕЧЕНИЕ 2 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Energy	Базовая программа		1-2 раза утром
	2	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день, Здоровье	В дневное время с 8:00. Чередуя через день
				Специальные программы	
3	DeVita AP	Автопрограммы	Здоровые десны, Очищение	После программы DeVita Ritm «Здоровый день»	
4	DeVita AP	Автопрограммы	Здоровые десны, Очищение	В ночное время. Чередуя через день	

СХЕМА №3 В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день, Полное очищение	В дневное время с 8:00. Чередуя через день
			Специальные программы	Крепкие зубы	
3	DeVita AP	Автопрограммы	Базовые 1-4	По необходимости на ночь	

СХЕМА №4 В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦА	УСТРОЙСТВО	ПРОГРАММА		ПРИМЕНЕНИЕ	
	1	DeVita Ritm	Автопрограммы	Здоровый день, Здоровье	В дневное время с 8:00. Чередуя через день.
			Специальные программы	Крепкие зубы	
3	DeVita AP	Автопрограммы	Стоп паразиты автомат	В ночное время, ежедневно в течение 1 недели	

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ



Чистите зубы два раза в день: утром и вечером.



Очищайте влажной щеткой десна, язык и внутреннюю поверхность щек.



Своевременно лечите воспалительные инфекционные процессы ЛОР- и других внутренних органов.



Для очищения межзубных промежутков используйте зубную нить.



Откажитесь от вредных привычек.



Укрепляйте иммунитет, нормализуйте психо-эмоциональное состояние, правильно питайтесь.



Регулярно проходите осмотры у стоматолога.



Наиболее эффективный результат вы получите, сочетая меры профилактики с применением DeVita-технологий и клеточного питания DeLixir

До  
использования



Болезненность  
и кровоточивость десен,  
снижение аппетита.

После первого  
использования DeVita



Уменьшение болезненности,  
улучшение общего  
самочувствия.

После месяца  
использования DeVita



Снижение  
кровоточивости десен,  
укрепление иммунитета.



Используйте схему оздоровления комплекса «ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ» совместно с клеточным питанием DeLixir pH BALANCE и DeLixir MULTI-ENERGY, и ваши результаты станут заметны гораздо быстрее.

## ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA AP

№ п/п	Название программы	Описание программы
1	Нет стафилококкам	<p>По статистике 20% населения являются постоянными носителями стафилококка. Стафилококк является довольно частым возбудителем инфекционных заболеваний, поражающих кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, также опорно-двигательный аппарат. Основной причиной заражения часто является больница и врачи, которые становятся хроническими переносчиками бактерии и люди, которые принимали антибиотики. Стафилококки обуславливают вторичные заболевания при гриппе, раневых инфекциях, послеоперационные нагноения, а также может вызвать пищевые отравления. Программа убирает причину инфекции, способную оказать губительное воздействие на организм человека. Он эффективен и в качестве комплексного воздействия при заболеваниях, вызванных этими бактериями.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно до 2 недель, в зависимости от снижения проявления инфекции.</p>
2	Нет стрептококкам	<p>Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе которых встречаются и патогенные. Они как правило обитают на кожном покрове человека, в дыхательных путях, кишечнике. Могут вызывать острые воспаления ЛОР-органов, мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. Стрептококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может привести к поражению суставов, сердца, почек, гаймориту и др. Программа эффективна при ангине, отите, гайморите как в комплексном воздействии, так и отдельно.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно до 2 недель, в зависимости от стихания проявления инфекции.</p>
3	Нет хламидиям	<p>Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями. Поражаются в основном органы мочеполовой сферы. Женщины более восприимчивы к этой инфекции, дети могут инфицироваться при прохождении через родовые пути матери. Хламидиоз может спровоцировать серьезные осложнения, поэтому очень важно вовремя проводить меры по предупреждению заболевания, соблюдая правила гигиены и используя DeVita технологии.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-3 месяцев.</p>
4	Нет хеликобактеру	<p><i>Helicobacter Piloni</i> – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества опасных заболеваний (гастриты, язвы, гепатиты и многие другие). По данным ВОЗ хеликобактериозом заражено 60 % населения Земли. Инфицирование происходит очень легко и часто считается семейным заболеванием, т. к. при заражении одного члена семьи вероятность заражения остальных составляет 95 %. Зачастую передача паразита происходит в результате общего использования средств личной гигиены, посуды, при поцелуе. Такие симптомы, как изжога, вздутие, боль, тяжесть в желудке могут быть вызваны этим микроорганизмом.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
5	Стоп бактерии	<p>К бактериальным инфекциям относится огромная группа заболеваний, причиной которых являются микроорганизмы – бактерии. Самым важным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией является выделение бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию организма и повреждают внутренние органы. Программа «Стоп бактерии» применяется для снижения выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхательной системы, вызванной такими формами как пневмококк, листерия, клебсиелла.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно до исчезновения признаков инфекции.</p>
6	Без гепатита А	<p>В развивающихся странах и в тех местах, где пренебрегают правилами гигиены очень высока вероятность заболеваемости вирусным гепатитом А. Т. к. передается вирус через грязные руки, пищу, воду, даже соленую. Если вы планируете поездки в страны Азии, Африки необходимо принять соответствующие меры безопасности: соблюдайте гигиену, пейте только бутилированную воду, используйте программу «Без гепатита А» при первых подозрениях на наличие инфекции у вас или окружающих.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно до 2-3 раза в сутки, минимум 1 месяц.</p>

7	Без токсинов	<p>Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как детокс-программу после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. В отличие от других детоксикационных программ не затрачивает энергетические ресурсы организма.</p> <p><b>Применение:</b> один раз в день после противопаразитарных программ. Входит в состав большинства автоматических программ.</p>
8	Стоп герпес зостер	<p>Заболевание, вызываемое данным вирусом называют опоясывающий лишай. Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм вируса зостер), то вирус остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. Программа направлена на уничтожение вируса и снятие основных признаков его проявления.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения нежелательных проявлений. Минимум 1 месяц. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p> <p><b>Внимание:</b> при ветряной оспе программа не используется.</p>
9	Стоп герпес симплекс	<p>Простой герпес известен человечеству с древних времен. Каждый третий человек может являться вирусоносителем. Локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Снижение иммунитета при переохлаждении или перегревании, во время инфекционных заболеваний или периоде менструации у женщин способствует появлению неприятных высыпаний на слизистых. Передается вирус преимущественно при контакте жидкостей тела зараженного человека (кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует появлению признаков инфекции на слизистых.</p> <p><b>Применение:</b> при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза в день в течение 1 месяца. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p>
10	Стоп герпес	<p>Носителями вируса является более 90% всех людей на планете. Заразиться можно различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а так же воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить воспалительные и болевые проявления.</p> <p><b>Применение:</b> 1-2 раза в день в течение месяца совместно с программой «Стоп герпес зостер» или «Стоп герпес симплекс».</p>
11	Здоровая лимфа	<p>Лимфа – жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании водного баланса, гомеостаза микросреды клеток и способная вымывать патологические микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфообращения лимфа не справляется со своими основными задачами, что приводит к возникновению патологического процесса. Программа способствует нормализации лимфооттока, укреплению стенок лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфоузлов, что ведет к уменьшению отечности и лучшему отхождению метаболитов из тканей.</p> <p>При использовании программы повышаются защитные силы организма.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости используют 1 раз в день или согласно схемам комплексов (входит в автопрограмму «Очищение»)</p>
12	Антипростуда	<p>Простуда — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Возбудителями являются респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус), поражающие верхние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, заразны, т. к. передаются воздушно-капельным путем и не лечатся антибиотиками. Осложнения после перенесенной простуды — риниты, синуситы, отиты и прочее. Очень часто на ослабленный организм может произойти наложение бактериальной инфекции. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с противобактериальными «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам». Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию местного иммунитета.</p> <p><b>Применение:</b> при первых признаках простуды первые 3 суток -до 2-3 раз в день. Далее 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.</p>

13	Стоп плесень и грибки	<p>Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Современная отапливаемая квартира или частный дом представляют собой отличную обитель для плесени и грибов. Любимая среда обитания плесени – ванные комнаты, библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в организм с пищей, водой, воздухом, со старыми пыльными вещами. Плесневые грибы вызывают аллергию, причем не только ингаляционную, но и перекрестную реакцию на коже. Плесень может проникать через кожный барьер везде, где мы паримся, где мы ходим босиком, везде, где для плесени есть условия (влажность, температура, органические остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи с изменением ткани этих органов.</p> <p>Для предупреждения грибковых инфекций и снижения проявления аллергических реакций рекомендуется использование программы «Стоп плесень и грибки». Программа эффективна против аспергиллы.</p> <p><b>Применение:</b> 1-3 раза в день 4 недели. При проблемах с кожей и ногтями используют комплексно с программой «Без грибка».</p>
14	Стоп кандида	<p>Программа защищает Вас от заражения таким распространённым грибом, как кандида. Она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета кандида начинает активно размножаться и вредить организму. Заболевания вызывают и патогенные кандиды, которые попадают в организм с продуктами питания, через предметы обихода, после употребления сильнодействующих антибиотиков, при половом акте с зараженным партнером. Проявляются симптомы в виде аллергических высыпаний на коже, молочницы, боли и жжения в половых органах, дисбактериозе. Предупредите размножение кандиды, используя программу «Стоп кандида».</p> <p><b>Применение:</b> программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. Комплексно с программой «Нет простейшим».</p>
15	Без грибка	<p>Грибковые заболевания человека относятся к группе инфекционных заболеваний, вызываемых болезнетворными грибами. Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что зачастую пораженные грибком участки являются открытой дорогой для возбудителей множества различных инфекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Лечение требует комплексного подхода и соблюдения правил гигиены. Программа активно борется с такими грибами как трихофитом, микроспорум, мукор.</p> <p><b>Применение:</b> В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями рекомендуется использование программы каждый раз после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком. При наличии в организме грибковой инфекции программу используют 1-2 раза в день в течение месяца.</p>
16	Нет простейшим	<p>Программа защищает Вас от негативного действия большого количества простейших. Ими болеет каждый пятый человек, и заражается он через грязные руки или пораженные продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие его, постоянное чувство утомления, депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа. Конечно, все эти признаки мешают Вашей жизни, да к тому же, Вы можете заразить и своих близких. Программа воздействует на амебу, лямблий, уничтожая их. Соблюдая правила личной гигиены, а так же «золотое правило» – не пить воду из под крана и регулярно используя программу «Нет простейшим» в качестве профилактики, Вы будете защищены от этих микроорганизмов.</p> <p><b>Применение:</b> рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14 дней. При повторном инфицировании необходимо выявить источники заражения.</p>



17	Интимное здоровье	<p>Возбудителей заболевания органов мочеполовой сферы очень много и зачастую причиной болезни является не один микроорганизм, а несколько. Инфекции могут протекать в острой форме или в хронической. Хроническая инфекция со временем может вызвать сужение уретры, воспаление суставов, привести к бесплодию и увеличить риск внематочной беременности. Периодически во время простуды или эмоциональных перегрузок могут возникать обострения. Инфекции, в основном, передаются при половом акте, а некоторые и при рождении от больной матери. Такие паразиты как уреоплазма может годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики и никак себя не проявляя. Главный фактор защиты организма — нормальная микрофлора, и современные DeVita технологии, которые пагубно воздействуют на паразитарную флору, подерживая естественные защитные силы организма. Программа эффективно борется с такими паразитами как уреоплазма, токсоплазма, микоплазма.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца.</p>
18	Без шистосом и трематод	<p>Трематоды — плоские черви, способные вызвать у человека различные серьезные заболевания. Могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечнике, легких. Заражение происходит при жевании травянок, особенно вблизи водоемов или во время купания в них, при употреблении плохо промытой зелени или салата, а также не до конца приготовленного мяса крупного рогатого скота, рыбы. Программа направлена на выведение большинства видов трематод, в том числе и шистосом, независимо от стадии их развития и локализации в организме.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 14 дней.</p>
19	Без нематод и аскарид	<p>С нематодными фрунтами, плохо приготовленным мясом, грязными руками к нам в рот могут попасть яйца глистов, которые не видны невооруженным глазом. Глисты, живя в организме хозяина, питаются его тканями, «отбирают пищу» у человека (поэтому хочется много кушать), выделяют токсичные вещества. Человек худеет, у него выпадают волосы, шелушится кожа. Наиболее часто встречающиеся гельминты — аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохаранье, заболевания печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид вызывает аллергическую реакцию, которая может проявляться в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под действием программы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. Людям, имеющим домашних животных, маленьких детей и профессии, связанные с работой с животными, рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия 1 раз в квартал.</p> <p><b>Применение:</b> программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>
20	Стоп паразиты общая	<p>В организм человека паразиты внедряются через кожные покровы, а также могут заноситься в организм с пищей, водой, пылью. У многих людей, ведущих здоровый образ жизни, наблюдаются нарушения состояния здоровья из-за наличия паразитов. Оздоровление организма (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дает выраженного положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих хронических заболеваний: холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит, колит, сахарный диабет, бронхиальная астма, дерматит. Такие проблемы как: хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкие ногти и волосы, проблемная кожа, головные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета – могут быть сигналами тенущего паразитоза. Все паразитарные заболевания страшны тем, что они отлично маскируются под другие болезни. Профилактика паразитарных заболеваний – это, прежде всего соблюдение гигиенических норм общественного поведения, использование программ «Стоп паразиты общая». Эти меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья окружающих людей.</p> <p><b>Применение:</b> программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>

21	Стоп паразиты ЖКТ	<p>Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких заболеваний как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. Их присутствие в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и снижение усвоения питательных веществ. Токсические вещества, которые выделяют паразиты, вызывают боли в суставах и мышцах, поражают центральную нервную систему. Способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокойства, нарушения сна. Программа направлена на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной железы.</p> <p><b>Применение:</b> программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через 14 дней курс повторить.</p>
22	Антигрипп	<p>Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста. Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн. человек. При тяжелом течении гриппа возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается очень легко, воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение разных штаммов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.</p> <p><b>Применение:</b> для предупреждения гриппа во время эпидемии программа применяется 1 раз в 2 дня. При необходимости — ежедневно до 2-3 раз в день, чередуя ее с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное использование с программами «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп кандиды» во избежание бактериальной и грибковой отягощенности, а также программами «Антивирус», «Антипростуда».</p>
23	Стоп грипп базовая	<p>Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям. Грипп всегда начинается остро и быстро (от момента заражения до первых признаков проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является повышенная температура тела (40 °С и выше). Такая температура может сохраняться больше 5 дней, что вызывает одышку или нарушение дыхания, нарушение сознания, судороги. У людей с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких детей такая температура приводит к инфекционно-токсическому шоку (состояние, когда отказывают жизненно важные органы). Используя программу «Стоп грипп базовая» вы сможете облегчить состояние больного, а при комплексном использовании нескольких программ против вирусов гриппа, достаточно быстро восстановить свое здоровье не допуская осложнений.</p> <p><b>Применение:</b> при первых признаках проявления гриппа с повышенной температурой тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередуя ее с программой «Антигрипп». Обязательно обильное питье и соблюдение правил личной гигиены.</p>
24	ЖКТ в порядке	<p>Кишечная инфекция – заболевание возникающее при попадании в организм определенных возбудителей патогенных вирусов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики. Сопровождается кишечная инфекция: тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры. При вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покраснение горла, а также боли, возникающие при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. Программа направлена на уничтожение вируса кишечного гриппа – ротавируса и патогенных штаммов кишечной палочки, поможет нормализовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.</p> <p><b>Применение:</b> Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередуя с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>
25	Помощь в отравлении	<p>При попадании в организм с пищей, водой, через слизистые дыхательных путей энтеробактерий или энтеровирусов развивается инфекция, которую в народе называют отравление. Данная инфекция способна иметь скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головная боль, боль в мышцах, в брюшной области, повышение температуры, рвота, расстройство стула. В последствии может привести к серьезным поражениям органов. Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают энтеровирусы и некоторые виды сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, снижает вероятность осложнений.</p> <p><b>Применение:</b> Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередуя с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>

26	Антивирус	<p>Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус. Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой природой. Так как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки нет, они являются только внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит сложность их уничтожения. Передаваться вирусы могут воздушно-капельным путем, через различные предметы, поцелуи и половым путем. Большая роль в полном истреблении вирусов в организме принадлежит иммунитету. Программа «Антивирус» направлена на борьбу с различными вирусами и в частности цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр. Также используется с целью ослабления любых штаммов вирусов и усиления иммунитета организма.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца.</p>
27	Дренаж общая	<p>Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсичных веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма. Кроме того вследствие заболевания или травмы возможно нарушение естественного оттока содержимого из полости раны или органа. Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы может вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека. Используйте программу «Дренаж общая» вы защитите свой организм от лишней токсической нагрузки, которую он испытывает при различного рода заболеваниях или повреждениях. Программа направлена на нейтрализацию и выведение токсинов из организма, при этом не нагружая лимфатическую систему.</p> <p><b>Применение:</b> однократно после использования любой из программ прибора DeVita AP. Входит в автопрограмму «Очищение».</p>
28	Дренаж анитоксический	<p>Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которое приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих тяжелых хронических заболеваний, преждевременному старению организма.</p> <p>Дренаж тканей, является средством детоксикации тканевого сектора, способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических процессов и общего состояния организма.</p> <p><b>Применение:</b> при сильной интоксикации ежедневно и совместно с программой «Дренаж общая»</p>
29	Менсиканна детокс	<p>Система глубокого полного очищения организма, которая была предложена Р. Райфом. Программа способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов, улучшению дренажной функции лимфатической системы, повышению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной функции почек, повышению уровня иммунной защиты.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца при отсутствии серьезных заболеваний печени, почек, лимфатической системы. При наличии тановых для мягкого очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу «Полное очищение» DeVita Ritm.</p>
30	Нет аллергии	<p>Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам – продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. В настоящее время, различными ее разновидностями страдают более 85% всего населения нашей планеты. Причиной аллергии является чаще всего неправильное питание и нездоровый образ жизни. Аллергию можно узнать по неожиданно возникшему насморку, чиханию или слезотечению, покраснению и зуду кожи. Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние человека, способствует стабилизации иммунной системы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния.</p>
31	Управление весом	<p>Программа направлена на борьбу с аденовирусом 36, являющимся частой причиной появления избыточного веса. Кроме того при ее использовании происходит регуляция ВНС, запускаются процессы снижения веса. Также программа помогает поддерживать энергетические ресурсы организма.</p> <p><b>Применение:</b> целесообразно использовать по схеме комплекса «Стройная фигура»</p>

32	Без сальмонеллы	<p>Сальмонелла — представитель семейства энтеробактерий. Устойчивы к внешней среде: могут сохраняться в домашней пыли, в открытых водоемах, в замороженном мясе и колбасных изделиях, яйцах птицы, молочных изделиях от 3 до 6 месяцев. Погибают при температуре более 70 градусов. Заражение сопровождается: высокой температурой, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Однако, носительство может быть без признаков.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
33	Без иерсинии	<p>Один из представителей энтеробактерий, вызывающий воспаление в тонком кишечнике, но также может поражать другие органы: печень, почки, сердце, суставы. Встречается в воде, почве, на продуктах питания. Хорошо выносит низкие температуры, поэтому может сохраняться и размножаться в холодильнике. В организме человека, не вызывая признаки воспаления, может находиться до момента ослабления иммунитета. Далее начинается обострение.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
34	Без протей	<p>Бактерии рода Протей входят в состав условно-патогенной флоры кишечника. При активном росте становятся причиной поражения органов ЖКТ, мочевыводящих путей, врожденных пороков, раневых инфекций. Патогенность бактерий наблюдается в случае бесконтрольного приема антибиотиков. Либо при поступлении бактерий извне через пищу, воду, немытые руки.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
35	Без клебсиеллы	<p>Условно-патогенная бактерия. При увеличении численности поражает органы ЖКТ, дыхательные пути, мочевыделительную систему. Вызывает сильную интоксикацию с нарушением функционала перечисленных органов. Пути заражения через пищу, воду, при общении с зараженным человеком.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
36	Без кампилобактер	<p>Бактерии кампилобактеры являются возбудителями кишечной инфекции. Внедряются в слизистую и лимфатические пути кишечника и других органов. Заражение происходит через с/х животных и птиц, путем употребления загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже через поврежденную кожу, при укусах инфицированных животных. Также трансплацентарно или во время родов. В группе риска находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также туристы, посещающие развивающиеся страны.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
37	Без клостридий	<p><i>Clostridium difficile</i> входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, но при возникновении дисбактериоза может вызывать поражения стенок толстого кишечника. <i>Clostridium botulinum</i> обитатель почвы и морской воды, распространены повсеместно и образуют самый сильный из известных бактериальных токсинов – ботулотоксин.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
38	Без шигеллы	<p>Бактерии, являющиеся возбудителями дизентерии. Заражение может происходить фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через воду, пищу. Переносчиками могут быть мухи и тараканы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
39	Без ротавируса	<p>Вирус кишечного гриппа размножается в клетках слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к сильному поносу и обезвоживанию организма. Основной путь передачи – пищевой.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
40	Антивирус ЖКТ	<p>Энтеровирус и вирус Коксаки относятся к кишечной группе, способны поражать ЦНС, мышцы, сердце, кожные покровы, дыхательную и мочеполовую системы. Передаются от человека к человеку воздушно-капельным и бытовым путями. Волна инфекции приходится на теплое время года.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>

41	Без трематод общая 1	Трематоды, или сосальщики – паразитические плоские черви, поражающие печень, поджелудочную железу, кишечник, легкие, кровеносные сосуды, головной мозг. Пути заражения: купание в открытых водоемах стран Азии, Африки, Ю.Америки, употребление в пищу плохо приготовленной или сырой рыбы, моллюсков, ракообразных, мяса.
42	Без трематод общая 2	<b>Применение:</b> программы используются совместно ежедневно в течение 2-х недель.
43	Стоп амеба	<i>Entamoeba histolytica</i> – представитель простейших. Способна вызвать амебную дизентерию, сопровождающуюся поражением толстой кишки, печени, легких и других органов. Попадает в организм с пищей и водой. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
44	Без энтерококка	Энтерококк – представитель нормальной микрофлоры человека. При использовании антибиотиков, нарушении барьерной функции кожи и слизистых, тяжелых заболеваниях и у возрастных людей энтерококк может вызвать проблемы в тонком кишечнике, мочевыводящих путях, влагалище, сердце, печени, коже. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
45	Нет нематод и аскарид, новая	Новая программа для борьбы с круглыми паразитическими червями. Охватывает большинство видов нематод, поражающих организм человека и животных. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
46	Стоп аденовирус общая	Аденовирусы — группа вирусов, вызывающая острые заболевания, с поражением органов дыхания, глаз, лимфатических узлов. Заражение происходит воздушно-капельным путем, чаще в холодное время года. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
47	Стоп коронавирус	Вирус распространен в Европе, Азии, Северной Америке. Передается воздушно-капельным путем с поражением дыхательных путей, вплоть до разрушения легочных альвеол. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
48	Стоп пеницилл	Род плесневых грибов, поражающих органы мочевыводящей и дыхательной систем, лимфатические узлы, кожу. Вызывают сильную интоксикацию, являются аллергенами. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
49	Без риккетсии	Внутриклеточный паразит. Способен поражать любые органы человека, вызывать значительные нарушения ЦНС и расстройства кровообращения. Пути передачи: через укус клеща, пищу, контакты. Распространена в развивающихся странах. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
50	Без папиллом общая	ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки с образованием наростов. Некоторые способны вызвать злокачественные образования, в зоне риска женщины. Пути передачи данной инфекции: контактно-бытовой, половой, в родах от матери к ребенку. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
51	Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыводительной системы, возникают образования в почечных лоханках и мочевом пузыре. При длительном воздействии неблагоприятных факторов данные образования могут не только снизить функционал органов, но и способны к перерождению. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
52	Без трихомонады	Трихомонада относится к простейшим, являющимся возбудителями многих половых заболеваний. Инфицирование происходит при любом виде полового контакта, а также посредством бытового контакта: ободок унитаза, бассейн, использование общих полотенец, мочалок, средств гигиены, примерка чужой одежды (нижнего белья). Попадая в кровяное русло могут маскироваться под клетки крови. Большая угроза, чаще всего, не в самом простейшем, а в переносимых им инфекционных агентах: хламидиях, нандиде, гонококках, цитомегаловирусе и вирусах герпеса. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.

53	Без лептоспиры	Бактерия, вызывающая поражение капилляров, печени, почек, мышц. Распространена во всех регионах. Заражение происходит от домашних и диких животных, через поврежденные слизистые и кожу, из природных водных источников. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
54	Без криптококка	Дрожжевые грибы рода <i>Cryptococcus</i> , поражают ЦНС, легкие, кожу, слизистые. Возбудитель присутствует в почве, загрязненной птичьим пометом. Путь передачи воздушно-пылевой. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
55	Без токсоплазмы	Распространенность заражения токсоплазмой в мире очень высока до 90 %. Нахождение в организме часто не доставляет ее обладателю проблем. Заражение происходит либо внутриутробно, либо приобретается. Токсоплазма поражает нервную систему, глаза, сердце, мышцы, легкие, кишечник, кожу. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
56	Без уреоплазмы	Уреоплазма — патогенная форма, вызывающая заболевания органов мочеполовой сферы, суставов, патологии беременности и плода. Передача инфекционного агента происходит половым путем, внутриутробно и во время родов. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
57	Без эхинококка	Серьезную проблему представляют личинки цепня, которые образуют в организме кисты. Данные образования сдавливают окружающие ткани, что приводит к атрофии и отмиранию последних. Личинки поражают печень, легкие, почки, кости, мозг. Заражение происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из зараженных источников. Так же в группе риска работники скотобоен, пастухи, кожевники. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
58	Без синегнойки	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> — бактерия, характеризующаяся природной устойчивостью к большинству антимикробных препаратов. Поражает органы ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Источником являются люди и животные, больные и носители. Пути передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.
59	Стоп клещи 1	Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самая распространенная проблема, возникающая при укусе человека инфицированными иксодовыми клещами. Поражаются ЦНС, сердце, суставы. <b>Применение:</b> программу используют совместно со «Стоп клещи 2», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»
60	Стоп клещи 2	Вирус клещевого энцефалита передается при укусах иксодовых клещей, реже через употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом. Распространение: Сибирь, Дальний Восток, Урал. Основной орган поражения ЦНС. <b>Применение:</b> программу используют совместно со «Стоп клещи 1», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»
61	Без мутаций 1	Различные патогенные факторы способствуют накоплению в организме токсинов, способных вызвать перерождение клеток. Программы «Без мутаций 1 и 2» снижают риск возникновения онкологической патологии, способствуют коррекции предопухолевых изменений, уменьшают воспалительные процессы и усиливают иммунную защиту. <b>Применение:</b> программы используются совместно, см. комплекс «Защита себя».
62	Без мутаций 2	
63	Здоровые десны	Воспаление десен (гингивит) вызывают вирусы, бактерии, грибки. В группе риска могут быть люди, носящие зубные протезы и брекеты. Программа помогает снизить патогенную нагрузку, уменьшить воспалительный процесс, улучшить трофику тканей. <b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 месяцев.



64	Обновление слизистой	<p>Появление язвочек (афт) на слизистой полости рта свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который может быть вызван вирусными или бактериальными агентами, травмой или нехваткой микроэлементов. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель. Желательно использовать совместно с программой «Рот в порядке».</p>
65	Рот в порядке	<p>Воспаление слизистой полости рта (стоматит) возникает при ряде факторов: наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Локализуется на языке, внутренней поверхности губ, щек, небе. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель. Можно сочетать с программой «Обновление слизистой» Использовать при любых стоматологических процедурах, сопровождающихся повреждением слизистой.</p>
66	Без свища	<p>Нагноение десны очень часто сопровождается образованием свища. Это может быть чревато серьезными последствиями от потери зуба до воспаления глубоких тканей. Программа помогает предотвратить процесс нагноения, уменьшает воспалительный процесс.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-4 недель. Использовать после стоматологических процедур по лечению или удалению зубов.</p>
67	Стоп травма (зубы)	<p>Программа снимает болевые ощущения, ускоряет процесс заживления, снимает отечность.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 недель. Использовать сразу после стоматологических процедур по лечению, удалению, имплантации зубов.</p>
68	ЦНС без проблем	<p>Программа помогает улучшить работу нервной системы после воздействия различных факторов (инфекционных, травматических и др.) Способствует восстановлению нервных связей между ЦНС и периферической, снимает отечность и болевые ощущения.</p> <p><b>Применение:</b> в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно совместно с программой «Нервы в порядке» (см. комплекс «SOS Клещи»)</p>
69	Нервы в порядке	<p>При нарушении целостности нервного волокна могут происходить функциональные нарушения работы нервной системы. Программа препятствует разрушению миелиновой оболочки нервных волокон, тем самым сохраняет проводимость нервного волокна.</p> <p><b>Применение:</b> в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно с программой «ЦНС без проблем» (см. комплекс «SOS Клещи»)</p>
70	Чистые пазухи	<p>Воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа — синусит. Может возникнуть как осложнение при инфекционных заболеваниях носа и дыхательных путей, а также после травм лицевой области.</p> <p>Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, лучшему отхождению слизи, снижению болевых ощущений при острых процессах.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
71	Чистые пазухи общая	<p>Наибольшую проблему для многих людей представляет хронический синусит, который протекает без явных проявлений, но достаточно долго. Причинами могут являться инфекции верхних дыхательных путей, наличие полипов, искривление носовой перегородки, кариозные зубы. Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, уменьшению отечности, предотвращает обострения.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца при наличии проблемы. И в целях предотвращения обострения в сезон простуд.</p>
72	Уши без воспаления	<p>Причинами воспаления ушей могут являться: патологический процесс в области носоглотки, искривление носовой перегородки, травмы уха.</p> <p>Программа способствует уменьшению отечности, снижению воспаления и болевых ощущений.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Здоровые уши».</p>

73	Горло без боли	<p>Воспаление миндалин глоточного кольца часто наблюдается после перенесенных ангина или других инфекционных заболеваний глотки. Может протекать в острой или хронической форме. Передача внешне — воздушно-капельным путем, или внутренне — из внутренних очагов хронической инфекции. Программа помогает уменьшить воспаление миндалин, отечность, болевые ощущения и токсическую нагрузку.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Горло без проблем».</p>
74	Стоп простуда общая	<p>Воспаление слизистых оболочек носоглотки (назофарингит) имеет инфекционную природу, вирусную или бактериальную. Наибольшая частота наблюдается в межсезонье. Программа уменьшает воспаление, отечность, предупреждает развитие обострений.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 2-х недель.</p>
75	Антивоспале- ние общая	<p>Воспаление — реакция организма, возникающая в ответ на повреждение или действие патогенного агента. Программа помогает организму ликвидировать очаг воспаления, где бы он не локализовался, снизить влияние патогенных факторов, а также в восстановить гомеостаз.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
76	Стоп мигрень	<p>Мигрень — одна из наиболее частых разновидностей головной боли. Характеризуется острой пульсирующей болью, локализуемой в определенной части головы. Программа снимает спазмы сосудов, уменьшает болевые ощущения, способствует нормализации кровообращения в области головы.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости.</p>
77	Антисептик	<p>Повреждения кожного покрова: царапины, порезы, ожоги и др. являются открытыми воротами для инфекционных агентов. В результате чего ранки могут долго не заживать, воспаляться, болеть. Программа способствует обеззараживанию ранки, уменьшению воспаления и быстрому ее затягиванию.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
78	Желчь без застоя	<p>Неправильное и нерегулярное питание (длительное голодание, употребление алкоголя, пряностей, чрезмерно острых жирных и пережаренных блюд, снэков, отказ от употребления растительного масла), стрессы, малое количество выпиваемой жидкости, инфекционные поражения печени — причины возникновения проблем в работе желчного пузыря. Программа облегчает отток желчи, способствует восстановлению работы желчного пузыря, уменьшает болевые ощущения.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-6 месяцев, желателно в вечернее время. Иначе, через день.</p>

## ПЕРЕЧЕНЬ РУЧНЫХ ПРОГРАММ DEVITA RITM

№ п/п	Название программы	Описание программы
1	Активная защита	<p>Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время. Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.</p>
2	Кровообращение	<p>Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.</p>
3	Пищеварение	<p>Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.</p>
4	Детоксикация	<p>В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
5	Антистресс	<p>Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном наложении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.</p>
6	7 чакр	<p>Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется в дневное время.</p>

7	Гормоны в норме	<p>Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функции системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.</p>
8	Чистые почки	<p>Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p> <p><b>Внимание:</b> Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.</p>
9	Чистая лимфа	<p>Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).</p> <p><b>Внимание:</b> Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
10	Здоровое зрение	<p>Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.</p> <p><b>Применение:</b> Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.</p>
11	Женская сексуальность	<p>Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в день.</p>

12	Мужская сенсуальность	<p>Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, психо-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в день.</p>
13	Стоп травмы	<p>Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снимает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.</p> <p><b>Применение:</b> при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».</p>
14	Предтреник	<p>Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно после рабочего дня. Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает побороть переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.</p> <p><b>Применение:</b> перед каждой тренировкой.</p>
15	Тренировка	<p>Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется во время тренировки.</p> <p><b>Внимание!</b> Не является допингом.</p>
16	Здоровое сердце	<p>От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.</p> <p><b>Применение:</b> Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.</p>
17	Сердечный ритм в норме	<p>Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.</p>
18	Антипростуда	<p>Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.</p>

19	Дыши легко	<p>Бронхоспазм (кашель) – это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.</p>
20	Женское здоровье	<p>Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климактерические нарушения.</p> <p><b>Применение:</b> Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю. Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.</p>
21	Мужское здоровье	<p>Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».</p>
22	Здоровый сон	<p>Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.</p>
23	Хорошее настроение	<p>Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в дневное время.</p>
24	Суставы без боли	<p>Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.</p> <p><b>Применение:</b> при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.</p>



25	Суставы без воспалений	<p>Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т. д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца, начиная за 2 недели до активных действий на даче или спортивных мероприятий. Далее 1-2 раза в неделю до окончания сезона. Людям, с периодически обостряющимися проблемами спины и суставов, с целью поддержания здоровья 2 раза в год ежедневно в течение 1 месяца. При возникновении обострения сочетать с программой «Суставы без боли».</p>
26	Кишечник без проблем	<p>Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без проблем».</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.</p>
27	Обмен веществ в норме	<p>Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости 1-2 раза в день.</p>
28	Красивая кожа	<p>Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.</p> <p><b>Применение:</b> 1-2 раза в день до получения желаемого результата.</p>
29	Красивые волосы и ногти	<p>Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных лукович и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно, до получения желаемого результата.</p>
30	Без аллергенов	<p>Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.</p>

31	Иммунная защита	<p>Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и долголетию.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
32	Здоровые почки	<p>Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях. Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической функции почек и снижению отечности.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости в течение месяца.</p>
33	Вегетативная регуляция	<p>Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы в ее работе могут выразиться в нарушении сердечного ритма, изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
34	Клеточное дыхание	<p>Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»</p>
35	Здоровые суставы	<p>Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.</p>
36	Без простатита	<p>Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки). Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».</p>
37	Нервное равновесие	<p>Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед сном.</p>

38	После тренировки	<p>В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все, и в результате, прекращают дальнейшие тренировки. Программа снимает утомление мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> после любого вида тренировок.</p>
39	Антиварикоз	<p>На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно (при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свернутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не вставать в течение 30 мин.</p>
40	Голова без боли	<p>Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли разные: перегады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции, остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.</p>
41	Сахар в норме	<p>Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелый физический или напряженный умственный труд; злоупотребление пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать работу поджелудочной железы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».</p>
42	Оперативная память +	<p>Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.</p> <p><b>Применение:</b> Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное время, желательно в процессе изучения необходимого материала.</p>
43	Нервная система, общая	<p>После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы нервной системы, выражающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбоем в функционировании зрительного нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.</p> <p><b>Применение:</b> в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи».</p>
44	Здоровые уши	<p>Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибами. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».</p>

45	Горло без проблем	<p>Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».</p>
46	Крепкие зубы	<p>Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки. Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».</p>
47	Поджелудочная в норме	<p>Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных процессов. Программа способствует нормализации функций железы при различных нарушениях.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».</p>
48	Здоровая щитовидка	<p>Щитовидная железа — часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной системах, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».</p>



## ЭЛИКСИР ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

### DELIXIR

#### КАК РАБОТАЮТ ФОРМУЛЫ



Наполняют энергией и жизненной силой. Сбалансированный комплекс витаминов и микроэлементов, упакованный в легкоусваиваемую формулу, придает бодрость и энергичность, избавляет от усталости и стрессов.



Поддерживают кислотно-щелочной баланс среды организма. Современное питание, образ жизни, стрессы ведут к закислению организма, а это в результате приводит к раннему старению и развитию заболеваний.



Мягко, но эффективно очищают организм от шлаков и токсинов. Природные сорбенты и растительные антиоксиданты выводят накопившиеся токсины, позволяя органам работать эффективнее и качественнее.



Сохраняют молодость снаружи и изнутри. Специальная формула с коллагеном и гиалуроновой кислотой делает кожу гладкой, а мышцы — эластичными и подвижными.



Поддерживают здоровый обмен веществ, ускоряя переработку питательных веществ в энергию, тем самым способствуя похудению. Защищают выделительную систему от токсинов и выводят лишнюю жидкость.

## MULTI-ENERGY



Заряжает энергией витаминов и минералов.



Содержит коэнзим Q10, селен и лютеин.



Снимает зрительное напряжение и усталость.



Для тех, кто хочет вести активный образ жизни.

СО ВКУСОМ АПЕЛЬСИНА

## DETOX



Очищает от токсинов и восстанавливает организм.



Комплексно укрепляет и оздоравливает.



Содержит алоэ вера, сок нони, MSM, ягоды годжи и имбирь.



Для тех, кто живет в ритме современного города.

СО ВКУСОМ КИВИ



## COLLAGEN +



Поддерживает молодость кожи, уменьшает возрастные проявления.



Содержит коллаген, гиалуроновую кислоту, ягоды асаи.



Помогает сохранить эластичность связок, суставов и сухожилий.



Для тех, кто хочет сохранить молодость снаружи и изнутри.

СО ВКУСОМ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ

## PH BALANCE



Гармонизирует кислотно-щелочной баланс организма.



Содержит спирулину, куркуму, морские минералы.







Оказывает антиоксидантное действие.



Для тех, кто заботится о своем здоровье.

СО ВКУСОМ ЛИМОНА



-  Нормализует энергетический обмен и процесс расщепления жиров.
-  Восстанавливает работу выделительной системы, способствуя выведению лишней жидкости.
-  Снижает всасывание жиров и глюкозы в кишечнике, способствуя похудению.
-  Улучшает обмен веществ, обеспечивает правильную переработку пищи, создавая идеальную фигуру.

СО ВКУСОМ КЛЮКВЫ

## ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММ DEVITA RITM

DeVita Ritm (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Активная защита	При физических и психологических нагрузках, снижении работоспособности, внимательности, тонуса, при хронической усталости и раздражительности, при ежедневной работе с бытовой и компьютерной техникой. Для снятия биоэнергетической нагрузки при работе с людьми.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый	В течение часа	1 месяц
Кровообращение регуляция	Нарушение микроциркуляции крови (кровообращение органов), недостаток кислорода в крови, головные боли, нарушение артериального давления, тонуса сосудистой стенки.	Снимающий спазмы Поддерживающий тонус Сосудорасширяющий Нормализующий АД	В течение часа	1 месяц
Пищеварение	Переедание, тяжесть в желудке, изжога, вздутие.	Снимающий спазмы Противовоспалительный Кислотонормализующий	В течение часа	1 месяц
Детоксикация	Высокие физические нагрузки, неправильное питание, отравление, боли в правом подреберье, употребление алкоголя.	Антиоксидантный Защищающий печень Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение часа	1 месяц
Антистресс	Стрессы, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
7 чакр	Хроническая усталость, головные боли, снижение иммунитета, высокие физические и психологические нагрузки.	Тонизирующий Гормонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1 месяц
Гормоны в норме	При нарушениях полового созревания у подростков с 12-и лет, после проведенных оперативных вмешательств, при гормональных сбоях, при дисфункции репродуктивной системы у мужчин и женщин.	Нормализующий гормональный фон	В течение месяца	6 месяцев
Чистые почки	Воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, отечность.	Улучшающий вывод мочи Противоотечный Противовоспалительный	В течение дня	1-2 месяца
Чистая лимфа	Нарушение работы лимфатической системы, отечность, интоксикация, нарушение клеточного метаболизма, нарушение артериального давления, снижение иммунитета, кожные заболевания.	Лимфодренажный Противоотечный Антиоксидантный Иммуностабилизирующий	В течение дня	1 месяц
Здоровое зрение	Снижение тонуса мышц глаз, нарушения зрения, зрительное утомление. Предупреждение нарушения зрения при длительной работе с компьютерной техникой или текстами на бумажных носителях.	Корректирующий Тонизирующий Укрепляющий	В течение дня	1-3 месяца
Женская сексуальность	Снижение либидо, повышенная эмоциональная возбудимость, склонность к нервным перевозбуждениям.	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца

Мужская сексуальность	Повышенные стрессовые нагрузки, возбудимость нервной системы, снижение потенции, боязнь «неудачи».	Антидепрессивный Антивизирующий	2-3 дня	1 -2 месяца
Стоп травмы	Любые травмы костей, хрящевой и мягких тканей, связочного аппарата: переломы, ушибы, вывихи, порезы. После оперативных вмешательств.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Регенерирующий	В течение часа	1 месяц
Предтреник	Используется до физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий	В течение часа	1 месяц
Тренировка	Используется во время физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий Регулирующий	В течение часа	1 месяц
Здоровое сердце	Расстройство функциональной деятельности сердца, нарушение ритма сердца, нарушение артериального давления, высокие стрессовые нагрузки.	Снимающий спазмы Нормализующий АД Тонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Сердечный ритм в норме	Нарушения ритма сердца: тахикардия, аритмия, в том числе дыхательная и мерцательная.	Снимающий спазмы Нормализующий ритм	В течение часа	1-2 месяца
Антипростуда	Заболевания верхних дыхательных путей. Аллергия, сопровождающаяся отечностью носоглотки, слезоточивостью.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилизирующий	В течение часа	В течение месяца
Дыши легко	Заболевания нижних отделов дыхательной системы. Аллергия. Спазмы бронхолегочной системы различного происхождения.	Противовоспалительный Снимающий спазмы Сосудорасширяющий	В течение часа	1 месяц
Женское здоровье	Дисфункция и воспалительные процессы репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омлаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Мужское здоровье	Предупреждение дисфункций репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омлаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Здоровый сон	Бессонница, нарушение фаз сна, повышенная нервная возбудимость.	Антидепрессивный Успокаивающий Нормализующий сон	В течение дня	1 месяц
Хорошее настроение	Депрессия, раздражительность, психоэмоциональные нагрузки, утомляемость.	Антидепрессивный Регулирующий настроение	В течение дня	1 месяц
Суставы без боли	Воспаления и болевые ощущения опорно-двигательного аппарата (суставы, мышцы, позвоночник), высокие физические нагрузки, в том числе занятия спортом.	Обезболивающий Регулирующий	В течение дня	1 месяц
Суставы без воспаления	Воспаления опорно-двигательного аппарата, отеки, травмы, при высоких физических нагрузках, в том числе занятиях спортом.	Противовоспалительный Противоотечный Регулирующий	В течение дня	1 месяц

Кишечник без проблем	Боль, тошнота, вздутие, дисбактериоз, сниженный тонус кишечника, желчного пузыря, нарушение слизистой желудка и 12-и перстной кишки, работы печени.	Снимающий спазмы Обезболивающий Улучшающий отток желчи Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный	В течение дня	6-12 месяцев
Обмен веществ в норме	Дисфункции щитовидной и поджелудочной желез, расстройства ЖКТ, отечность, нарушение усвоения К, Са, Mg, Na, кислотно-щелочного равновесия.	Регулирующий Гармонизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Красивая кожа	Снижение барьерной функции кожи и клеточного метаболизма. Акне, сухость или излишняя жирность кожи, облегчение состояния при псориазе и витилиго.	Регулирующий иммунную и барьерную ф-ии кожи Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Красивые волосы и ногти	Выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей. Сухая и жирная себорея.	Регулирующий функцию кожных желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Без аллергенов	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), отечность верхних дыхательных путей.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	В течение дня	1-2 месяца
Иммунная защита	При снижении иммунной защиты, повышенных физических и умственных нагрузках.	Иммуностабилизирующий Противовоспалительный	В течение месяца	Месяц
Здоровые почки	При нарушении обменных процессов, связанных с выводом некоторых кислот и солей, нарушении функциональной активности почек (образование камней в почках, отложение солей в суставах, повышенное артериальное давление).	Улучшающий вывод мочи Противоотечный	В течение дня	1-2 месяца
Клеточное дыхание	При головных болях, проблемах с сосудами головы, вялости, сонливости, недостатке кислорода в крови, малоподвижном образе жизни. Для жителей крупных городов.	Снимающий спазмы Сосудорасширяющий Нормализующий Насыщающий кислородом	В течение дня	1-2 месяца
Вегетативное равновесие	При выполнении тяжелой работы, психологическом стрессе, нарушении баланса ВНС.	Регулирующий	В течение дня	1-2 месяца
Антиварикоз	Снижение тонуса венозной стенки, застой в венах нижних конечностей	Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Голова без боли	При спазмах сосудов головного мозга, напряженной умственной работе, нестабильности артериального давления, нарушении микроциркуляции крови в области головы.	Обезболивающий Снимающий спазмы	В течение часа	1-2 месяца
Сахар в норме	При дисфункции поджелудочной железы, связанной с увеличением концентрации сахара в крови.	Регулирующий Нормализующий	В течение дня	6-12 месяцев

Здоровые суставы	Воспалительные изменения оболочки суставов и околосуставных тканей, переохлаждение. Физическая перегрузка суставов профессионального, бытового или спортивного характера. Травмы суставов.	Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение часа	3-6 месяцев
Без простатита	При дисфункции предстательной железы, снижении функциональной активности яичек, нарушении мочеиспускания. При нерегулярных половых связях.	Противовоспалительный Регулирующий функцию	2-3 дня	6-12 месяцев
После тренировки	В посттренировочный период. Для снятия общего дискомфорта, головных болей, вялости, сонливости, раздражительности, уменьшения концентрации молочной кислоты, нормализации дыхательных процессов.	Регулирующий Восстанавливающий энергию, Снимающий спазмы, Антитоксический	В течение часа	1 месяц
Оперативная память+	При снижении скорости запоминания, концентрации внимания, длительности хранения информации.	Стимулирующий	5-7 дней	1 месяц
Нервное равновесие	Стрессы, раздражительность, эмоциональная нестабильность, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
Нервная система общая	При выявленных функциональных проблемах нервной системы, нарушении целостности ткани и связи между отделами ЦНС, приводящих к нарушению психологической устойчивости.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Регулирующий, Антистрессовый	В течение месяца	3-4 месяца
Здоровые уши	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления. Также при снижении слуха.	Регулирующий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Горло без проблем	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении зажатости, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный	1-2 дня	В течение месяца
Крепкие зубы	При кровоточивости, рыхлости десен, нарушении целостности слизистых (бытовые микротравмы, стоматологические процедуры)	Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий микроциркуляцию	5-7 дней	В течение месяца
Поджелудочная в норме	При нарушении внешне секреторной (пищеварительной) или внутри секреторной (эндокринной) функций железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев
Здоровая щитовидка	При нарушении обменных процессов, связанных с функциональным дисбалансом железа.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев



DeVita Ritm (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый Антитоксический Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Противовоспалительный Иммуностабилизирующий Снимающий спазмы Противоотечный	5-7 дней	1 месяц
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Учтена суточная биологическая активность органов.	Энергодающий Антитоксический Противоотечный Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Высокий тонус автомат	Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.	Противовоспалительный, Улучшающий вывод мочи, Противоотечный, Иммуностабилизирующий	В течение месяца	6-12 месяцев
Здоровый метаболизм автомат	Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.	Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный, Регулирующий аппетит	В течение месяца	6-12 месяцев
Без отравлений автомат	Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы	Антитоксический Защищающий печен Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение дня	5-7 дней
Давление в норме автомат	Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.	Нормализующий АД Снимающий спазмы Улучшающий вывод мочи	В течение дня	1 месяц
Здоровый сон автомат	Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.	Антистрессовый Успокаивающий	В течение 1-2 часов	1месяц

Здоровые суставы автомат	Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артрита, артрозы, тугоподвижность.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный, Регулирующий Поддерживающий функцию	В течение дня	3-6 месяцев
Суставы без боли автомат	Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.	Противовоспалительный Противоотечный, Обезболивающий	В течение 2-3 часов	1 месяц
Здоровье кожи и волос автомат	Улучшает кровоснабжение кожи, норментирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосных фолликул и лона ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.	Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи, функцию желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Без простуды автомат	Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилизирующий Снимающий спазмы	1-2 часа	1 месяц
Мужское здоровье автомат	Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормонорегулирующий Омлаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп подагра автомат	Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.	Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный, Улучшающий вывод мочи, Регулирующий солевой обмен	1-2 дня	3-6 месяцев

## ПОЯСНЕНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОГРАММ DEVITA AP

DeVita AP (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Нет стафилококкам	Гнойные инфекции ран, заражение, гнойно-воспалительные заболевания разных органов (верхних дыхательных путей, горла, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, наружных половых органов, моче-выделительной системы, оболочек головного мозга, пищевая токсикоинфекция). Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет стрептококкам	Заболевания уха, горла, носа, воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата, сердца, почек, кожных покровов. Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет хламидиям	Инфекции мочеполовой системы, суставов, глаз, верхних и нижних дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы. Предупреждение профессиональных заболеваний у лиц, работающих с птицами. А также предотвращение заражения через водоемы при купании и передачи инфекции плоду во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	10-14 дней
Нет хеликобактеру	Воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки, повреждение слизистых этих органов.	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	3-5 недель
Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые клебсиеллой: воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Проблемы, вызываемые листерией: воспаление органов ЖКТ, мозговых оболочек, суставов, органов дыхания. В целях предупреждения профессиональных заболеваний людей занимающихся животноводством, птицеводством, первичной обработкой мяса и шкур. Проблемы, вызываемые пневмококком: воспаление дыхательных путей, ушей, суставов, мозговых оболочек, заражение крови.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день
Без гепатита А	Предупреждение заболевания вирусом при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 недели	6 месяцев
Без токсинов	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных)	Антитоксический Энергосберегающий	1-2 часа	1 месяц

Стоп герпес зостер	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес симплекс	Генитальный герпес и герпес губ	Противовирусный Противовоспалительный	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес	Как дополнение к любой из противогерпетических программ для сокращения сроков выздоровления и уменьшения воспалительных и болевых проявлений.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный	В течение дня	1 месяц
Здоровая лимфа	Нарушения в работе лимфатической системы проявляющиеся следующими признаками: опухшие пальцы и склонность к отекам, хроническая усталость, запор, обесцвеченная кожа на ногах, боль в груди и отеки, сухая раздраженная кожа, невозможность сконцентрироваться, холодные руки и ноги, целлюлит.	Противовоспалительный Противоотечный Антиоксидантный	В течение дня	1 месяц
Антипростуда	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противовирусный Противовоспалительный Противоотечный	2-3 часа	5-7 дней
Стоп плесень и грибки	Поражения кожи, подкожно-жировой клетчатки, слизистых оболочек, зрительного и слухового аппаратов, костей, суставов, а также внутренних органов (бронхолегочной системы, печени, селезенки, сердца, сосудов, ЖКТ, почек, ЦНС), аллергические реакции в виде кашля, заложенности носа, кожных высыпаний.  Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, при длительном нахождении во влажных помещениях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца
Стоп кандиды	Заболевания слизистых оболочек внутренних органов, кожи, сопровождающиеся высыпаниями, дисбактериозом, ощущением жжения в половых органах.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без грибка	Поражение кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек внутренних органов грибками рода: трихофитон, микроспорум, мукор. Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.	Противомикотический Противовоспалительный Противозудный	2-3 дня	3-6 месяцев
Нет простейшим	Воспалительные процессы органов ЖКТ, вызванные рядом простейших: лямблии, амебы и др. Предотвращение заражения через водоемы при купании.	Противопаразитарный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

Интимное здоровье	Заболевания слизистой дыхательных путей, мочеполовой сферы, вызванные такими возбудителями как: уреаплазма, микоплазма, токсоплазма. Предупреждение передачи инфекций плоду, половому партнеру.	Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без шистосом и трематод	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным, а также шистосомами.	Антипаразитарный	1-5 дней	1-2 месяца
Нет нематод и аскарид	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты общая	Подавление жизненной активности различных видов паразитов. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты ЖКТ	Паразиты печени и поджелудочной железы, 12-и перстной кишки. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Антигрипп	Программа направлена на уничтожение различных штаммов вирусов гриппа (А, В, С)	Противовирусный	2-3 часа	5-10 дней
Стоп грипп базовая	Мутировавшие формы гриппа, высокая температура, боль.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный	1-2 часа	5-10 дней
ЖКТ в порядке	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией, кишечной палочкой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику	2-3 часа	5-7 дней
Помощь при отравлениях	Поможет нормализовать состояние при энтеровирусной инфекции и заражении сальмонеллой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику Антиоксидесный	2-3 часа	10 дней
Антивирус	Снижение общей вирусной нагрузки, цитомегаловирусной инфекции, протекающей в форме упорной простуды с головными и суставными болями, воспалением слюнных желез.	Противовирусный Противовоспалительный	2-3 часа	1 месяц

Антивирус	Инфекции верхних дыхательных путей, лимфоидной ткани, печени, селезенки, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр. Эффективна при переохлаждении.	Противовирусный Противовоспалительный	2-3 часа	1 месяц
Дренаж общая	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных)	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный	В течение дня	1 месяц
Дренаж анти- токсический	При химических токсических нагрузках тканевого сектора солями тяжелых металлов, радионуклидами, пищевыми токсинами.	Антитоксический Лимфодренажный	1-2 дня	14-21 день
Мексиканна детокс	После оперативных вмешательств, при хронической и лекарственной интоксикаций.	Лимфодренажный Противоотечный Антитоксический Стабилизирующий Регулирующий	6-7 дней	1 месяц
Нет аллергии	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), стабилизация иммунной системы.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	1-2 дня	4-6 месяцев
Управление весом	При наличии лишнего веса, нарушении аппетита, уничтожает одну из причин ожирения — аденовирус Ad-36	Противовирусный Антитоксический	2-4 недели	4-6 месяцев
Стоп клещи 1	При свежих укусах клещей. Программы используются в паре. Если укусы были ранее, необходимо пройти курс по комплексу «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противовирусный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп клещи 2				
Стоп простуда общая	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1 месяц
Антивоспаление общая	При любых воспалительных процессах в организме.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1-2 месяца
Антисептик	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Антисептический Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-21 день
Антивирус ЖКТ	Предупреждение заболевания вирусом коксаки при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений. О наличии вируса могут говорить следующие признаки: обезвоживание, боль в горле, наличие пузырьковой сыпи на коже.	Противовирусный Защищающий клетку Нормализующий моторику	1-2 дня	14-21 день
Чистые пазухи	При острых воспалениях слизистой носа и пазух (синусит, гайморит и др.) Совместно с противовирусными и антибактериальными программами.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день



Чистые пазухи общая	При хронических проблемах со слизистой носа и пазух. Как одно из средств предупреждения острого процесса в верхних дыхательных путях при простудных заболеваниях.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Стабилизирующий	1-2 дня	14 дней
ЦНС без проблем	При негативном расстройстве нервной системы, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.)	Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки Восстанавливающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Уши без воспаления	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день
Желчь без застоя	При нарушении своевременно-го и равномерного отделения желчи в кишечник, что может быть следствием нерегулярного питания, потребления вредных продуктов, избыточным потреблением жиров, медикаментов, наличием паразитозов.	Противовоспалительный Обезболивающий Желчегонный	2-3 часа	1-4 месяца
Без мутаций 1	Для предупреждения развития клеточных мутаций, снижения негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки. Особое внимание следует уделить тем, кто проживает в неблагоприятных экологических районах, испытывает большое эмоциональное напряжение и влияние негативных производственных факторов. Программы целесообразно использовать в комплексе «Защити себя».	Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки	3-4 дня	6-12 месяцев
Без мутаций 2				
Здоровые десны	При наличии зубных протезов, брекетов, коронок, а также инфекциях полости рта, вызывающих воспаление десен.	Противовоспалительный Обезболивающий Антитоксический Улучшающий трофику	2-3 часа	1 месяц
Рот в порядке	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Обновление слизистой».	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Стоп травма (зубы)	После любых стоматологических вмешательств (лечение, удаление, протезирование, чистка и др.) Для более эффективного воздействия рекомендуется использовать в комплексе с другими программами (см. комплекс «Здоровые зубы»).	Обезболивающий Противоотечный Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-14 дней

Обновление слизистой	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Рот в порядке».	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Иммуностабилизирующий	1-2 дня	1 месяц
Без свища	После стоматологических вмешательств(удаление, лечение), при наличии отечности десны, болезненности.	Противовоспалительный Противоотечный Антиоксический	1-2 дня	7-14 дней
Стоп аденовирус общая	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, глаз, кишечника.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Нервы в порядке	При нарушении целостности нервного волокна, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.)	Противовоспалительный Защищающий клетки	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп амеба	Поможет нормализовать состояние при дизентерии, гастроэнтерите, кишечных язвах, вызванное присутствием простейшего. Рекомендуется использовать для предотвращения заражения при посещении тропических и субтропических стран Азии, Африки, Ю. Америки.	Противопаразитарный Противовоспалительный Нормализующий моторику	2-3 дня	1 месяц
Стоп коронавирус	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Без клебсиеллы	Воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Рекомендуется в качестве дополнения при вирусной нагрузке, нарушении питания, также лицам со сниженным иммунитетом, лицам страдающим алкоголизмом, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, печени.	Антибактериальный Противовоспалительный Антиоксический	1-2 дня	14-28 дней
Стоп мигрень	При головных болях различного происхождения.	Обезболивающий Спазмолитический Нормализующий кровообращение	В течение дня	1 месяц
Стоп пеницилл	Для снижения токсико инфекции при использовании пораженных грибком продуктов, при хронических заболеваниях дыхательных путей, почек, аллергической реакции на пеницилл.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Горло без боли	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Антиоксический	В течение дня	14-21 день

Без кампило- бактер	В качестве дополнительного метода для предотвращения заражения и развития диареи лицам, работающим в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, а также туристам, посещающим развивающиеся страны, людям употребляющим загрязненные мясные продукты, молоко, воду.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Без клостридий	При повреждении целостности кожного покрова с загрязнением (порезы, укусы, другие травмы). При использовании в пищу просроченных или сомнительных продуктов, консервов и т. д. Чередовать с программой «Без токсинов» циклично в течение дня. Обязательно обращение к врачу!	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Без крипто- конка	В качестве одного из методов предупреждения заболевания лицам, работающим в птицеводческих хозяйствах, занимающихся разведением птиц в квартире или собственном хозяйстве. Особое внимание людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями легких, находящимся в местах скопления птиц.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без энтеро- конка	При частом и болезненном мочеиспускании, боли при дефекации, снижении потенции, повышенной утомляемости, депрессии, гастрите, дисбактериозе, пищевом отравлении.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без эхино- конка	Для предупреждения глистной инвазии и поражения внутренних органов лицам, разводящих животных, скот, занимающихся сбором ягод, фруктов, овощей, охотой. Особенно проживающих в Южной Америке и Европе, Северной Африке, Новой Зеландии, Австралии, в России в районах: Поволжья, Западной Сибири, Краснодарского края, на Дальнем Востоке.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Без лепто- спиры	При желтухе, водяной лихорадке, как профессиональных заболеваниях скотоводов и работников сельского хозяйства.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Нет нематод и аскарид новая	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Усиленная, расширенная программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы (почечных лоханок и мочевого пузыря).	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц

Без папиллом общая	При поражении кожи и слизистых оболочек, вызванном вирусом папилломы человека. Желательно использовать с комплексом «Чистая кожа».	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без протeya	При гастрите, диарее, боли в животе, рвоте, обострении дерматита, аллергии, проблемах в работе мочеполовой системы, долго незаживающих ранах.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без синегнойки	При локальных гнойно-воспалительных процессах в мягких тканях, органах слуха, легких, суставов и др. Также лицам, находящимся длительное время в условиях стационара.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без рикетсии	При укусах клещей особенно в странах Азии и Австралии, сыпном тифе, клещевых лихорадках и др.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без ротавируса	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией.	Противовирусный Защищающий клетки	1-2 дня	14-21 день
Без сальмонеллы	Поможет нормализовать состояние при токсикоинфекции, появившейся в результате употребления в пищу продуктов с патогенными микроорганизмами.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без шигеллы	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при диарее, вызванной присутствием данной бактерии.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без тонсоплазмы	При паразитарной инвазии, вызванной внутриклеточным простейшим и сопровождающейся развитием воспалительного процесса в лимфоузлах, печени, мозге, легких, сердце, мышцах и др.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без трематод общая 1	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным и др. Программы используются совместно друг с другом.	Антипаразитарный Защищающий клетки Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без трематод общая 2				
Без трихомонады	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, болевых ощущениях во время полового акта, зуде и жжении, выделениях и неприятном запахе.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без уреаплазмы	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, нарушениях репродуктивной функции, болях внизу живота, учащенном и болезненном мочеиспускании.	Противопротозойный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

Без иерсинии	При токсико-аллергической реакции, возникающей при несоблюдении гигиенических мер и сопровождающейся кожными высыпаниями, нарушением работы ЖКТ, воспалением суставов.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп коронавирус new	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких, слабости, снижении обоняния и слуха. Улучшенная и расширенная программа. Желательно использовать согласно методике комплекса «Стоп коронавирус».	Противовирусный Защищающий клетки Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц
Стоп пневмо- бактерии	При воспалении органов дыхательной системы, вызванном Streptococcus pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Klebsiella pneumoniae и др., сопровождающемся лихорадкой, слабостью, головной болью, кашлем, одышкой, болью в груди, мышцах и суставах.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц
Без кашля	При наличии как сухого, так и влажного кашля при различных инфекциях. Для получения лучшего эффекта желательно использовать с программами DeVita Ritm «Антипростуда», «Дыши легко».	Противовоспалительный Противоотечный Снимающий спазмы	В течение дня	1 месяц
Без пневмонии	При наличии инфекции дыхательных путей, кашля, общей слабости, утомляемости, сонливости, одышке, боли в грудной клетке. Желательно использование с другими противовоспалительными программами как общими, так и направленными на нормализацию функции дыхательной системы.	Противовоспалительный Противоотечный	2-3 дня	1 месяц

DeVita AP (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Базовая 1 автомат	При вирусной и протозойной нагрузках. Оптимальная предотвращение заболеваний при смене климатических поясов, посещениях Азиатских стран.	Противовирусный Противовоспалительный Противопротозойный	1-3 дня	2-4 недели
Базовая 2 автомат	При токсической нагрузке, вызванной стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для предупреждения конковых инфекций.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	10-14 дней
Базовая 3 автомат	При бактериальном отягощении органов ЖКТ и мочеполовой системы.	Противовирусный Противовоспалительный Антибактериальный Антитоксический	1-3 дня	2-4 недели

Базовая 4 автомат	При наличии в организме микотоксинов, образованных плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Очищение автомат	При нарушении работы лимфатической системы, отечности, снижении иммунитета.	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный Противоотечный	В течение дня	1 месяц
Стоп паразиты автомат	При паразитарном отягощении печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсической нагрузке, вызванной жизнедеятельностью данных форм.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп грипп автомат	Воспалительные процессы, вызванные различными штаммами вируса гриппа.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	5-10 дней
Стоп герпес S автомат	При образовании пузырьков на слизистых оболочках губ, гениталий, глаз, рта, кожные, образующихся за счет активации вируса Herpes Simplex	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес Z автомат	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Без простуды автомат	Воспаления носа, горла, бронхов.	Противовирусный Противовоспалительный Антитоксический	В течение дня	5-7 дней
Поддержка иммунитета автомат	Эффективна для предотвращения простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Противовирусный Антитоксический	2-3 часа	5-7 дней
Без гельминтов автомат	Эффективна для предупреждения гельминтозов у детей и взрослых.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Снижаем вес автомат	При лишнем весе, являющемся следствием вирусного отягощения. Отечности.	Противовирусный Антитоксический	1-2 дня	4-6 месяцев
Уменьшаем объем автомат	При нарушении работы лимфатической системы, задержке жидкости, снижении иммунитета в следствие повышенной интоксикации.	Антитоксический, Лимфодренажный, Противоотечный	1-2 дня	4-6 месяцев
Защита 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых токсинов.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 2 автомат	При неправильном образе жизни, больших стрессовых и физических нагрузках, проживании в неблагоприятных экологических районах. Программу рекомендуется использовать в составе комплекса «Защити себя».	Противовирусный Противопротозойный Противовоспалительный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев

Защита 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 4 автомат	При грибковой нагрузке и в целях предотвращения мутаций и негативного перерождения клеток. Программу рекомендуется использовать в составе комплекса «Защити себя».	Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
SOS 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых тонзиллов.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 2 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!»	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	6-12 месяцев
SOS 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 4 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!»	Антибактериальный Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический	3-4 дня	6-12 месяцев
Восстановление 1 автомат	При воспалении и повреждениях слизистой полости, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Восстановление 2 автомат	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	В течение суток	2-4 недели
Здоровые десны автомат	При инфекциях и повреждениях полости рта. Рекомендуется использовать согласно методике комплекса «Здоровые зубы».	Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	4-6 месяцев
Восстановление нервов автомат	При негативном расстройстве нервной системы, нарушении целостности нервного волокна, вызванных укусами клещей или другими факторами.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
Здоровое дыхание	При заболеваниях дыхательных путей: носа, горла, бронхов, легких.	Противовирусный Антибактериальный Антитоксический Противовоспалительный	1-2 дня	1 месяц



## БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДЕЛИКСИРОВ

Система органов	Деликсир	Биологическая роль
ССС	Multi-Energy	Регулирует функции свертывания крови, кроветворения (для женщин во время менструации), миокарда, снимает отечность, предотвращает истончение и хрупкость сосудов. Способствует нормализации давления, улучшает состав крови.
	pH Balance	Укрепляет кровеносные сосуды, предупреждает развитие варикоза, геморроя, активизирует процесс кроветворения, регулирует давление.
	Collagen+	Регулирует процесс кроветворения, поддерживает работу сердечной мышцы, способствует снижению холестерина, налаживает кровообращение.
	Detox	Препятствует сгущению крови, нормализует давление, очищает стенки сосудов, укрепляет их.
ЖКТ	Multi-Energy	Снимает воспаления слизистой, улучшает процесс переваривания и усвоения питательных веществ, регулирует секреторную функцию.
	pH Balance	Нормализует кислотность желудочного сока, улучшает пищеварение, предупреждает развитие заболеваний кишечника (фитонциды), подавляет брожение, стабилизирует флору.
	Collagen+	Улучшает работу ЖКТ, нормализует аппетит.
	Detox	Облегчает переваривание белков, помогает при нарушениях работы кишечника (атония, запоры) и расстройствах желудка. Выводит токсины, подавляет патогенную флору.
Нервная	Multi-Energy	Улучшает работу мозга, снимает нервное напряжение. благоприятно действует на процессы торможения и возбуждения в коре головного мозга. Улучшает настроение.
	pH Balance	Способствует формированию стрессоустойчивости, помогает при раздражительности, нарушениях сна.
	Collagen+	Улучшает состояние при депрессии, снимает утомляемость, имеют положительное влияние на деятельность мозга .
	Detox	Снимает нервное напряжение, повышает настроение.
Эндокринная, обмен веществ	Multi-Energy	Активизирует реакции тканевого дыхания, предотвращает нарушения углеводного обмена. В частности пировиноградной к-ты, что уменьшает ацидоз тканей и гипоксию. Защищает клетки от разрушения. Стимулирует клеточный обмен. Повышает жизненные силы. Облегчает вход в диету для снижения веса. Понижает уровень холестерина. Улучшает белковый и липидный обмен. Регулирует гормональный фон.
	pH Balance	Стимулирует углеводный и белковый обмен, улучшает усвоение кальция, железа, активизирует обмен веществ, способствует похудению. Снижает уровень холестерина, стабилизирует уровень сахара.
	Collagen+	Регулирует белковый и жировой обмен, замедляет старение.
	Detox	Ускоряет биосинтез белка, клеточный обмен, углеводный, тормозит процессы старения, защищает от свободных радикалов.
Репродуктивная	Multi-Energy	Нормализует гормональный фон (бесплодие), усиливает потенцию, повышает либидо.
	pH Balance	Смягчает менструальные недомогания
	Collagen+	Нормализует гормональный баланс
	Detox	Повышает сексуальную активность

Мочевыделительная	Multi-Energy	Выводит воду, устраняет отеки
	pH Balance	Мягкое мочегонное, предупреждение мочекаменной болезни
	Collagen+	Уменьшает отечность
	Detox	Выводит воду, устраняет отеки. Смягчает проблемы почек и мочевого пузыря
Дыхательная	Multi-Energy	Смягчает приступы астмы
	pH Balance	Усиливает местный иммунитет
	Collagen+	Снижает воспаления, способствует восстановлению эластичности сосудов
	Detox	Укрепляет слизистые оболочки
Кожа /слизистые	Multi-Energy	Ускоряет регенерацию кожи, участвует в формировании коллагена в коже и соединительной ткани, улучшает качество волос и кожи, укрепляет слизистую, устраняет кровоточивость десен, носовые кровотечения. Замедляет процессы старения
	pH Balance	Активизирует обновление соединительной ткани, рост волос и ногтей, уменьшает кровоточивость десен, защищает слизистые оболочки.
	Collagen+	Ускоряет регенерацию, поддерживает кожный иммунитет (дерматиты).
	Detox	Оживляет цвет волос и кожи, укрепляет слизистую оболочку, уменьшает кровоточивость десен
Опорно-двигательная	Multi-Energy	Улучшает всасывание кальция и фосфора, предотвращает деформацию тазовых костей у девочек-подростков, снижение прочности костной ткани у взрослых, атрофию мышц. Активизирует их развитие.
	pH Balance	Участвует в укреплении костей, зубов, обновлении соединительной ткани, активизирует мышечную работу.
	Collagen+	Способствует поддержанию структуры и функции костей, суставов и мышц
	Detox	Снимает спазмы мускулатуры, укрепляет соединительную ткань, уменьшает болезненность суставов
Иммунная	Multi-Energy	Общеукрепляющий эффект
	pH Balance	Предотвращает простудные заболевания, ацидоз при инфекциях.
	Collagen+	Оказывает противовоспалительный, общеукрепляющий эффект
	Detox	Защищает от простудных заболеваний, восстанавливает барьерную функцию слизистой, тормозит воспалительные процессы.
Органы зрения	Multi-Energy	Необходим для образования зрительного пигмента, формирования остроты зрения, снижения сухости роговицы и слизистых оболочек.
	pH Balance	Улучшает зрение
	Collagen+	Укрепляет мышцы глаза, затормаживают процесс снижения зрения
	Detox	Повышает остроту зрения, снимает куриную слепоту. Снимает отечность и воспаленность век
Энергия в организме/ Омоложение	Multi-Energy	Придает силу и энергию. Защищает клетки от разрушения (антиоксиданты)
	pH Balance	Снижает утомляемость, способствует омоложению (обновление клеток)
	Collagen+	Уменьшает токсическую нагрузку, замедляет старение (антиоксиданты)
	Detox	Снимает усталость, повышает работоспособность

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ DeVita для использования при различных функциональных проблемах

Система органов	Нарушения работы органов системы	Программы DeVita Ritm	Программы DeVita AP
ССС	Сердечная/коронарная недостаточность (ИБС, стенокардия, постинфарктное состояние, токсические повреждения сердечной мышцы, функциональная перегрузка сердца и др)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Интимное здоровье, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат.
	Нарушения ритма сердца (аритмия, тахикардия)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме, Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ Интимное здоровье
	Гипертония, гипотония, варикоз, атеросклероз и другие заболевания сосудистой системы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Давление в норме автомат, Антиварикоз, Голова без боли, Обмен веществ в норме, Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Базовая 3 автомат, Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ, Без иерсинии, Стоп мигрень
ЖКТ	Гастрит, эзофагит, изжога, язва	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Здоровый сон автомат	Нет хеликобактеру, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат.
	Дуоденит, колит, энтерит, язва, синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, атония.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Очищение автомат, Без сальмонеллы, Без протей, Без клебсиеллы, Стоп амеба, Без клостридий
	Гепатит, ДЖВП, холецистит, панкреатит, диабет, ЖЖБ.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Базовая 3 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Стоп бактерии, Очищение автомат, Желчь без застоя, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Без лептоспирей, Восстановление 2 автомат

ЖКТ	Острые заболевания (отравление, аллергия)	Здоровый день автомат, Обмен веществ в норме, Без аллергенов, Без отравлений автомат	ЖКТ в порядке, Помощь при отравлении, Дренаж антитоксический, Нет аллергии, Очищение автомат, Стоп пеницилл, Менсиканна детокс, Без клостридий, Без шигеллы, Без протея, Без ротавируса
Нервная	Неврозы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Оперативная память+	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп мигрень, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без гриба
	ВСД	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Здоровые почки, Голова без боли	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без гриба, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень
	Инсульт	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Голова без боли.	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без гриба, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень
	Радикулит, неврит, опоясывающий лишай	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Суставы без боли автомат, Нервная система, общая	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без гриба, Стоп герпес Z автомат, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат.
Эндокринная	Гипоталамо-гипофизарные нарушения	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антитоксический, Антивирус ЖКТ, Без криптококка

Эндокринная	Заболевания поджелудочной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Восстановление 2 автомат
	Заболевания щитовидной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье Обмен веществ в норме, Здоровая щитовидка	Базовая 1 автомат Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантный, Восстановление 2 автомат.
	Заболевания надпочечников	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантный, Восстановление 2 автомат.
	Заболевания половых желез	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье, Ж/М сексуальность	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протей, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат
Репродуктивная	Нарушения в женской половой сфере (нарушения цикла, болезненная менструация, климакс, новообразования)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Женское здоровье, Женская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протей, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.
	Нарушения в мужской половой сфере (простатит, аденома, проблемы с потенцией)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Мужское здоровье автомат, Мужская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протей, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.

Мочевыделительная	Уретрит, Цистит, МКБ, подагра, пиелонефрит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без энтерококка, Стоп пеницилл, Без папиллом, Без трихомонады, Восстановление 2 автомат.
Дыхательная	Проблемы верхних дыхательных путей (ОРЗ, ринит, трахеит, ларингит, фарингит, гайморит)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Чистые паузы, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат, Антивирус ЖКТ, Здоровое дыхание автомат
	Проблемы нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиальная астма, пневмония)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Без простуды автомат	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Стоп паразиты автомат., Нет нематод и аскарид, Здоровое дыхание автомат Без пневмонии, Без кашля, Восстановление 2 автомат, Без синегнойки,
Кожа/слизистые	Контактный дерматит, себорейный дерматит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровье кожи и волос автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антиоксидеский, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат
	Нейродермит, экзема	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Без аллергенов, Женское/мужское здоровье, Чистая кожа.	Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Нет аллергии, Дренаж антиоксидеский, Очищение автомат, Без протeya, Без синегнойки, Восстановление 2 автомат

Кожа/слизистые	Аллергия	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет аллергии, Дренаж антиотоксический, Очищение автомат
Опорно-двигательная	Остеохондроз, артрит, артроз, подагра, протрузии, травмы, бурсит, миозит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Суставы без боли автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат, Стоп травмы	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Дренаж антиотоксический, Стоп клещи 1,2, Без синегнойки, Без энтерококка
Иммунная	Аллергия, проблемы тимуса, селезенки, лимфатических узлов	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Чистая лимфа, Горло без проблем	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Дренаж антиотоксический, Очищение автомат, Мексиканка детокс, Нет аллергии, Стоп простуда общая, Горло без боли, Восстановление 2 автомат, Стоп пеницилл
Органы чувств	Проблемы органов зрения (атрофия зрительного нерва, блефарит, кератит, конъюнктивит, катаракта, глаукома, близорукость, дальновидность, астигматизм)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое зрение, Без аллергенов, Нервная система, общая	Поддержка иммунитета автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Очищение автомат, Стоп герпес S автомат, Восстановление 2 автомат., Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет хламидиям, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антиотоксический
	Проблемы органов слуха (отит, снижение слуха)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые уши, Нервная система, общая, Стоп травмы, Антипростуда	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Антивирус ЖКТ, Уши без воспаления, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат



Органы чувств	Проблемы органов обоняния (ОРЗ, синусит, ринит, травмы)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Нервная система, общая, Антипростуда, Без аллергенов, Стоп травмы	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Стоп бактерии, Антивирус ЖКТ, Чистые пазухи общая, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Стоп коронавирус new, Восстановление 2 автомат
Стоматологические проблемы	Повреждения и воспаления слизистой, кровоточивость десен, болезненность после стоматологических вмешательств	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Крепкие зубы, Стоп травмы	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Здоровые десны автомат, Восстановление 1-2 автомат, Стоп травма (зубы), Без свища, Дренаж антиоксидантный

**Примечание:** необходимые программы для приборов серии BASE можно записать через программное обеспечение DelInfo.







Комплексное применение всех трех устройств DeVita — это залог здоровой и активной жизни. Только применяя все устройства, ваш организм будет полностью очищаться от токсинов, органы станут функционировать гармонично и слаженно, а вы почувствуете бодрость и прилив сил.

А необходимое клеточное питание наладит процессы жизнедеятельности.

Совместное применение технологий и напитков, произведенных компанией DEHolding – это ключ к здоровью и долголетию.

**DeVitaCenter.Com**

20200525

