



**Руководство по эксплуатации
массажера для спины
Momoda Lumbar Massager
для клиентов интернет-магазина «Румиком»**



Благодарим Вас за выбор массажера для спины Momoda Lumbar Massager!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Важные положения

1. Для питания устройства следует использовать только комплектный блок питания;
2. Использовать устройство следует вдали от источника открытого пламени или повышенной влажности;
3. Воздушный мешок устройства следует оберегать от повреждений острыми предметами;
4. Не допускается самовольный разбор устройства, причиненный вследствие этого ущерб не покрывается гарантийными обязательствами;
5. Во избежание повреждений не следует наступать на устройство, а также ронять его с высоты;
6. Устройство предназначено исключительно для массажа области поясницы, не допускается его применение для массажа других областей;
7. При использовании функции подогрева следует избегать прямого контакта нагреваемых элементов с оголенной кожей;
8. Не рекомендуется применять устройство сразу после приема пищи, в случае возникновения неприятных ощущений следует незамедлительно прекратить использование устройства и обратиться к специалисту.

Обзор продукта

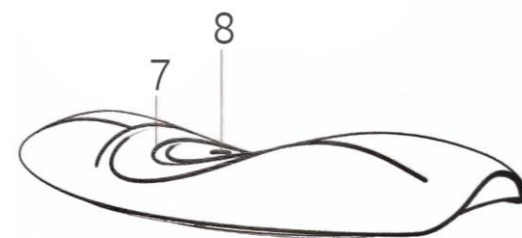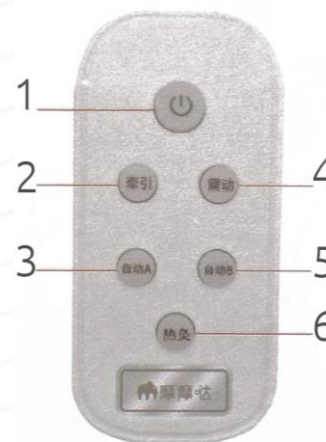

1. Включение и выключение устройства
2. Ручной режим
3. Автоматический режим А
4. Вибрация
5. Автоматический режим В
6. Подогрев
7. Индикатор питания и магнита
8. Область подогрева

Примечание: Технические характеристики и внешний вид товара могут отличаться, приоритетную силу имеет реальный продукт.

Порядок использования

Включение и выключение

1. Подключить устройство к источнику питания (Разъем питания расположен в нижней части пульта ручного управления), после однократного звукового сигнала включится красный индикатор, устройство перейдет в режим ожидания, для его включения следует нажать на кнопку включения.

Ручной режим

2. Зажать кнопку «Ручной режим» (牵引键) и не отпускать, давление воздуха в устройстве начнет постепенно подниматься, по достижении комфортного давления для его поддержания следует отпустить кнопку «Ручной режим» (牵引键), при этом индикатор кнопки «Ручной режим» (牵引键) и будет включен, для спуска воздуха следует повторно нажать на кнопку «Ручной режим» (牵引键) при превышении давления устройство издает звуковой сигнал.

Режим вибрации

3. Для перехода в режим вибрации следует нажать на кнопку «Вибрация» (震动键), при этом включится ее индикатор, для отключения вибрации следует повторно нажать на кнопку «Вибрация» (震动键). В режиме вибрации режим ручного управления можно использовать совместно с режимом подогрева.

Автоматический режим

4.1 Для перехода в автоматический режим А следует нажать на кнопку «Авто А» (自动A) при этом включится индикатор «Авто А» (自动A). Автоматический режим включает в себя умный массаж и вибрацию.

4.2 Для перехода в автоматический режим В следует нажать на кнопку «Авто В» (自动B), при этом включится индикатор «Авто В» (自动B). Данный режим включает в себя автоматический массаж без вибрации.

Режим


подогрева

5. Для перехода в режим подогрева следует нажать на кнопку «Подогрев» (热灸), режим подогрева может работать на низкой, средней и высокой температуре. Одно нажатие включает зелёный индикатор и низкую температуру, второе нажатие включает синий индикатор и среднюю температуру, третье нажатие включает красный индикатор и высокую температуру. По достижении заданной температуры соответствующий индикатор будет мигать. Четвертое нажатие служит для выключения режима подогрева.

Порядок использования

Порядок использования укрепляющей пластины


1. Укрепляющую пластину разместить под устройством, как показано на рисунке.

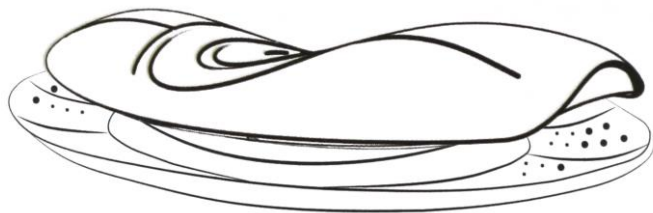

2. Для наилучшего результата применять пластину следует в мягких условиях, таких как диван или кровать.


3. Не следует применять пластину на твердом полу, столе или иных твердых поверхностях.

4. Не следует вставать на пластину или применять ее в иных целях.

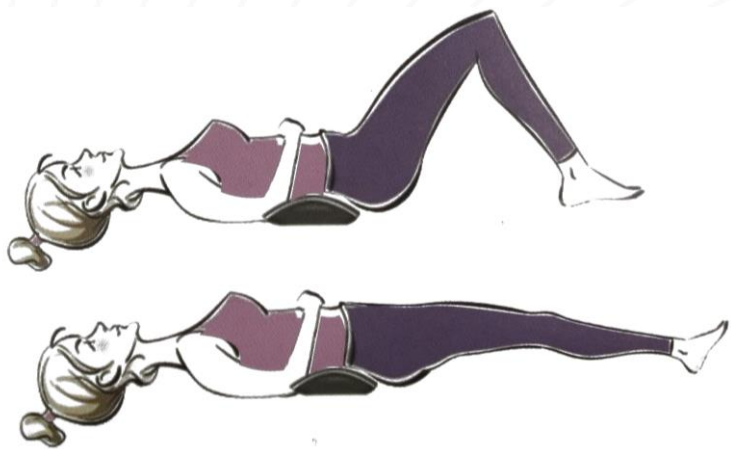


5. Размещение пластины для применения следует подбирать согласно собственному физическому состоянию.

А

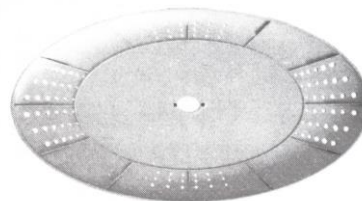

В

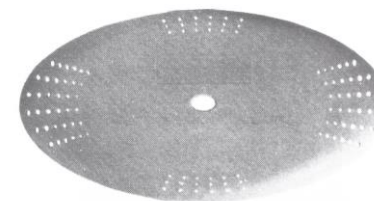

Положить стороной А: Комфортная сила растяжения

Положить стороной В: Увеличенная высота для повышения силы растяжения



Использование на диване



Использование на постели

Технические характеристики

Модель: SX351

Габариты: 433 x 215 x 69 мм

Вес: 1.68 кг

Мощность: 24 Вт

Параметры входа: 220V~ (12V/2A)

Отказ от обязательств

Данное руководство пользователя опубликовано фирменным магазином Румиком. Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.