

Focus 80 Blue

Обновляемый дисплей Брайля

Руководство пользователя

Freedom Scientific Inc.

Содержание:

Содержание:	2
Примечание федеральной комиссии по средствам связи	4
Безопасность и обслуживание	5
Характеристики	6
Комплект поставки	6
Внешний вид	7
Вид сбоку	7
Вид сверху	7
Вид спереди	8
Элементы управления	8
NAV Rockers и кнопки Режима	8
Кнопки панорамирования	9
Кнопки-качельки	9
Кнопки выбора	9
Кнопки-качельки панорамирования	9
Кнопки перемещения курсора	9
Таблица функций комбинированных команд	10
Кнопка «Питание»	11
Внутренняя батарея	12
Подключение Focus	13
Добавление поддержки JAWS к дисплею Focus	14
Настройка USB-соединения	14
Настройка Bluetooth-соединения	14
Переключение между USB и Bluetooth-соединением	17
BrailleIn	18
Ввод краткописи Брайля	18
Режим изучения Брайля	19
Настройка дисплея Focus	20
Расположение статусных ячеек	20
Регулируемая жесткость брайлевских точек	20
Блокировка клавиатуры в стиле Перкинс	21
Меню дисплея	22
Идентификатор Bluetooth (Bluetooth ID)	22
Повтор клавиш	22
Время перехода в спящий режим	22
Обзор клавиатурных команд Focus	23
Клавиши-модификаторы	23
Функциональные клавиши	24
Специальные клавиши	24
Команды навигации	26
Клавиши быстрой навигации Microsoft Word	27
Команды выделения текста	28
Выделение при помощи Кнопок перемещения курсора	29
Команды Брайля	29
Команды Windows	30
Команды выделения	30
Команды JAWS	31
Функции курсора	32
Служебные команды	33
Требования к окружающей среде	34
Хранение	34

Работа.....	34
Режим диагностики.....	35
Вход и выход из режима диагностики.....	35
Тест кнопок перемещения курсора.....	35
Тест/Очистка дисплея.....	35
Тест клавиш и элементов управления.....	35
Режим информации о состоянии батареи.....	36
Поиск и устранение неисправностей.....	37

ОПУБЛИКОВАНО
Freedom Scientific Inc.
11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805
США
<http://www.FreedomScientific.com>

Информация в этом документе не подлежит изменению без уведомления. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или распространена в какой-либо форме или какими-либо электронными или механическими средствами в каких-либо целях без письменного разрешения Freedom Scientific.

Авторское право © 2014 Freedom Scientific. Все права защищены.

JAWS является зарегистрированным товарным знаком компании Freedom Scientific в Соединенных Штатах и других странах. Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и / или других странах.

Содержит модуль передатчика FCC ID: ED9LMX9838

Содержит модуль передатчика IC: 1520A-LMX9838

Примечание федеральной комиссии по средствам связи

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не будут возникать в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Изменить ориентацию или местоположение приёмной антенны.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключить устройство к розетке, отличной от той, к которой подключён приёмник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио- или телемастеру.

Данное устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Работа с прибором подчиняется следующим двум условиям: (1) данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, которые могут вызывать сбои в работе.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, отвечающей за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Внимание: Воздействие радиочастотного излучения.

Это устройство не должно размещаться рядом или работать вместе с любой другой антенной или передатчиком.

Внимание:

Данное устройство поставляется с кабелями, удовлетворяющими требованиям FCC. Если в будущем потребуется замена кабеля, то свяжитесь с российским дилером компании Freedom Scientific для получения соответствующих кабелей.

Безопасность и обслуживание

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать или открыть корпус Focus Blue. Этот продукт не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. Любая несанкционированная попытка ремонта или замены внутренних компонентов приведёт к аннулированию гарантии.

Храните Focus Blue вдали от влажных помещений и других источников жидкости. Не погружайте Focus Blue в жидкости и не подвергайте воздействию дождя.

Оптимальная температура для работы Focus Blue между 5° и 35° C (40° и 95° F).

Не храните устройство в местах, подверженных воздействию экстремальных температур, таких как припаркованный автомобиль.

Используйте только адаптер питания, который поставляется вместе с Focus Blue для зарядки внутренней батареи. Другие адаптеры могут повредить устройство.

Характеристики

Обновляемый дисплей Брайля Focus 80 Blue обеспечивает тактильный доступ к компьютеру. Совместно с программным обеспечением экранного доступа, таким как JAWS® для Windows, Focus 80 Blue расширяет возможности использования компьютера.

Focus 80 Blue включает следующие характеристики:


- 80 обновляемых ячеек Брайля.
- Кнопка перемещения курсора над каждой брайлевской ячейкой.
- 8-клавишная клавиатура Брайля в стиле Перкинс с двумя дополнительными клавишами SHIFT
- Две кнопки панорамирования, две кнопки-качельки, две кнопки выбора и четыре кнопки-качельки панорамирования.
- Кнопки NAV Rockers и кнопки переключения режимов расположены с обеих сторон дисплея для быстрого перемещения по файлам, спискам и меню.
- VariBraille регулируемая жесткость брайлевских точек.
- Возможность размещения статусных ячеек в любом конце дисплея.
- Режим ускоренного чтения для быстрого просмотра файлов.
- USB-соединение с компьютером.
- Беспроводная связь Bluetooth®.
- Поддержка для отдельных моделей мобильных телефонов и мобильных устройств с помощью сторонних приложений.

Комплект поставки

Комплект поставки Focus включает следующие предметы. Если вы обнаружите, что у вас отсутствует любой из нижеперечисленных компонентов, то позвоните в службу поддержки пользователей (495) 748-96-77


- Дисплей Брайля Focus 80 Blue
- Адаптер питания
- USB-кабель
- Сумка для переноски
- Руководство, напечатанное плоскочечатным шрифтом и шрифтом Брайля
- Сопроводительный компакт-диск
- Гарантийно-регистрационная карточка
- Талон на обслуживание изделия

Вид сбоку

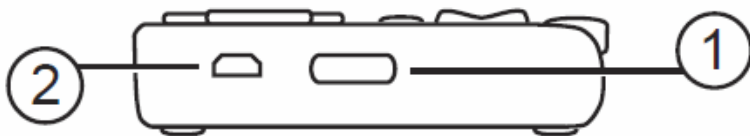

С левой стороны дисплея, следуя от передней панели к задней, вы найдёте кнопку Power (Питание) (1), стандартный микро USB-порт (2). USB-порт позволяет подключать дисплей к компьютеру при помощи поставляемого в комплекте USB-кабеля или к адаптеру питания.


Вид сверху

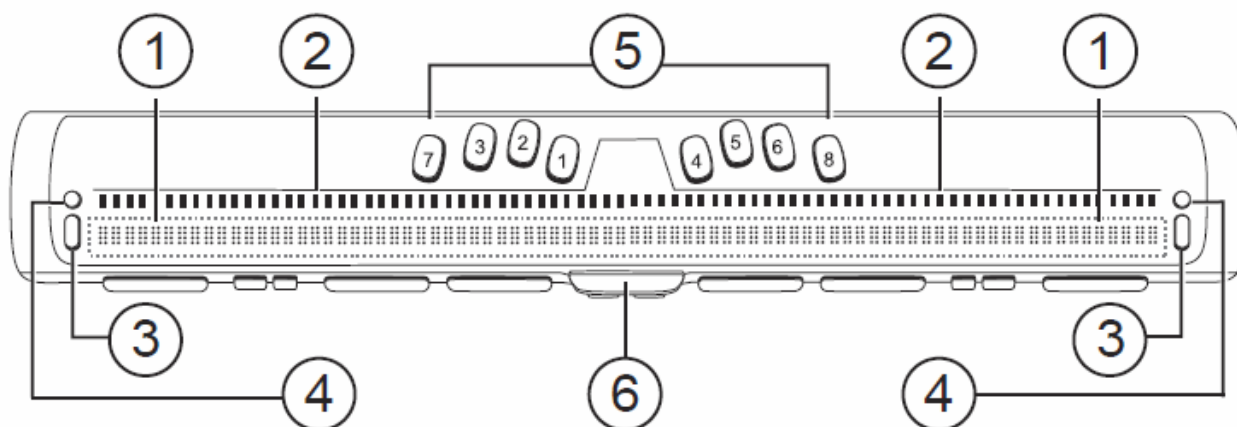

Обновляемые ячейки Брайля (1) расположены на передней панели устройства. Над каждой брайлевской ячейкой находится кнопка перемещения курсора (2). На каждом конце поверхности дисплея расположены NAV Rockers (навигационные клавиши-качельки)(3), используемые для более удобной навигации. Над каждой клавишей NAV Rocker расположены кнопки переключения режимов навигации (4).

Непосредственно над кнопками перемещения курсора расположена восьмиклавишная клавиатура, подобная брайлевской клавиатуре Перкинса (5). Восемь брайлевских кнопок слева направо: 7, 3, 2, 1, 4, 5, 6 и 8. Эти кнопки используются для ввода текста и выполнения команд. На переднем крае, непосредственно по центру дисплея расположена кнопка SPACEBAR (Пробел)(6). Эта кнопка используется вместе с брайлевскими кнопками при вводе команд.

Вид спереди

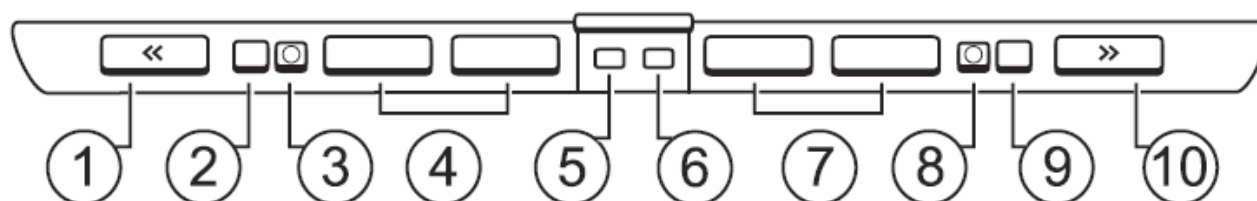

На передней панели дисплея расположены следующие элементы управления слева направо:

- Левая кнопка панорамирования (1)
- Левая кнопка-качелька (2)
- Левая кнопка выбора (3)
- Две левые кнопки-качельки панорамирования (4)
- Левая кнопка SHIFT (используется в сочетании с SPACEBAR (Пробел), брайлевскими кнопками и другими клавишами управления при вводе команд)(5)
- Правая кнопка SHIFT (используется в сочетании с SPACEBAR (Пробел), брайлевскими кнопками и другими клавишами управления при вводе команд)(6)
- Две правые кнопки-качельки панорамирования (7)
- Правая кнопка выбора (8)
- Правая кнопка-качелька (9)
- Правая кнопка панорамирования (10)

Элементы управления

Дисплей Брайля Focus 80 Blue имеет две клавиши NAV Rockers, две кнопки режима, две кнопки панорамирования, две кнопки-качельки, две кнопки выбора, четыре кнопки-качельки панорамирования и кнопки перемещения курсора над каждой брайлевской ячейкой (см. таблицу после раздела "Кнопки перемещения курсора" для получения полного списка всех функций комбинированных команд).

Примечание: Если вы решите использовать дисплей Focus на компьютере или мобильном устройстве с программой экранного доступа от стороннего производителя, обратитесь к документации, поставляемой с данной программой, так как функции элементов управления могут отличаться от функций этих же элементов в JAWS.

NAV Rockers и кнопки Режима

Клавиши NAV Rockers позволяют вам быстро перемещаться по файлам, диалоговым окнам, спискам и меню. В файле вы можете перемещаться по строкам, предложениям, абзацам или передвигаться вперед и назад. Для переключения между четырьмя режимами навигации, нажмите кнопку Режима, расположенную прямо над каждой клавишей NAV Rocker. В диалоговом окне вы можете перемещаться между доступными элементами управления и даже взаимодействовать с ними. В меню вы можете перемещаться вверх и вниз по пунктам меню.

Кнопки панорамирования

Кнопки панорамирования Focus выполняют смещение влево или вправо на ширину дисплея (80 ячеек) при каждом нажатии. Нажмите кнопку панорамирования в левой передней части Focus (это кнопка с двумя выпуклыми стрелками, указывающими налево) для смещения влево; нажмите кнопку панорамирования в правой передней части Focus (это кнопка с двумя выпуклыми стрелками, указывающими направо) для смещения вправо. Функции кнопок панорамирования могут быть изменены так, чтобы нажатие левой кнопки панорамирования вызывало смещение вправо, а нажатие правой кнопки панорамирования вызывало смещение влево. Обратитесь к справке Диспетчера клавиатуры JAWS для получения подробных сведений об изменении назначений этих и других клавиш.

Кнопки-качельки

Кнопки-качельки служат для перемещения на строку вверх или вниз. Нажимайте верхнюю часть кнопки для перехода на одну строку вверх; нажимайте нижнюю часть кнопки для перехода на одну строку вниз. Кнопки-качельки в комбинации с кнопками панорамирования переводят вас в начало или конец строки, в которой находится курсор. Нажмите кнопку панорамирования и верхнюю часть кнопки-качельки для перехода в начало строки. Нажмите кнопку панорамирования и нижнюю часть кнопки-качельки для перехода в конец строки.

Кнопки выбора

Используемые самостоятельно кнопки выбора (кнопки вогнутой формы) управляют авто перемещением. Нажимаемые в комбинации с другими элементами управления кнопки выбора выполняют множество других функций.

Кнопки-качельки панорамирования

Четыре кнопки-качельки панорамирования на Focus 80 функционируют как дополнительные кнопки панорамирования. Они перемещают так же, как и кнопки-качельки. Нажмите верхнюю часть любой кнопки-качельки панорамирования для перемещения налево и нажмите на нижнюю часть для перемещения направо.

Кнопки перемещения курсора

Над каждой брайлевской ячейкой находится кнопка перемещения курсора. Нажмите кнопку перемещения курсора, чтобы переместить курсор в данную точку или выбрать ссылку на веб-странице или сообщение электронной почты. В линейном режиме нажмите кнопку перемещения курсора для открытия меню или пунктов меню.

Удерживая в нажатом положении **Левую или Правую кнопку панорамирования**, нажмите **кнопку перемещения курсора** для имитации щелчка правой кнопки мыши в данной точке.

Таблица функций комбинированных команд

Функции	Сочетания клавиш
Переключение режима авто перемещения	Левая кнопка Выбора + правая кнопка Выбора
Уменьшение скорости авто перемещения	Левая кнопка Выбора
Увеличение скорости авто перемещения	Правая кнопка Выбора
Щелчок правой кнопкой мыши	Кнопка Панорамирования + Кнопка перемещения курсора
Control+Щелчок левой кнопкой мыши	Кнопка перемещения курсора в сочетании с клавишей «Пробел»
На страницу вниз	Левая или правая кнопка выбора + нижняя часть кнопки-качельки
На страницу вверх	Левая или правая кнопка выбора + верхняя часть кнопки-качельки
Начало файла	Левая кнопка панорамирования + кнопка выбора
Конец файла	Правая кнопка панорамирования + кнопка выбора
Конец	Кнопка панорамирования + нижняя часть кнопки-качельки
Начало	Кнопка панорамирования + верхняя часть кнопки-качельки
Следующая строка	Нижняя часть кнопки-качельки
Предыдущая строка	Верхняя часть кнопки-качельки
Смещение влево	Левая кнопка панорамирования
Смещение вправо	Правая кнопка панорамирования
Выделение текста	Левый SHIFT + кнопка перемещения курсора
Выделение блока текста	Правый SHIFT + кнопка перемещения курсора в начале блока; повторить в конце блока

Включение/выключение клавиш NAV Rockers	Левая или правая кнопка Режима в сочетании с клавишей «Пробел»
---	--

Кнопка «Питание»

Кнопка «Питание» включает и отключает Focus при отсутствии подключения по USB. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения дисплея, и нажмите и удерживайте в течение 3 секунд снова для отключения дисплея.

Внутренняя батарея

Focus 80 Blue имеет внутреннюю батарею для работы Bluetooth. При использовании Focus через соединение Bluetooth, вы получите примерно 20 часов работы в обычном режиме. Для проверки состояния батареи во время использования дисплея, нажмите кнопку питания для отображения процента зарядки батареи. Нажмите кнопку перемещения курсора или любую другую клавишу управления для возврата в нормальный режим работы.

Когда заряд батареи станет равным 20, 10 и 5 % соответственно, отобразится предупреждающее сообщение о низком заряде батареи с указанием, что настало время для подключения адаптера питания. Вы можете убрать это сообщение, нажав кнопку перемещения курсора.

Дополнительно, когда уровень заряда батареи упадёт ниже 10%, точки 7 и 8 последних пяти ячеек покажут каждый процент снижения. Например, при уровне батареи, равном одному проценту, **Точка 8** в ячейке 80 будет поднята.

Для зарядки дисплея используйте адаптер питания, идущий в комплекте поставки. Зарядка устройства занимает три часа от электросети, даже если активно Bluetooth-подключение. Время зарядки будет меньше, если батарея была не полностью разряжена до подключения дисплея к электросети. Focus также будет заряжаться при USB-подключении, однако, время зарядки займёт больше времени, чем зарядка с помощью прилагаемого адаптера питания. Вы можете продолжать использовать Focus во время зарядки.

Внимание: Не содержит обслуживаемых пользователем частей. Риск поражения электрическим током.

Подключение Focus

Вы можете подключить брайлевский дисплей Focus к компьютеру, используя либо USB-порт, либо Bluetooth. При подключении к USB-порту, питание к дисплею поступает от компьютера через USB-кабель. При этом также заряжается внутренняя батарея.

Как только вы подключите USB-кабель к компьютеру, Focus включится. Когда кабель USB будет отсоединён, Focus выключится. Нажатие кнопки питания во время USB-подключения вызовет отображение модели, версии прошивки, состояния батареи, типа соединения, USB, в последних трёх ячейках дисплея. Нажатие кнопки перемещения курсора возвратит дисплей к нормальному режиму работы.

Bluetooth является беспроводной технологией малой дальности. Устройства с возможностями Bluetooth могут общаться друг с другом на расстоянии примерно 10 метров без необходимости физического соединения. Использование беспроводной технологии Bluetooth означает, что вам не нужны никакие кабели, и вы можете удобно расположиться на диване и пользоваться Focus и как дисплеем Брайля, и как клавиатурой для доступа к компьютеру из любого места в комнате.

Для того чтобы использовать Bluetooth, необходимо установить связь с компьютером, где активирован Bluetooth. Большинство современных ноутбуков, а также некоторые модели настольных компьютеров оснащены встроенной поддержкой Bluetooth. Однако не все компьютеры имеют такую поддержку. Если ваш компьютер не имеет встроенной поддержки Bluetooth, вам необходимо приобрести внешний USB Bluetooth-адаптер и установить соответствующие драйверы в вашей системе для работы данного устройства. Обратитесь к документации, которая поставляется с устройством Bluetooth для того, чтобы убедиться в правильной настройке данного устройства на вашем компьютере.

Добавление поддержки JAWS к дисплею Focus

Если вы используете Focus Blue с JAWS 10 или более ранней версией, вам необходимо установить драйвер, находящийся на сопроводительном компакт-диске, который поставляется вместе с дисплеем, до подключения его к компьютеру.

Примечание: Отсоедините дисплей Focus от компьютера, когда будете выполнять нижеследующие шаги. Оставление дисплея подключённым во время этого процесса, приводит к неправильной установке и неправильной работе дисплея.

1. Установите сопроводительный диск Focus Blue. В появившемся диалоговом окне установки дисплея, выберите установку драйверов для ОС Windows. Вы услышите серию щелчков во время установки драйвера.
2. Когда установка будет завершена, выберите кнопку «ОК» для перезагрузки компьютера.

JAWS 11 и более поздние версии автоматически устанавливают необходимые файлы для использования Focus Blue. Убедитесь, что JAWS 11 (или более поздняя версия) установлена и запущена, прежде чем пытаться установить USB или Bluetooth-соединение с Focus 80 Blue.

Примечание: Если вы решили использовать Focus с программой экранного доступа от стороннего производителя, вы должны установить драйверы с сопроводительного компакт-диска. Обратитесь к сопроводительной документации программного обеспечения для конфигурации и использованию Focus с конкретным приложением, так как определённые команды могут отличаться.

Настройка USB-соединения

Чтобы настроить дисплей Брайля Focus Blue для работы с JAWS по USB, выполните следующие действия:

1. Установите USB-соединение между Focus Blue и компьютером с помощью прилагаемого USB-кабеля.
2. Windows обнаружит дисплей и установит соответствующие драйверы.

Примечание: Windows XP отобразит мастер установки нового оборудования с запросом обнаружения драйвера. Выберите опцию автоматической установки программного обеспечения, затем нажмите «Готово», чтобы завершить установку.

3. Как только Windows подтвердит, что оборудование было успешно установлено, закройте и перезагрузите JAWS. JAWS автоматически обнаружит и начнёт использовать дисплей Брайля Focus 80 Blue.

Настройка Bluetooth-соединения

Для беспроводного использования дисплея Focus Blue с JAWS через Bluetooth, вы должны сначала настроить соединение между дисплеем и компьютером.

Для установления Bluetooth-соединения между дисплеем Focus и компьютером (Windows 7 или Vista), выполните следующее:

1. Убедитесь, что Bluetooth включён на компьютере с работающей программой JAWS. Если вы используете внешний USB Bluetooth адаптер, вставьте его и убедитесь, что устройство определено правильно.
2. Включите дисплей. Отобразится информация о версии прошивки и состоянии батареи.
3. На компьютере откройте Панель Управления и введите "bluetooth" в поле поиска.
4. Нажмите **ТАВ** для перемещения к кнопке «Добавить Bluetooth-устройство» и затем нажмите **Enter**. Компьютер начнёт поиск Bluetooth-устройств. Это может занять несколько секунд. По окончании поиска отобразится список найденных устройств.
5. Используйте клавиши **Стрелок** для выбора дисплея Focus из списка, например, Focus 80 ВТ, а затем нажмите «Далее». Если дисплей не был обнаружен, убедитесь, что он включен и затем выберите кнопку «Повтор».
6. Выберите кнопку «Код сопряжения», введите 0000 в поле редактирования, затем нажмите «Далее».
7. Через несколько секунд вы получите сообщение, информирующее вас о том, что Bluetooth-устройство успешно подключено. Нажмите кнопку «Заккрыть».

Если вы используете JAWS 12 или более раннюю версию, вы должны будете найти номер исходящего порта, назначенный дисплеем Focus в качестве порта, который JAWS будет использовать для связи с дисплеем. Для просмотра информации о COM-порте, выберите пункт «Изменить настройки Bluetooth», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры Bluetooth», а затем перейдите на страницу COM-портов. JAWS 13 и более поздние версии автоматически определяют соответствующий COM-порт.

Чтобы настроить Bluetooth-соединение между дисплеем Focus и компьютером (Windows XP), выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что Bluetooth включён на компьютере с работающей программой JAWS. Если вы используете внешний USB Bluetooth-адаптер, вставьте его и убедитесь, что устройство определено правильно.
2. Включите дисплей. Отобразится информация о версии прошивки и состоянии батареи.
3. На компьютере откройте Панель Управления и выберите Bluetooth-устройства.
4. Когда откроется диалоговое окно, нажмите **ТАВ** для перемещения к кнопке «Добавить» и затем нажмите **Enter**.
5. Используйте **Пробел** для установки отметки «Моё устройство установлено и готово к обнаружению», затем нажмите «Далее» для начала поиска Bluetooth-устройств. Это может занять несколько секунд. По окончании поиска отобразится список устройств.
6. Используйте кнопки **Стрелок** для выбора дисплея Focus из списка, например, Focus 80 ВТ, затем нажмите «Далее». Если дисплей не был обнаружен, убедитесь, что он включен и затем нажмите кнопку «Искать снова».
7. Выберите «Использовать ключ доступа», нажмите **ТАВ** для перемещения к полю редактирования ключа доступа, наберите 0000, затем нажмите «Далее».
8. Через несколько секунд вы получите сообщение, информирующее вас о том, что Bluetooth-устройство успешно подключено, и будут отображены входящий и исходящий COM-порты.

Если вы используете JAWS 12 и более ранние версии, запишите номер исходящего порта, поскольку этот порт JAWS будет использовать для связи с дисплеем Focus.

9. Нажмите «Готово», чтобы завершить работу мастера, а затем «ОК», чтобы закрыть диалоговое окно Bluetooth-устройств и сохранить ваши настройки.

Примечание: Ваши настройки не будут сохранены, если вы не выйдете из диалоговых окон мастера и Bluetooth-устройств, как это описано в шаге 9.

Теперь вы должны настроить JAWS для использования Bluetooth-соединения. Обратите внимание, что нет необходимости устанавливать USB-соединение до начала использования Bluetooth. Если вы еще не установили USB-соединение с дисплеем Focus, выполните следующие действия:

1. Нажмите **INSERT + J**, чтобы открыть окно JAWS.
2. Нажмите **Alt + П**, чтобы открыть меню «Параметры» и выберите пункт «Брайль» для открытия диалогового окна «Основные настройки Брайля».
3. Нажмите **TAB** для перемещения к кнопке «Добавить дисплей Брайля» и затем нажмите **Enter**.
4. Из списка дисплеев выберите дисплей Focus и затем нажмите **Пробел**, чтобы выделить его и затем нажмите «Далее».
5. Если вы используете JAWS 13 или более позднюю версию, в комбинированном списке «Выбрать исходящий порт», выберите Bluetooth. В противном случае, выберите порт, соответствующий номеру исходящего COM-порта, который был отображён после окончания сопряжения Focus.
6. Нажмите «Далее» и убедитесь, что Focus выбран в качестве основного дисплея.
7. Нажмите «Готово», и вам будет предложено перезапустить JAWS для того, чтобы эти изменения вступили в силу. Нажмите «ОК», чтобы закрыть это сообщение, и еще раз, чтобы закрыть диалоговое окно «Основные настройки Брайля».
8. Закройте и перезапустите JAWS. Дисплей Focus Blue теперь соединен с JAWS по Bluetooth. Если вы используете JAWS 13 или более позднюю версию, JAWS автоматически определяет соответствующий последовательный порт Bluetooth.

Если вы используете подключение дисплея Focus через USB и хотите переключить соединение на использование Bluetooth, выполните следующие действия:

1. Нажмите **INSERT + J**, чтобы открыть окно JAWS.
2. Нажмите **Alt + П**, чтобы открыть меню «Параметры» и выбрать пункт «Брайль» для открытия диалогового окна «Основные настройки Брайля».
3. Убедитесь, что выбран Focus в поле «Дисплей Брайля по умолчанию», затем нажмите «Изменить параметры».
4. Если вы используете JAWS 13 или более позднюю версию, то в списке «Выберите исходящий порт», выберите Bluetooth. В противном случае выберите порт, соответствующий номеру исходящего COM-порта, который был отображён после окончания сопряжения Focus.

5. Нажмите «ОК» и Вы получите сообщение о необходимости перезапустить JAWS для вступления изменений в силу. Выберите «ОК» для закрытия этого сообщения и еще раз для закрытия диалогового окна «Основные настройки Брайля».

6. Закройте и перезапустите JAWS. Дисплей Focus Blue теперь соединен с JAWS по Bluetooth. Если вы используете JAWS 13 или более позднюю версию, то JAWS автоматически определяет соответствующий последовательный порт Bluetooth.

После того как JAWS будет настроен на соединение с дисплеем Focus Blue по Bluetooth, вы можете переключаться между USB и Bluetooth, а JAWS автоматически будет обнаруживать соединение без необходимости изменения каких-либо настроек. Например, если вы подключите USB-кабель и перезапустите JAWS, дисплей будет работать с JAWS по USB. Если вы отключите USB-кабель, затем включите Focus Blue и перезапустите JAWS, дисплей будет работать с JAWS по Bluetooth.

Чтобы проверить состояние батареи, нажмите кнопку питания для отображения оставшихся процентов заряда батареи. Буквы "BT" также отображаются в ячейках 78 и 79 для информации о том, что Bluetooth-соединение активно. Нажмите кнопку перемещения курсора для возврата к нормальной работе.

Переключение между USB и Bluetooth-соединением

Если вы используете дисплей Focus через USB-соединение, и вам необходим доступ к Bluetooth-устройству, которое ранее было сопряжено с Focus, вы можете использовать функцию «Power 123» для быстрого переключения текущего соединения между USB и Bluetooth. Например, если Focus подключен через USB-соединение к основному компьютеру с запущенной программой JAWS, и вы получили на свой смартфон текстовое сообщение, которое вы хотите прочитать и ответить на него при помощи дисплея Брайля, вы можете переключиться на Bluetooth-соединение, чтобы получить доступ к смартфону, а затем вернуться обратно к USB-соединению для доступа к вашему компьютеру. Чтобы переключить текущее соединение для использования Bluetooth, нажмите кнопку питания, чтобы отобразить информацию о состоянии, а затем нажмите Точки 1-2-3 на клавиатуре в стиле Перкинс дисплея Focus. Если Focus был сопряжён и устройство включено, дисплей незамедлительно отобразит информацию с Bluetooth-устройства. Нажмите кнопку питания, а затем нажмите Точки 1-2-3 снова, чтобы переключиться обратно к USB-соединению.

Примечание: При первоначальном сопряжении Focus Blue с другим Bluetooth-устройством, убедитесь, что дисплей включен и не подсоединен к USB. После сопряжения вы можете подключить USB-кабель, а затем использовать эту функцию для переключения активного соединения.

Примечание: Android и IOS-устройства должны быть сначала заблокированы, прежде чем дисплей переключится с USB на Bluetooth-соединение. После того, как дисплей переключится на Bluetooth, разблокируйте мобильное устройство. Таким образом устройство определит дисплей и будет использовать его как обычно. После того, как соединение уже установлено, вы можете переключаться туда и обратно с помощью команды «Power 123» без необходимости блокировки и разблокировки устройства.

Функция BrailleIn™ позволяет использовать клавиатуру Брайля в стиле Перкинс на дисплее Focus для управления компьютером как с помощью Windows, так и с помощью специальных команд. Кроме того, вы можете использовать как сокращенный, так и несокращенный брайлевский ввод с клавиатуры вашего дисплея. Преимущество состоит в том, что вам больше не придется переключаться между клавиатурой компьютера и клавиатурой дисплея, или входить в специальный режим печати для того, чтобы использовать краткопись Брайля. Список сочетаний клавиш можно найти в данном руководстве в разделе «Обзор клавиатурных команд».

Ввод краткописи Брайля

С BrailleIn, при вводе краткописи Брайля при помощи клавиатуры в стиле Перкинс, ввод непосредственно транслируется как обычный текст в текущее сообщение электронной почты, документ или форму. Если приложение или конкретное поле ввода не поддерживает краткопись, JAWS сообщает «Компьютерный Брайль», при включенном режиме подсказок.

Ввод краткописи Брайля по умолчанию отключен. Чтобы включить его, выполните следующие действия:

1. Нажмите **Insert + F2** и выберите Центр настроек.
2. В поле поиска введите "Трансляция в сокращенный брайль" без кавычек.
3. Нажмите клавишу **Стрелки вниз**, чтобы перейти к трансляции в сокращенный брайль в отфильтрованных результатах поиска.
4. Далее, нажимайте **Пробел**, чтобы переключаться между различными настройками в окне трансляции сокращенного брайля.

Доступные следующие настройки «Отключено», «Только вывод», и «Ввод и вывод». При установке «Отключено», вы не можете прочитать или ввести краткопись Брайля с помощью вашего дисплея. При установке «Только вывод», вы можете прочитать краткопись Брайля на дисплее, но вы можете осуществлять ввод только в компьютерном Брайле при помощи клавиатуры в стиле Перкинс. При установке «Ввод и вывод», вы можете читать и набирать краткопись Брайля с помощью вашего дисплея. По умолчанию установлено значение «Отключено».

Примечание: Трансляция в сокращенный брайль может быть включена или выключена при помощи Параметров трансляции (**INSERT + V**) в тех приложениях, где это возможно.

Режим изучения Брайля

Это инструмент для изучения и преподавания Брайля. Когда данный режим включен, JAWS произносит текущий символ Брайля в ячейке дисплея при нажатии кнопки перемещения курсора непосредственно над этой ячейкой. При нажатии кнопки перемещения курсора в сочетании с левой или правой кнопкой выбора, JAWS будет произносить слова по слогам. Для активации режима изучения Брайля, выполните следующие действия:

1. Убедитесь в том, что дисплей Focus подключен к вашему компьютеру при помощи USB- или Bluetooth-соединения.

2. Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите сочетание клавиш **CTRL + INSERT + В** для открытия диалогового окна "Настройка параметров Брайля" (JAWS 12 или более ранние версии), или
- Нажмите **INSERT + V** для открытия окна «Быстрые настройки» (JAWS 13 или более поздние версии) или чтобы открыть диалоговое окно "Настройка параметров JAWS" (JAWS 12 или более ранние версии).

3. Начните вводить слово «изучение» до тех пор, пока не появится "Режим изучения", а затем нажмите клавишу **ПРОБЕЛ** для включения данного режима. При использовании диалога «Быстрые настройки» (JAWS 13 или более поздние версии), сначала нажмите **TAB** для перемещения к результатам поиска, а затем нажмите клавишу **ПРОБЕЛ**. Режим изучения будет активен до выключения или до перезапуска JAWS.

Кроме того, при отключенном режиме изучения, доступны следующие команды:

- Нажмите **клавишу режима + кнопку перемещения курсора** для того, чтобы JAWS произнес символ Брайля в ячейке дисплея, или
- Нажмите **кнопку перемещения курсора + клавишу выбора**, чтобы JAWS произнес слово по слогам.

Это полезно, когда вам нужно быстрое напоминание, но вы не хотите проходить через весь процесс включения режима изучения Брайля, как описано выше.

Примечание: JAWS возвращается к нормальному режиму работы после того, как произнесёт символ Брайля или слово.

Настройка дисплея Focus

Дисплей Брайля Focus обладает несколькими функциями, которые вы можете настраивать в соответствии со своими потребностями. Вы можете настроить расположение статусных ячеек и регулировать жесткость брайлевских точек.

Все эти параметры настраиваются при помощи Центра настроек (JAWS 12 или более поздняя версия). В Центре настроек выберите «Брайль», затем «Дополнительно». Для получения более подробной информации по использованию Центра настроек, обратитесь к Справке JAWS для Центра настроек. Если вы используете JAWS 11 (или более раннюю версию), то эти параметры настраиваются с помощью Диспетчера конфигурации JAWS.

Расположение статусных ячеек

Вы можете задать расположение информационных статусных ячеек в левом или правом конце дисплея или совсем отключить их отображение. Статусные ячейки по умолчанию расположены в левом конце дисплея.

Регулируемая жесткость брайлевских точек

Установите жесткость брайлевских точек на дисплее Focus. Имеется пять уровней жесткости. Установите для дисплея самый высокий уровень жесткости для большей чувствительности пальцев.

Блокировка клавиатуры в стиле Перкинс

При использовании с Focus Blue QWERTY клавиатуры компьютера, вы можете заблокировать клавиатуру в стиле Перкинс, расположенную в верхней части дисплея во избежание случайного нажатия и ввода ненужного текста или команды.

Чтобы заблокировать клавиатуру Focus Blue, нажмите кнопку питания для отображения информации о состоянии, и затем одновременно нажмите Кнопку перемещения курсора и левую кнопку Режим. Чтобы показать, что клавиатура заблокирована, Точки 2-3-4-6-7-8 и Точки 1-3-5-6-7-8 будут отображаться в двух ячейках по направлению к правой стороне дисплея, перед состоянием соединения. Нажмите любую клавишу управления, чтобы вернуться к нормальной работе. После блокировки, нажатия Точек от 1 до 8 или клавиши «Пробел» больше не будут функционировать.

Чтобы разблокировать клавиатуру, для того чтобы вы снова могли вводить текст или выполнять команды с дисплея Focus, нажмите кнопку питания для отображения информации о состоянии и затем одновременно нажмите Кнопку перемещения курсора и правую кнопку Режим. Нажмите любую клавишу управления, чтобы вернуться к нормальной работе, и вы сможете снова вводить текст с помощью клавиатуры Focus Blue.

Нажатие **ТОЧЕК 1-4-7-8 CHORD*** во время отображения информации о состоянии Focus активирует меню, где вы можете изменить Bluetooth ID дисплея, интервал повтора клавиш для NAV Rockers, и настроить продолжительность интервала времени, в течение которого дисплей будет находиться в режиме ожидания, после нажатия элемента управления до перехода в спящий режим.

При первом открытии меню, вы окажетесь на Bluetooth ID. Для перемещения по доступным параметрам нажимайте **ТОЧКИ 4-5 CHORD** или **ТОЧКИ 1-2 CHORD**. Для перемещения по доступным опциям для настройки, используйте **кнопки-качельки**. Для выхода из меню и сохранения настроек нажмите **ТОЧКУ 8**. Нажмите **Z CHORD (ТОЧКИ 1-3-5-6 CHORD)** для выхода из меню без сохранения настроек. Обе эти команды также вернут дисплей к нормальной работе.

Набор доступных параметров меню описан в последующих разделах.

***Обозначения: CHORD – обозначает клавишу «Пробел» на дисплее Брайля.**

Идентификатор Bluetooth (Bluetooth ID)

Этот параметр отображает Bluetooth ID, который используется дисплеем Focus 80 Blue для идентификации при сопряжении с компьютером или мобильным телефоном. Для Focus 80 Bluetooth ID по умолчанию - Focus 80 BT. Вы также можете изменить идентификатор Focus 80 BT, прибавив 8-значный Bluetooth MAC-адрес. Использование Bluetooth MAC-адреса делает Focus более уникальным, поскольку этот параметр отличается для каждого дисплея Focus. Это полезно, если Вы будете соединять Focus с компьютером там, где есть другие дисплеи с активированным Bluetooth, и вы хотите убедиться, что пара выбрана верно.

Повтор клавиш

Этот параметр определяет, насколько быстро нужно повторять клавиши NAV Rockers при удержании в течение определенного времени, например, насколько быстро вы хотите прокрутить элементы в списке. Доступны четыре настройки – «отключено», «медленно», «нормально» и «быстро». «Отключено» обозначается шеститочием с левого края дисплея в первой ячейке. Два шеститочия – «медленно», три шеститочия – «нормально» и четыре шеститочия – «быстро». По умолчанию, показываются две полные ячейки, что означает, что повтор клавиш установлен на «медленно».

Время перехода в спящий режим

Этот пункт меню позволяет вам указать продолжительность интервала времени, в течение которого дисплей будет ожидать после нажатия элемента управления до перехода в спящий режим.

Вы можете выбрать переход в спящий режим после 5, 15, 30 или 45 минут бездействия. Цифра 5 указывается точками 2-6, 15 точкой 2 и точками 2-6, 30 точками 2-5 и точками 3-5-6, и 45 точками 2-5-6 и точками 2-6.

Обзор клавиатурных команд Focus

В этом разделе описываются клавиатурные команды для JAWS и дисплея Брайля Focus. Команды разделены на клавиши-модификаторы, функциональные клавиши, специальные клавиши, команды навигации, быстрые клавиши навигации Microsoft Word, команды выделения текста, команды Брайля, команды Windows, команды выбора, команды JAWS, функции курсора и вспомогательные функции. Команды Focus основываются на командах JAWS и Windows. Если вы хорошо знакомы с клавиатурными командами JAWS и Windows, то команды Focus будут для вас легки в изучении. Если же вы хорошо освоите команды Focus, то клавиатурные команды JAWS и Windows вы также легко запомните.

Здесь перечислены сочетания клавиш для версии JAWS 12 и более поздних версий. Для просмотра сочетаний клавиш для более ранних версий JAWS посетите страницу с документацией компании Freedom Scientific <http://www.freedomscientific.com/documentation/displays.asp>. Или обратитесь за информацией к локальному дистрибьютору на территории России и стран СНГ компании «Элита Групп» <http://www.elitagroup.ru>

Примечание: Некоторые из этих команд дублируют функции кнопок панорамирования, кнопок-качелек и кнопок выбора, которые были описаны ранее в данном руководстве.

***Обозначения:** В таблицах **CHORD** – обозначает клавишу «Пробел» на дисплее Брайля.

Клавиши-модификаторы

Используйте клавиши-модификаторы, чтобы имитировать комбинации клавиш, включающие **CTRL**, **ALT**, клавишу **WINDOWS**, **SHIFT**, или клавишу **JAWS (INSERT)**. Чтобы использовать эти модификаторы при наборе сочетаний, выполните следующие действия:

1. Удерживая **ТОЧКУ 8 CHORD**, нажмите соответствующие клавиши модификатора. Сочетания перечислены в нижеследующей таблице.
2. После создания части сочетания клавиш модификаторов, отпустите клавиши и нажмите оставшуюся часть. Например, чтобы выполнить нажатие клавиш **CTRL + SHIFT + V**, нужно нажать **ТОЧКИ 3-7-8 CHORD**, отпустить клавиши, а затем нажать **V (ТОЧКИ 1-2-3-6)**.

Название клавиши	Сочетание
Функциональные клавиши (От F1 до F12) Для получения дополнительной информации см. описание функциональных клавиш.	ТОЧКА 1
INSERT	ТОЧКА 2
CTRL	ТОЧКА 3

Клавиша WINDOWS	ТОЧКА 4
Клавиша JAWS	ТОЧКА 5
ALT	ТОЧКА 6
SHIFT	ТОЧКА 7

Функциональные клавиши

Для имитации функциональных клавиш (от **F1** до **F12**), нажмите **ТОЧКИ 1-8 CHORD**, а затем латинскую букву от **A** до **L** (что соответствует от 1 до 12). Например, для имитации клавиши **F6**, нажмите **ТОЧКИ 1-8 CHORD**, затем **F** (**ТОЧКИ 1-2-4**). Если функциональная клавиша является частью комбинации клавиш, добавьте соответствующие модификаторы, удерживая **ТОЧКИ 1-8 CHORD**. Например, для имитации нажатия клавиш **INSERT + F2** нажмите **ТОЧКИ 1-2-8 CHORD**, затем **B** (**ТОЧКИ 1-2**).

Специальные клавиши

Используйте эти клавиши для имитации определённых клавиш, которые не доступны на клавиатуре дисплея Брайля Focus. Эти клавиши могут быть объединены с клавишами-модификаторами, описанными выше. Пунктуация и другие символы будут введены при помощи их эквивалентов краткописи Брайля, если трансляция сокращённого брайля установлена на «Ввод и вывод». Для вашего удобства в таблице представлены и сочетания клавиш, и точки Брайля. Если нет эквивалента для сочетания клавиш, то в ячейке точек Брайля будет отображено тире.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
ESC	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 1 или Z CHORD	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 1 или ТОЧКИ 1-3-5-6 CHORD
ALT	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 2	-
Клавиша контекстного меню	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 2 CHORD	-
Звездочка на цифровом блоке	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 3	-
Клавиши WINDOWS	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 4	-
Слэш на цифровом блоке	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 7	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 7
CAPS LOCK	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 7 CHORD	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 7 CHORD

ПЛЮС на цифровом блоке	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 8	-
BACKSPACE (Возврат)	ТОЧКА 7	-
ENTER (Ввод)	ТОЧКА 8	-
CTRL+BACKSPACE (Возврат)	ТОЧКИ 1-2-3-4-5-6-7 CHORD	-
TAB	ТОЧКИ 4-5 CHORD	-
SHIFT+TAB	В CHORD	ТОЧКИ 1-2 CHORD
HOME	К CHORD	ТОЧКИ 1-3 CHORD
END	ТОЧКИ 4-6 CHORD	-
PAGE UP (Страница вверх)	Левая кнопка Выбора+ Кнопка-качелька вверх или Правая кнопка Выбора + Кнопка-качелька вверх или ТОЧКИ 2-3-7 CHORD	-
PAGE DOWN (Страница вниз)	Левая кнопка Выбора + Кнопка-качелька вниз или Правая кнопка Выбора + Кнопка-качелька вниз или ТОЧКИ 5-6-7 CHORD	-
УДАЛИТЬ	Шеститочие CHORD	ТОЧКИ 1-2-3-4-5-6 CHORD
РАВНО	ТОЧКИ 2-3-5-6	-
Правая квадратная скобка	ТОЧКИ 2-3-4-5-6	-
Левая квадратная скобка	ТОЧКИ 1-2-3-5-6	-
Обратный слэш	ТОЧКИ 3-4-6	-
Слэш	ТОЧКИ 3-4	-
Правая круглая скобка	ТОЧКИ 3-4-5	-
Левая круглая скобка	ТОЧКИ 1-2-6	-
Апостроф	ТОЧКА 3	-
Тире	ТОЧКИ 3-6	-
Кавычка	ТОЧКА 2-3-6	-
Точка	ТОЧКИ 2-5-6	-

Знак вопроса	ТОЧКИ 1-4-5-6	-
Восклицательный знак	ТОЧКА 5	-
Точка с запятой	ТОЧКИ 2-3	-
Запятая	ТОЧКА 2	-

Команды навигации

Используйте эти сочетания клавиш для выполнения различных команд навигации JAWS. Для вашего удобства в таблице представлены и сочетания клавиш, и точки Брайля. Если нет эквивалента для сочетания клавиш, то в ячейке точек Брайля будет отображено тире.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Читать предыдущий символ	ТОЧКА 3 CHORD	-
Читать следующий символ	ТОЧКА 6 CHORD	-
Читать символ	ТОЧКИ 3-6 CHORD	-
Читать предыдущее слово	ТОЧКА 2 CHORD	-
Читать следующее слово	ТОЧКА 5 CHORD	-
Читать слово	ТОЧКИ 2-5 CHORD	-
Читать предыдущую строку	ТОЧКА 1 CHORD или Левая кнопка-качелька вверх	-
Читать следующую строку	ТОЧКА 4 CHORD или Левая кнопка-качелька вниз	-
Читать строку	С CHORD	ТОЧКИ 1-4 CHORD
Читать предыдущее предложение	ЛЕВЫЙ SHIFT+Правая кнопка-качелька вверх	-
Читать следующее предложение	ЛЕВЫЙ SHIFT+ Правая кнопка-качелька вниз	-
Читать предложение	ЛЕВЫЙ SHIFT+ПРАВЫЙ SHIFT+С	ЛЕВЫЙ SHIFT+ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-4
Читать предыдущий абзац	ПРАВЫЙ SHIFT+Левая кнопка-качелька вверх	-
Читать следующий абзац	ПРАВЫЙ SHIFT+ Левая кнопка-качелька вниз	-

Читать абзац	ЛЕВЫЙ SHIFT+ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-3-5-6-7-8	-
Перейти в начало файла	L CHORD	ТОЧКИ 1-2-3 CHORD
Перейти в конец файла	ТОЧКИ 4-5-6 CHORD	-
Читать до курсора	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-7	-
Читать от курсора	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 6-8	-
Читать всё	ТОЧКИ 1-2-4-5-6 CHORD	-
Читать верхнюю строку активного окна	Левая кнопка-качелька вверх+ Правая кнопка-качелька вверх	-
Читать нижнюю строку активного окна	Левая кнопка-качелька вниз + Правая кнопка-качелька вниз	-
Предыдущее окно документа	ТОЧКИ 2-3 CHORD	-
Следующее окно документа	ТОЧКИ 5-6 CHORD	-
Открыть список	ЛЕВЫЙ SHIFT+ Правая кнопка-качелька вниз	-
Заккрыть список	ЛЕВЫЙ SHIFT+ Правая кнопка-качелька вверх	-
Выход из режима Форм	X CHORD	ТОЧКИ 1-3-4-6 CHORD
Читать подсказку и текст окна	G CHORD	ТОЧКИ 1-2-4-5 CHORD

Клавиши быстрой навигации Microsoft Word

Используйте эти клавиши для навигации по документу Microsoft Word. Клавиши быстрой навигации должны быть включены для того, чтобы эти команды функционировали (**ТОЧКИ 2-8 CHORD**, следом **ТОЧКИ 1-3-5-6**). Обратите внимание, что вы можете добавлять **ТОЧКУ 7** к большинству сочетаний клавиш в приведённой ниже таблице для перехода к предыдущему элементу данного типа в документе. В таблице представлены и сочетания клавиш, и точки Брайля. Если нет эквивалента для сочетания клавиш, то в ячейке точек Брайля будет отображено тире.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Следующая закладка	B	ТОЧКИ 1-2

Следующий комментарий	C	ТОЧКИ 1-4
Следующая сноска	E	ТОЧКИ 1-5
Следующее поле формы	F	ТОЧКИ 1-2-4
Следующая графика	G	ТОЧКИ 1-2-4-5
Следующий заголовок	H	ТОЧКИ 1-2-5
Следующее примечание	O	ТОЧКИ 1-3-5
Следующий абзац	P	ТОЧКИ 1-2-3-4
Предыдущий абзац	P+ТОЧКА 7	ТОЧКИ 1-2-3-4-7
Следующий раздел	S	ТОЧКИ 2-3-4
Следующая таблица	T	ТОЧКИ 2-3-4-5
Следующая страница	ПРОБЕЛ	-
Предыдущая страница	ВОЗВРАТ	ТОЧКА 7

Команды выделения текста

Используйте эти сочетания клавиш для выполнения различных команд выделения текста. В таблице представлены и сочетания клавиш, и точки Брайля. Если нет эквивалента для сочетания клавиш, то в ячейке точек Брайля будет отображено тире.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Выделить предыдущий символ	ТОЧКИ 3-7 CHORD	-
Выделить следующий символ	ТОЧКИ 6-7 CHORD	-
Выделить предыдущее слово	ТОЧКИ 2-7 CHORD	-
Выделить следующее слово	ТОЧКИ 5-7 CHORD	-
Выделить предыдущую строку	ТОЧКИ 1-7 CHORD	-
Выделить следующую строку	ТОЧКИ 4-7 CHORD	-
Выделить предыдущий экран	ЛЕВЫЙ SHIFT+K	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3

Выделить следующий экран	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-6	-
Выделить от начала строки	К+ТОЧКА 7 CHORD	ТОЧКИ 1-3-7 CHORD
Выделить до конца строки	ТОЧКИ 4-6-7 CHORD	--
Выделить от начала	L+ТОЧКИ 7 CHORD	ТОЧКИ 1-2-3-7 CHORD
Выделить до конца	ТОЧКИ 4-5-6-7 CHORD	-
Перейти к началу строки	Кнопка-качелька вверх+кнопка панорамирования	-
Перейти к концу строки	Кнопка-качелька вниз+ кнопка панорамирования	-

Выделение при помощи Кнопок перемещения курсора

Для выделения с помощью кнопок перемещения курсора, нажмите и удерживайте **ЛЕВЫЙ SHIFT**, затем нажмите кнопку перемещения курсора над текстом, где вы хотите начать выделение. Отпустите обе клавиши. Перейдите к месту, где вы хотите закончить выделение, и нажмите **ЛЕВЫЙ SHIFT** плюс кнопку перемещения курсора в этом месте. Используйте любые команды навигации для перехода от начальной точки до конечной точки выделяемого текста, даже NAV Rockers, но если окно, содержащее текст, прокручивается, это влияет на информацию, которая была выделена.

Команды Брайля

Используйте эти клавиатурные сочетания для настройки различных функций Брайля. В таблице представлены и сочетания клавиш, и точки Брайля.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Начало документа	L CHORD	ТОЧКИ 1-2-3 CHORD
Конец документа	ТОЧКИ 4-5-6 CHORD	ТОЧКИ 4-5-6 CHORD
Настроить информативность Брайля (JAWS 12 и ранее)	ТОЧКИ 2-3-8 CHORD следом ТОЧКИ 1-2	ТОЧКИ 2-3-8 CHORD следом ТОЧКИ 1-2
Grade 2 Развернуть текущее слово	T CHORD	ТОЧКИ 2-3-4-5 CHORD
Grade 2 Трансляция	ТОЧКИ 1-2-4-5-7 CHORD	ТОЧКИ 1-2-4-5-7 CHORD
Переключение символов и	Знак CH CHORD	ТОЧКИ 1-6 CHORD

атрибутов		
Переключение режимов дисплея Брайля	M CHORD	ТОЧКИ 1-3-4 CHORD
Переключение 8/6 точечного Брайля	8 CHORD	ТОЧКИ 2-3-6 CHORD
Изменить форму курсора	Знак SH CHORD	ТОЧКИ 1-4-6 CHORD
Ограничить курсор Брайля	R CHORD	ТОЧКИ 1-2-3-5 CHORD
Повторить последнее сообщение	F CHORD	ТОЧКИ 1-2-4 CHORD

Команды Windows

Используйте эти сочетания клавиш для основных функций редактирования в Windows.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
ALT+TAB	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-5	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-5
Вставить из буфера обмена	ЛЕВЫЙ SHIFT+V	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3-6
Скопировать в буфер обмена	ЛЕВЫЙ SHIFT+C	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-4
Вырезать в буфер обмена	ЛЕВЫЙ SHIFT+X	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3-4-6
Отмена последнего действия	ЛЕВЫЙ SHIFT+Z	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3-5-6
Удалить	ЛЕВЫЙ SHIFT+D	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-4-5

Команды выделения

Используйте эти сочетания клавиш для выделения символов, строк и других элементов страницы.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Выделить следующий символ	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 6	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 6

Выделить предыдущий символ	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 3	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 3
Выделить следующую строку	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 4	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 4
Выделить предыдущую строку	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 1	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 1
Выделить до конца строки	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 5	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 5
Выделить от начала строки	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 2	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКА 2
Выделить сверху	ЛЕВЫЙ SHIFT+L	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3
Выделить до низа	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-5-6	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-5-6
Выделить следующий экран	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-6	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 4-6
Выделить предыдущий экран	ЛЕВЫЙ SHIFT+K	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3
Выделить все	ЛЕВЫЙ SHIFT+ шеститочие	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3-4-5-6
Выбрать фрейм	ПРАВЫЙ SHIFT+9	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-5
Выбрать заголовок	ПРАВЫЙ SHIFT+6	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-3-5
Выбрать ссылку	ПРАВЫЙ SHIFT+7	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-3-5-6

Команды JAWS

Используйте эти сочетания клавиш для выполнения некоторых наиболее распространенных функций JAWS.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Окно JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+J	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-4-5
Быстрые настройки (JAWS 13 и выше) или Настройка информативности JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+V	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3-6

(JAWS 12 и ранее)		
Открыть список задач	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-5-6	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-5-6
Список значков системного трея	ПРАВЫЙ SHIFT+K	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3
Произнести системное время	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-3
Перетащить	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-7 CHORD	-
Обновить экран	ПРАВЫЙ SHIFT+Z	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-3-5-6
Назвать шрифт	ПРАВЫЙ SHIFT+F	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-4
Справка по клавишам Windows	ПРАВЫЙ SHIFT+W	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-4-5-6
Читать текущее окно	ПРАВЫЙ SHIFT+B	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2
Кнопка по умолчанию в Диалоге	ПРАВЫЙ SHIFT+E	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-5
Завершение работы JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+4	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-5-6
Выбрать голосовой профиль	ПРАВЫЙ SHIFT+S	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-3-4

Функции курсора

Используйте эти сочетания клавиш, чтобы выбрать курсор для навигации JAWS.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
JAWS-курсор	J CHORD	ТОЧКИ 2-4-5 CHORD
PC-курсор	P CHORD	ТОЧКИ 1-2-3-4 CHORD
Сенсорный курсор (JAWS 15 и выше)	ТОЧКИ 1-2-5-6 CHORD	ТОЧКИ 1-2-5-6 CHORD
Привести JAWS к PC	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-6 (Знак МИНУС)	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-6
Привести PC к JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+Знак ING	ПРАВЫЙ

	(Знак ПЛЮС)	SHIFT+ТОЧКИ 3-4-6
Брайлевский следует за активным	ТОЧКИ 1-2-6 CHORD	ТОЧКИ 1-2-6 CHORD
Активный следует за брайлевским	ТОЧКИ 1-2-7 CHORD	ТОЧКИ 1-2-7 CHORD
Привести брайлевский курсор к РС-курсору	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-4-6	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-4-6
Привести брайлевский курсор к активному курсору	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-6	ЛЕВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 3-6

Служебные команды

Используйте эти сочетания клавиш для основных служебных команд.

Название клавиши	Сочетания клавиш	Точки Брайля
Выполнить диспетчер JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+2	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-3
Установить верхний левый угол фрейма	ПРАВЫЙ SHIFT+ Знак OW	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-4-6
Установить нижний правый угол фрейма	ПРАВЫЙ SHIFT+ Знак ER	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-4-5-6
Маркировщик графики	ПРАВЫЙ SHIFT+G	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-4-5
Поиск JAWS	ПРАВЫЙ SHIFT+F CHORD	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 1-2-4 CHORD
JAWS Найти далее	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-5	ПРАВЫЙ SHIFT+ТОЧКИ 2-5

Требования к окружающей среде

Хранение

Температура от 0° до 45°С (от 32 до 113 F)

Относительная влажность 80 % неконденсирующаяся

Работа

Температура от 5° до 35° С (от 40 до 95 F)

Относительная влажность 60 % неконденсирующаяся

Дисплей Брайля Focus имеет встроенные диагностические тесты для кнопок перемещения курсора, брайлевского дисплея, NAV Rockers, кнопок Режима, брайлевских клавиш, кнопок панорамирования, кнопок-качелек, кнопок выбора и кнопок-качелек панорамирования.

Перед входом в режим диагностики отсоедините дисплей Focus от компьютера и убедитесь, что он выключен.

Вход и выход из режима диагностики

Одновременно нажмите две кнопки перемещения курсора (крайние кнопки слева над ячейками один и два), удерживая кнопку питания в нажатом положении. Отобразится текст "press cr key/nav/panel keys", указывающий, что режим диагностики включен.

Нажмите кнопку питания снова, чтобы выйти из режима диагностики.

Тест кнопок перемещения курсора

Тест кнопок перемещения курсора позволяет выяснить, работает ли должным образом каждая из кнопок перемещения курсора на дисплее Брайля. Нажмите любую кнопку перемещения курсора, чтобы активизировать все точки в ячейке под кнопкой.

Тест/Очистка дисплея

Необходимо отсоединить дисплей Focus Blue от компьютера и убедиться, что питание отключено перед началом этого теста. Тест дисплея используется, чтобы выяснить, может ли быть активизирован каждый штифт на дисплее Брайля. Тест дисплея также позволяет прочистить брайлевский дисплей. Нажмите кнопку питания, одновременно нажимая крайние справа кнопки перемещения курсора (над двумя последними ячейками). Это действие заставит активизироваться все брайлевские ячейки для чистки. Используйте мягкую ткань, смоченную в изопропиловом спирте. Нельзя использовать для чистки ячеек какие-либо другие заменители.

При нахождении в этом режиме нажатие любой правой или левой кнопки NAV Rocker вызывает деактивацию всех ячеек. Нажатие левой или правой кнопки NAV Rocker снова активизирует все ячейки.

Нажатие левой или правой кнопки Режима вызывает периодическое опускание и поднятие всех ячеек. Чтобы остановить этот процесс, нажмите кнопку Режима снова.

Тест клавиш и элементов управления

Тест клавиш и элементов управления позволяет проверить работу клавиш, элементов управления и круговых регуляторов. Вы можете начать тест клавиш после входа в режим диагностики, нажимая каждую из перечисленных в приведенной ниже таблице клавиш. Дисплей Брайля отреагирует на каждую нажатую клавишу. Обратитесь к таблице для получения точного брайлевского текста. Нажимайте каждую клавишу и элемент управления и проверяйте, что отобразился соответствующий текст.

Клавиша	Отображается
Точка 1	1
Точка 2	2
Точка 3	3
Точка 4	4
Точка 5	5
Точка 6	6
Точка 7	7
Точка 8	8
Левая клавиша SHIFT	kls
Правая клавиша SHIFT	krs
Пробел	ksp
Левая кнопка панорамирования	pl
Правая кнопка панорамирования	pr
Левая кнопка выбора	sl
Правая кнопка выбора	sr
Левая кнопка Режима	nml
Левая клавиша NAV Rocker вверх	nlu
Правая кнопка Режима	nmr
Правая клавиша NAV Rocker вверх	nru
Правая клавиша NAV Rocker вниз	nrd
Левая клавиша NAV Rocker вниз	nld
Левая кнопка-качелька вверх	rlu
Левая кнопка-качелька вниз	rlд
Правая кнопка-качелька вверх	rru
Правая кнопка-качелька вниз	rrд
Левая кнопка-качелька панорамирования вверх	blu
Левая кнопка-качелька панорамирования вниз	bld
Правая кнопка-качелька панорамирования вверх	bru
Правая кнопка-качелька панорамирования вниз	brд

Режим информации о состоянии батареи

До входа в этот режим отсоедините Focus от компьютера и убедитесь, что питание отключено. Нажмите кнопку питания, одновременно нажимая кнопку перемещения курсора над второй ячейкой. Focus отобразит дополнительную информацию о внутренней батарее.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Решение
Дисплей не включается.	Зарядите батарею при помощи адаптера питания, или подключив Focus к компьютеру при помощи USB-кабеля. Устройство всегда включено, когда имеется подключение по USB. Если дисплей не подключен к USB, убедитесь, что вы нажали и удерживали кнопку питания как минимум в течение трех секунд.
Батарея не заряжается или заряжается дольше, чем ожидалось.	Убедитесь, что вы заряжаете Focus Blue при помощи поставляемого Freedom Scientific адаптера питания. Время зарядки аккумулятора при помощи данного адаптера занимает максимум три часа. Если вы заряжаете дисплей при помощи USB-подключения к ПК, то время зарядки будет несколько дольше. Чтобы убедиться, что Focus заряжается правильно, нажмите кнопку питания для отображения информации о состоянии дисплея.
На дисплее появляются дополнительные точки, и они залипают.	Очистите дисплей, активировав Тест дисплея в режиме диагностики, затем при помощи мягкой ткани, смоченной изопропиловым спиртом, очистите ячейки. См. Тест/Очистка дисплея данного руководства для более подробной информации.
Отсутствует связь между дисплеем Focus и компьютером.	Если вы используете JAWS 11 или более позднюю версию, убедитесь, что JAWS правильно установлен на вашем компьютере. См. раздел «Добавление поддержки JAWS для дисплея Focus», чтобы получить дополнительную информацию о настройке USB- и Bluetooth-соединения. Если вы используете JAWS 10 или более раннюю версию, или программу экранного доступа стороннего производителя, необходимо установить драйвер с сопроводительного CD Focus, до начала использования дисплея.