

Дозатор
Ленпипет Лайт



Легкое решение для оптимального дозирования



ООО «Агролаб» 630501, г.Новосибирск,
р.п Краснообск зд.25 офис 301
8 (383) 280-42-38, 8-913-457-38-11

e-mail: agro-lab@yandex.ru, agrolab15@yandex.ru

Дозатор Ленпипет Лайт

Новое решение для нового времени — дозатор Ленпипет Лайт

Усовершенствованный механизм установки объема дозирования (AVG)

Дозатор Лайт оборудован автономным модульным механизмом регулировки объема для повышения точности и воспроизводимости. Новая точная регулировка объема позволяет установить объем дозирования с наименьшим шагом.

Кроме того, для уменьшения влияния тепла руки на результат дозирования механизм установки объема имеет термоизоляцию от корпуса дозатора.

Большой и четкий дисплей

Для лучшей читаемости установленного объема дозатор имеет большой контрастный черно-белый дисплей с крупными цифрами.

Также мы добавили шкалу сверхточной установки объема, чтобы улучшить точность и воспроизводимость результатов дозирования.

Легкость дозирования


При рутинной работе в лаборатории необходим удобный дозатор. Ленпипет Лайт отвечает всем современным требованиям эргономики, повышает комфортность работы лаборанта, значительно уменьшает постоянное напряжение мышц и сухожилий руки и предотвращает риск развития «травмы от постоянного напряжения» (RSI, repetitive strain injury), связанной с профессиональной деятельностью.

Новая конструкция операционной кнопки

Верхняя часть операционной кнопки свободно вращается, предотвращая случайное изменение установленного объема. При этом нижняя часть операционной кнопки остается неподвижной и обеспечивает точную установку объема.

Дозатор Ленпипет Лайт сочетает в себе новый дизайн, эргономику и функциональность, что позволяет добиться нового уровня точности и надежности дозирования.

Совершенство функции и дизайна

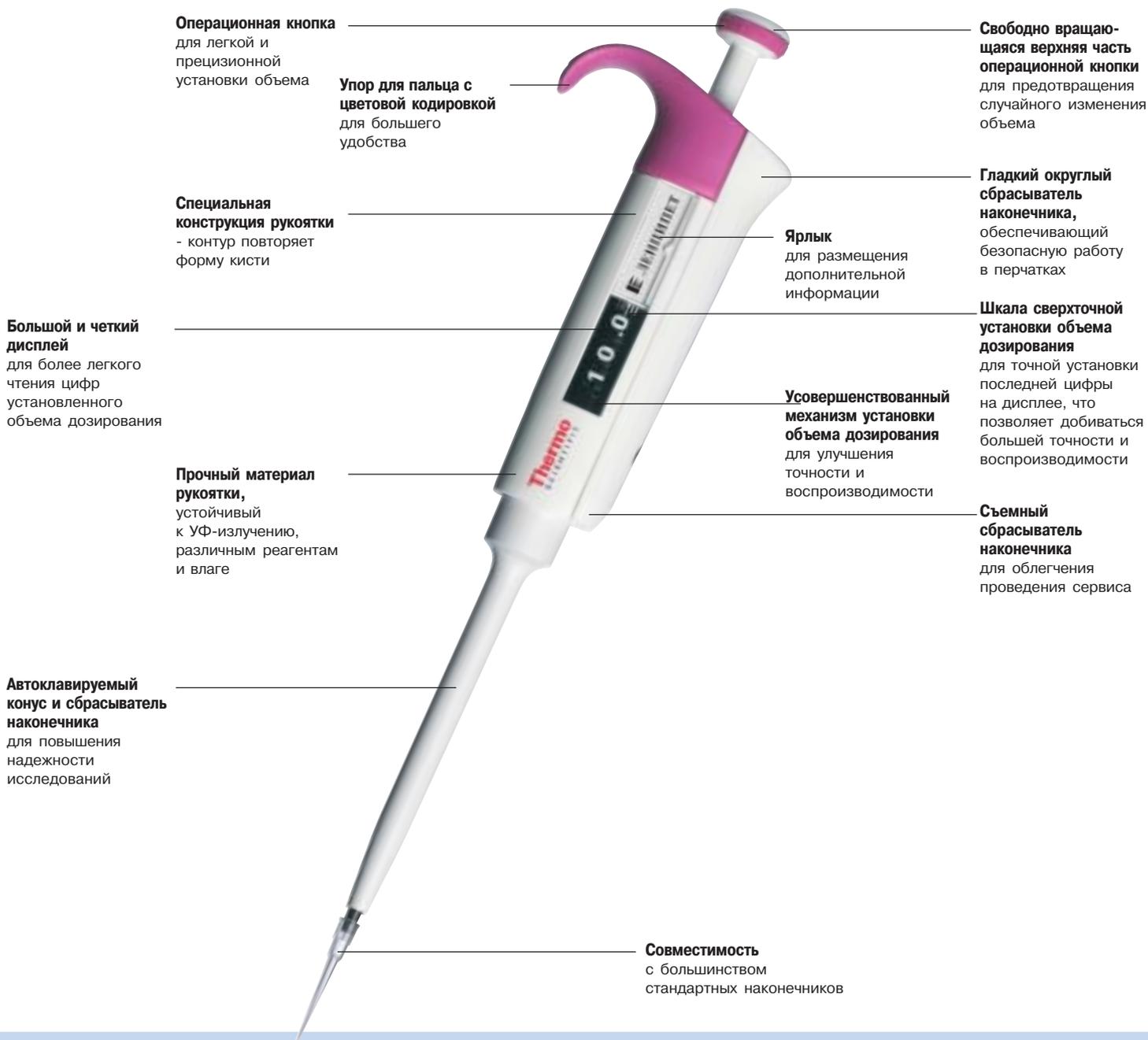

Операционная кнопка
для легкой и
прецизионной
установки объема

**Упор для пальца с
цветовой кодировкой**
для большего
удобства

**Свободно вращаю-
щаяся верхняя часть
операционной кнопки**
для предотвращения
случайного изменения
объема

**Специальная
конструкция рукоятки**
- контур повторяет
форму кисти

Ярлык
для размещения
дополнительной
информации

**Гладкий округлый
сбрасыватель
наконечника,**
обеспечивающий
безопасную работу
в перчатках

**Большой и четкий
дисплей**
для более легкого
чтения цифр
установленного
объема дозирования

**Усовершенствованный
механизм установки
объема дозирования**
для улучшения
точности и
воспроизводимости

**Шкала сверхточной
установки объема
дозирования**
для точной установки
последней цифры
на дисплее, что
позволяет добиваться
большей точности и
воспроизводимости

**Прочный материал
рукоятки,**
устойчивый
к УФ-излучению,
различным реагентам
и влаге

**Съемный
сбрасыватель
наконечника**
для облегчения
проведения сервиса

**Автоклавируемый
конус и сбрасыватель
наконечника**
для повышения
надежности
исследований

Совместимость
с большинством
стандартных наконечников



Технические характеристики дозаторов переменного объема Ленпипет Лайт**

Кат. №	Наименование	Объем		Точность		Воспр-мость		Цвет. код	Наконечник
		мкл	мкл	%	s.d.*мкл	CV%*			
4640002	Ленпипет Лайт 1-10 мкл, Микро	10	±0.10	±1.0	0.05	0.5	розовый	10	
		1	±0.025	±2.5	0.02	2.0			
4640012	Ленпипет Лайт 1-10 мкл	10	±0.10	±1.0	0.08	0.8	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
		1	±0.035	±3.5	0.03	3.0			
4640022	Ленпипет Лайт 2-20 мкл, Микро	20	±0.20	±1.0	0.08	0.4	бирюзовый	50	
		2	±0.06	±3.0	0.05	2.5			
4640032	Ленпипет Лайт 2-20 мкл	20	±0.20	±1.0	0.08	0.4	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
		2	±0.06	±3.0	0.05	2.5			
4640042	Ленпипет Лайт 10-100 мкл	100	±0.80	±0.8	0.20	0.2	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
		10	±0.30	±3.0	0.10	1.0			
4640052	Ленпипет Лайт 20-200 мкл	200	±1.2	±0.6	0.6	0.3	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
		20	±0.6	±3.0	0.3	1.5			
4640062	Ленпипет Лайт 100-1000 мкл	1000	±5.0	±0.5	2.0	0.2	синий	1000	
		100	±1.5	±1.5	0.6	0.6			
4640072	Ленпипет Лайт 1-10 мл	10000	±50.0	±0.5	20.0	0.2	красный	10 мл, 10 мл Удл.	
		1000	±20.0	±2.0	8.0	0.8			

* s.d. - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

** Ограничения калибровки производителя.

Технические характеристики дозаторов фиксированного объема Ленпипет Лайт**

Кат. №	Диапазон	Объем		Точность		Воспр-мость		Цвет. код	Наконечник
		мкл	мкл	%	s.d.*мкл	CV%*			
4650002	Ленпипет Лайт 1 мкл, Микро	1	±0.04	±4.0	0.04	4.0	розовый	10, 20, 50	
4650012	Ленпипет Лайт 5 мкл, Микро	5	±0.07	±1.4	0.07	1.4	розовый	10, 20, 50	
4650022	Ленпипет Лайт 10 мкл	10	±0.09	±0.9	0.08	0.8	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
4650032	Ленпипет Лайт 25 мкл	25	±0.15	±0.6	0.13	0.5	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
4650042	Ленпипет Лайт 50 мкл	50	±0.3	±0.6	0.2	0.4	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
4650052	Ленпипет Лайт 100 мкл	100	±0.4	±0.4	0.3	0.3	желтый	250 Унив., 200 Удл.	
4650062	Ленпипет Лайт 250 мкл	250	±1.0	±0.4	0.8	0.3	синий	1000	
4650072	Ленпипет Лайт 500 мкл	500	±1.5	±0.3	1.5	0.3	синий	1000	
4650082	Ленпипет Лайт 1000 мкл	1000	±3.0	±0.3	3.0	0.3	синий	1000	

* s.d. - стандартное отклонение, CV - коэффициент вариации

** Ограничения калибровки производителя.



ООО «Агролаб» 630501, г.Новосибирск,
р.п Краснообск зд.25 офис 301
8 (383) 280-42-38, 8-913-457-38-11

Thermo
SCIENTIFIC