

ELITE MODEL

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
 TYPE 3 DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
 HARTGIPS, KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
 PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
 YESO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS


WATER / POWDER RATIO 30 ml / 100 g
 WORKING TIME 7'
 SETTING TIME (VICAT)* 12'
 SETTING EXPANSION 2h* 0.04 %
 COMPRESSIVE STRENGTH 1h* 31 MPa

ELITE MODEL FAST


THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER MODELLI IN GENERE E ANTAGONISTI
 TYPE 3 FAST DENTAL STONE FOR ANTAGONISTS AND MODELS IN GENERAL
 SCHNELLABBINDENDER HARTGIPS, KLASSE 3, FÜR SITUATIONS- UND GEGENBISSMODELLE
 PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR MODÈLES EN GÉNÉRAL ET D'ANTAGONISTES
 YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA MODELOS EN GENERAL Y ANTAGONISTAS


WATER / POWDER RATIO 30 ml / 100 g
 WORKING TIME 4'
 SETTING TIME (VICAT)* 8'
 SETTING EXPANSION 2h* 0.1 %
 COMPRESSIVE STRENGTH 1h* 36 MPa

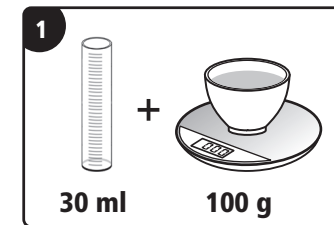


Rapporto acqua/polvere
 Water/powder ratio
 Wasser/Pulver Verhältnis
 Ratio eau/poudre
 Dosificación agua/polvo

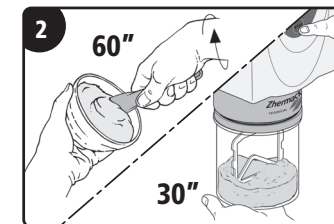





Miscelare per 60/30 secondi
 Mix for 60/30 seconds
 60/30 Sekunden anmischen
 Mélanger pendant 60/30 secondes
 Mezclar entro 60/30 segundos

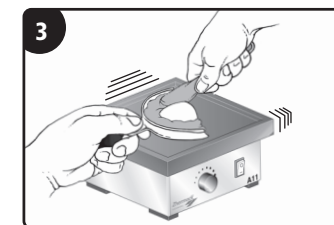

Colare il gesso con vibrazione
 Pour the stone using vibration
 Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
 Couler le plâtre sous vibrations
 Vaciar el yeso con vibración

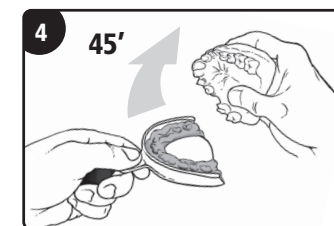

Tempo di rimozione
 Removal time
 Entformungszeit
 Délai de démoulage
 Tiempo de remoción

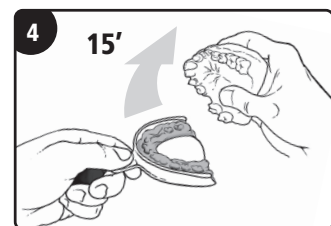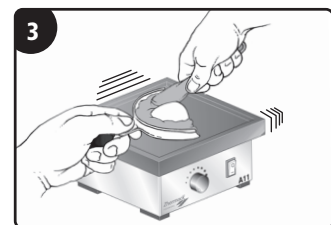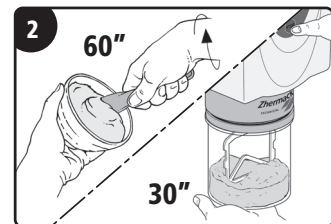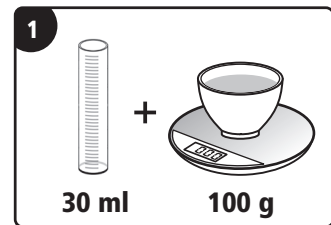


ELITE ARTI


THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
 TYPE 3 ARTICULATING DENTAL STONE
 ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
 PLÂTRE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
 YESO TIPO 3 PARA ARTICULADORES


WATER / POWDER RATIO 30 ml / 100 g
 WORKING TIME 3'
 SETTING TIME (VICAT)* 5'
 SETTING EXPANSION 2h* 0.02 %
 COMPRESSIVE STRENGTH 1h* 26 MPa

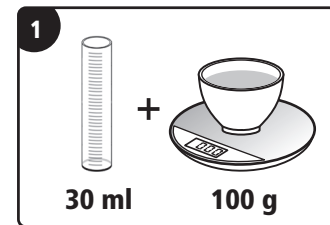


Rapporto acqua/polvere
 Water/powder ratio
 Wasser/Pulver Verhältnis
 Ratio eau/poudre
 Dosificación agua/polvo

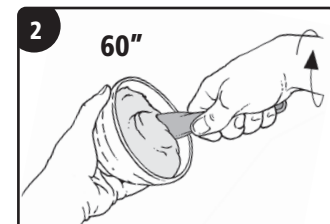

Miscelare per 60 secondi
 Mix for 60 seconds
 60 Sekunden anmischen
 Mélanger pendant 60 secondes
 Mezclar entro 60 segundos

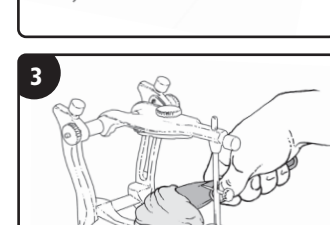

Miscelare per 45 secondi
 Mix for 45 seconds
 45 Sekunden anmischen
 Mélanger pendant 45 secondes
 Mezclar entro 45 segundos

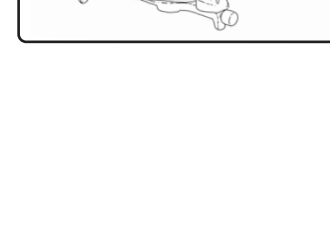




Applicare sull'articolatore
 Put on articulator
 In den Artikulator einsetzen
 Appliquer sur l'articulateur
 Aplicar en el articulador

ELITE ARTI FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 3 PER ARTICOLATORI
 TYPE 3 FAST SETTING ARTICULATING DENTAL STONE
 SCHNELLABBINDENDER ARTIKULATIONSGIPS, KLASSE 3
 PLÂTRE RAPIDE TYPE 3 POUR ARTICULATEURS
 YESO RÁPIDO TIPO 3 PARA ARTICULADORES

WATER / POWDER RATIO 30 ml / 100 g
 WORKING TIME 2'
 SETTING TIME (VICAT)* 3'
 SETTING EXPANSION 2h* 0.02 %
 COMPRESSIVE STRENGTH 1h* 26 MPa

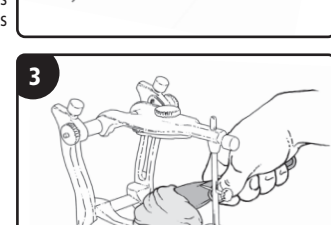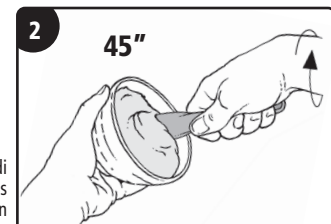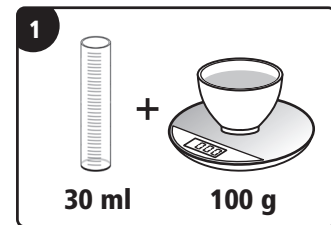


ELITE ORTHO


THIXOTROPIC

GESSO TIPO 3 PER MODELLI IN ORTODONZIA
 TYPE 3 DENTAL STONE FOR ORTHODONTIC MODELS
 KFO GIPS, KLASSE 3
 PLÂTRE TYPE 3 POUR MODÈLES EN ORTHODONTIE
 YESO TIPO 3 PARA MODELOS, EN ORTODONCIA


WATER / POWDER RATIO 24 ml / 100 g
 WORKING TIME 7'
 SETTING TIME (VICAT)* 14'
 SETTING EXPANSION 2h* 0.04 %
 COMPRESSIVE STRENGTH 1h* 32 MPa

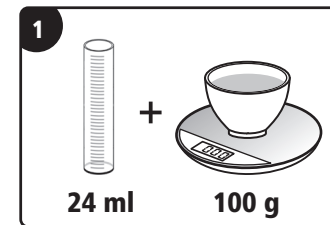


Rapporto acqua/polvere
 Water/powder ratio
 Wasser/Pulver Verhältnis
 Ratio eau/poudre
 Dosificación agua/polvo

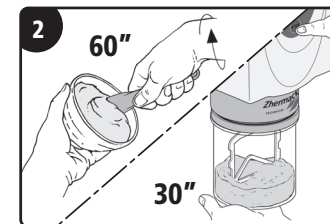

Miscelare per 60/30 secondi
 Mix for 60/30 seconds
 60/30 Sekunden anmischen
 Mélanger pendant 60/30 secondes
 Mezclar entro 60/30 segundos

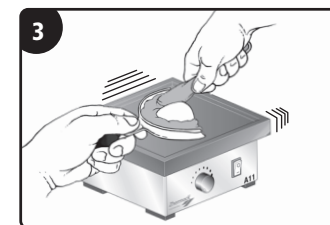

Colare il gesso con vibrazione
 Pour the stone using vibration
 Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
 Couler le plâtre sous vibrations
 Vaciar el yeso con vibración

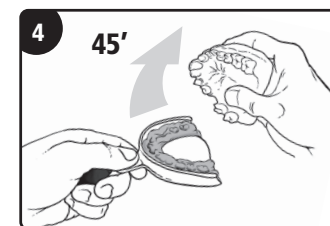

Tempo di rimozione
 Removal time
 Entformungszeit
 Délai de démoulage
 Tiempo de remoción

Zhermack
 Dental

ELITE DENTAL STONES

type 4

elite master

elite rock
 thixotropic

elite rock fast
 thixotropic

elite stone
 thixotropic

elite stone fast
 thixotropic

elite base

type 3

elite model
 thixotropic

elite model fast
 thixotropic

elite arti
 thixotropic

elite arti fast
 thixotropic

elite ortho
 thixotropic

Zhermack S.p.A.
 Via Bovazecchino, 100 | 45201 Badia Polesine (RO) Italy
 T +39 0425 597611 | F +39 0425 53596
 info@zhermack.com | www.zhermack.com

01/2023/15/05 Last Update: 06/2015



*testato in conformità alla ISO 6873 - *test complies with ISO 6873 - *test conforme à la norme ISO 6873 - *la prueba cumple con la norma ISO 6873 - *Der Test erfüllt die Norm ISO 6873 - IT_I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. - EN_The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique. - DE_Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischverfahren abweichen. - FR_Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. - ES_Tiempos indicativos sujetos a variación según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla. IT_Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto. EN_Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place. FR_Plâtre à usage dentaire. Le produit est sensible à l'humidité et doit être conservé dans un environnement sec. ES_Yeso de uso dental. Producto sensible a la humedad: conservarlo en lugar seco. DE_Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.

ELITE MASTER

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 RINFORZATO CON RESINA PER MONCONI IN PROTESI FISSA E IMPLANTOLOGIA


TYPE 4 EXTRA HARD RESIN REINFORCED DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS AND IMPLANTS

SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE UND IMPLANTATARBEITEN


PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 RENFORCÉ AVEC RÉSINE POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE ET IMPLANTOLOGIE

YESO TIPO 4 EXTRA DURO REFORZADO CON RESINA PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJA E IMPLANTOLOGÍA

WATER / POWDER RATIO	21 ml / 100 g
WORKING TIME	12'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	50 MPa

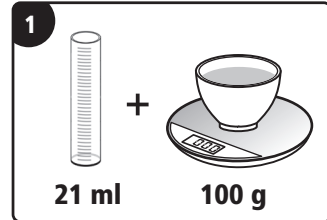


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

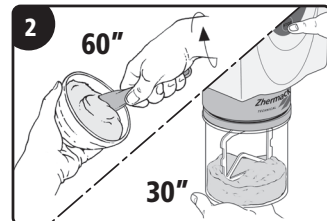

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos



Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

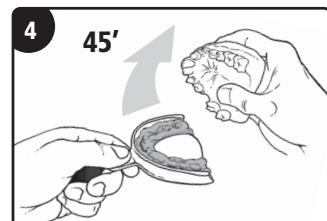

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE ROCK

THIXOTROPIC

GESSO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA


TYPE 4 EXTRA HARD DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS

SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE


PLÂTRE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE

YESO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS


WATER / POWDER RATIO	20 ml / 100 g
WORKING TIME	12'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	52 MPa

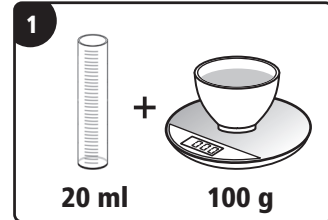


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

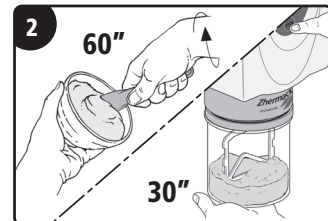

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

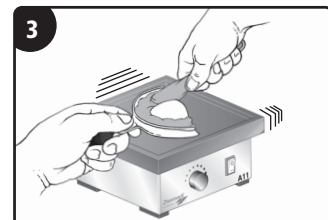

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

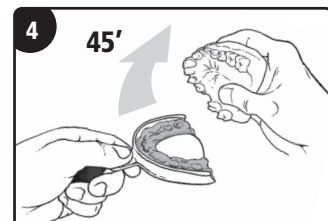

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE ROCK FAST

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PER MONCONI IN PROTESI FISSA


TYPE 4 EXTRA HARD FAST DENTAL DIE STONE FOR FIXED PROSTHESIS

SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR STUMPFMODELLE


PLÂTRE RAPIDE EXTRA DUR TYPE 4 POUR MOIGNONS EN PROTHÈSE FIXE

YESO RÁPIDO EXTRA DURO TIPO 4 PARA MUÑONES, EN PRÓTESIS FIJAS


WATER / POWDER RATIO	20 ml / 100 g
WORKING TIME	5'
SETTING TIME (VICAT)*	9'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	52 MPa

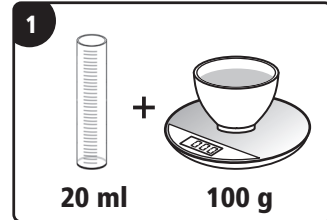


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

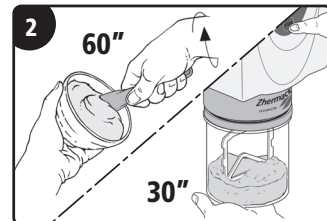

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

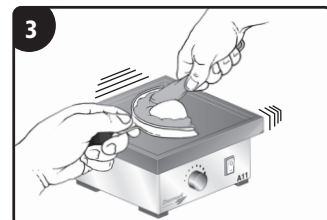

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

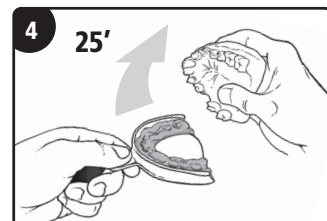

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE STONE

THIXOTROPIC

GESSO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE


TYPE 4 DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS

SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN


PLÂTRE TYPE 4 POUR MODÈLES MASTER EN PROTHÈSE AMOVIBLE

YESO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES


WATER / POWDER RATIO	25 ml / 100 g
WORKING TIME	8'
SETTING TIME (VICAT)*	14'
SETTING EXPANSION 2h*	0.08 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	42 MPa

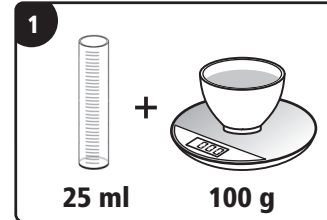


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

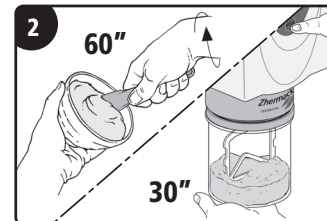

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

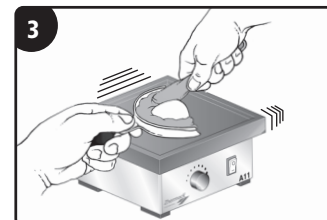

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

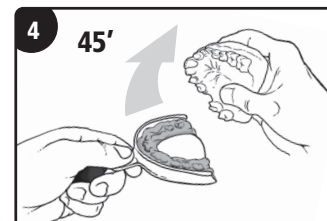

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

ELITE STONE FAST ELITE BASE

THIXOTROPIC

GESSO RAPIDO TIPO 4 PER MODELLI MASTER IN PROTESI RIMOVIBILE


TYPE 4 FAST DENTAL DIE STONE FOR MASTER MODELS IN REMOVABLE PROSTHESIS

SCHNELLABBINDENDER SUPERHARTGIPS, KLASSE 4, FÜR HERAUSNEHMBARE PROTHESEN


PLÂTRE RAPIDE TYPE 4 POUR PROTHÈSE AMOVIBLE ET STELLITES

YESO RÁPIDO TIPO 4 PARA MODELOS MASTER EN PRÓTESIS REMOVIBLES


WATER / POWDER RATIO	25 ml / 100 g
WORKING TIME	3' 30"
SETTING TIME (VICAT)*	6'
SETTING EXPANSION 2h*	0.09 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	42 MPa

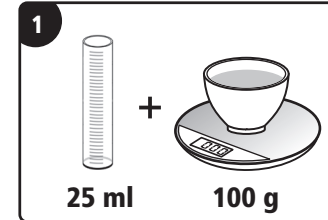


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

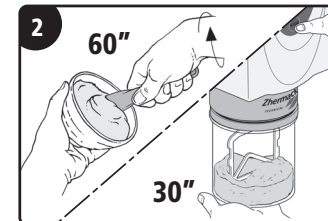

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

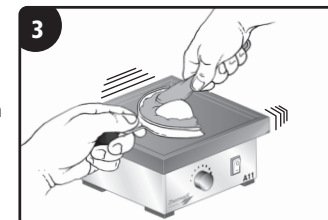

Colare il gesso con vibrazione
Pour the stone using vibration
Den Gips auf einem Rüttler ausgießen
Couler le plâtre sous vibrations
Vaciar el yeso con vibración

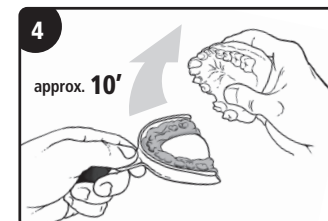

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

GESSO TIPO 4 PER BASI


TYPE 4 DENTAL STONE FOR BASES

FLÜSSIGER SOCKELGIPS, KLASSE 4


PLÂTRE TYPE 4 POUR SOCLES

YESO TIPO 4 PARA BASES


WATER / POWDER RATIO	23 ml / 100 g
WORKING TIME	5'
SETTING TIME (VICAT)*	18'
SETTING EXPANSION 2h*	0.05 %
COMPRESSIVE STRENGTH 1h*	40 MPa

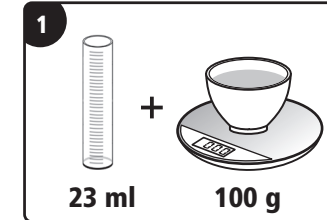


Rapporto acqua/polvere
Water/powder ratio
Wasser/Pulver Verhältnis
Ratio eau/poudre
Dosificación agua/polvo

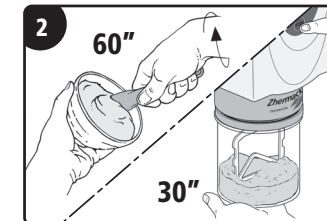

Miscelare per 60/30 secondi
Mix for 60/30 seconds
60/30 Sekunden anmischen
Mélanger pendant 60/30 secondes
Mezclar entro 60/30 segundos

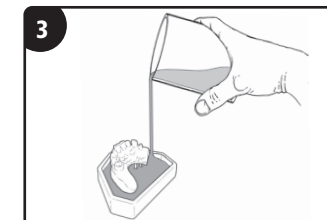

Colare nello stampo per basi
Pour on the base-tray
Auf den Sockelträger gießen
Couler dans le porte-socles
Vaciar en el portazocalado

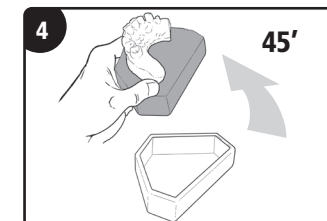

Tempo di rimozione
Removal time
Entformungszeit
Délai de démoulage
Tiempo de remoción

*testato in conformità alla ISO 6873 - *test complies with ISO 6873 - *test conforme à la norme ISO 6873 - *la prueba cumple con la norma ISO 6873 - *Der Test erfüllt die Norm ISO 6873 - IT I tempi indicati possono variare in base alla temperatura ambientale e alla tecnica di miscelazione. - EN The times indicated may vary according to room temperature and mixing technique.

DE Die angegebenen Zeiten können je nach Umgebungstemperatur und Anmischverfahren abweichen. - FR Les temps indiqués peuvent varier en fonction de la température ambiante et de la technique de mélange. - ES Tiempos indicativos sujetos a variación según la temperatura ambiente y la técnica de mezcla.

IT Gesso per uso dentale. Il prodotto è sensibile all'umidità, conservare in luogo asciutto. EN Dental stone. This product is humidity-sensitive, store in a dry place. FR Plâtre à usage dentaire. Le produit est sensible à l'humidité et doit être conservé dans un environnement sec. ES Yeso de uso dental. Producto sensible a la humedad: conservarlo en lugar seco. DE Gips für den dentalen Gebrauch. Das Produkt ist feuchtigkeitsempfindlich, an einem trockenen Ort aufbewahren.