



За каждым успешным
имплантологом стоит Implantmed



Аппарат Implantmed от фирмы W&H

Ваш надежный партнер:
с помощью аппарата Implantmed вы
сможете с максимальной точностью
проводить хирургические операции
в области имплантологии,
микрохирургии и хирургии мелких
костей. Приводной модуль фирмы
W&H впечатляет большим и легко
считываемым дисплеем, встроенной

функцией нарезки резьбы и мощным
микромотором. В сочетании с
прямыми и угловыми наконечниками
производства компании W&H
аппарат демонстрирует идеальный
баланс с использованием всех
составляющих имплантологического
приема. Хирурги могут выполнять
длительные процедуры без

каких-либо признаков усталости рук.
Управление работой аппарата
обеспечивается ножной педалью.
Наличие педали гарантирует
оптимальную свободу движений
для обеих рук врача, и вы можете
сосредоточиться на самом важном –
лечении ваших пациентов.



- > Мощный мотор
- > Большой, легко считываемый дисплей
- > Автоматическая функция нарезки резьбы
- > Мотор с кабелем можно подвергать термической дезинфекции и стерилизации



Для ежедневного использования

Удобство в применении

Только самое существенное: аппарат Implantmed исключительно удобен в эксплуатации. Нажимая кнопки „минус“ и „плюс“, вы меняете


соответствующие величины, которые четко различимы на большом дисплее.



Мощный мотор

С крутящим моментом мотора 5,5 Н.см и частотой вращения в интервале 300 – 40 000 об./мин. аппарат Implantmed представляет собой мощнейший прибор – один из лучших в своем классе.

Автоматическое управление величиной крутящего момента в интервале от 5 до 70 Н.см гарантирует безопасность инструментов.

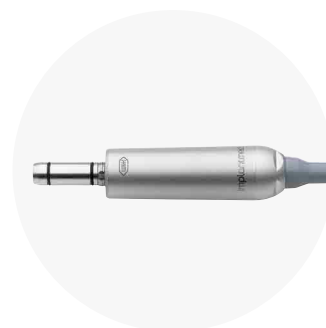

Работа без усталости

Сочетание легкого мотора и углового наконечника эргономичной формы идеально

сбалансировано – вы можете долго работать без усталости рук.



Автоматическая функция нарезки резьбы

Функция нарезки резьбы незаменима в том случае, когда перед вами стоит задача вставить имплантат в твердую кость. Функция нарезки резьбы

уменьшает сжатие кости и способствует вживлению имплантата без излишних усилий и напряжения.



Рекомендуемые наконечники:

Прямые и угловые наконечники для имплантологии и хирургии



WS-75 LED G
разборный

WI-75 LED G
неразборный



S-11 LED G
разборный

SI-11 LED G
неразборный



WS-75 E/KM
разборный

WI-75 E/KM
неразборный



S-11
разборный



S-9
разборный



LED+ W&H другие светодиоды

W&H LED+

Светодиоды от компании W&H – больше цвета, больше контраста!

Индекс цветопередачи (CRI) искусственных источников света является важнейшим фактором для работы врача, так как высокая величина CRI значительно улучшает самочувствие пользователей и обеспечивает большую видимость. Идеальный показатель цветопередачи равен 100. Обычные светодиоды имеют величину CRI от 60 до 80 и неудовлетворительно воспроизводят красные тона спектра, – это весьма

существенный недостаток, с которым сталкиваются врачи во время медицинских применений. Однако в своих хирургических наконечниках компания W&H использовала новейшие технологии. В результате величина CRI превышает 90, что повышает четкость цветовых контрастов и обеспечивает исключительное воспроизведение естественных красных тонов при работе врача-имплантолога в полости рта.

Технические данные



Вы можете сканировать QR-код, используя ваш мобильный телефон для получения информации о работе аппарата Implantmed

Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций. Дополнительное оборудование и принадлежности не входят в комплект поставки.

Тип:	Implantmed SI-923	Implantmed SI-915
Максимальный крутящий момент на вращающемся инструменте:	70 Н.см	70 Н.см
Напряжение сети:	220 – 240 В	100 – 130 В
Сетевой предохранитель:	250 В – Т1,25АН – 2 шт	250 В – Т1,25АН – 2 шт
Максимальная механическая выходная мощность:	70 Вт	70 Вт
Максимальный крутящий момент мотора:	5,5 Н.см	5,5 Н.см
Диапазон частоты вращения мотора при номинальном напряжении:	300 – 40 000 мин ⁻¹	300 – 40 000 мин ⁻¹
Максимальный расход хладагента:	приблиз. 100 мл/мин	приблиз. 100 мл/мин
Ножная педаль управления:	S-N1	S-N1

Ножная педаль S-N1

С помощью данной педали можно включать программы, включать и выключать насос подачи хладагента, включать и выключать аппарат, менять вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки, плавно регулировать частоту вращения мотора до заданной максимальной величины.



Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com

Авторизованный дилер:

